

Medis Suite MRCT 2025

Manuale Dell'Utente



Medis Medical Imaging Systems BV.
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden, Paesi Bassi



<http://www.medisimaging.com/>

Sul sito web di Medis, selezionare "Prodotti" e quindi il gruppo di prodotti applicabile. La documentazione per l'utente è disponibile in questa pagina.

Medis Medical Imaging

Schuttersveld 9
2316 XG Leiden
The Netherlands

P +31 71 522 32 44

E support@medisimaging.com

Medis Medical Imaging Inc

9360 Falls of Neuse Road, Suite 103
Raleigh, NC 27615-2484
USA

P +1 (919) 278 7888

E support@medisimaging.com

Medis Medical Imaging Japan

Kabutocho 1st Heiwa Bldg. 3F 5-1
Nihonbashi Kabutocho, Chuo-ku, 103-0026
Tokyo, Japan

P +81(0)3 6778 2589

E support@medisimaging.com

Note legali

Nota sul copyright

© 2003-2025 Medis Medical Imaging Systems BV. Tutti i diritti riservati.

Il presente manuale è protetto da copyright e dalle Leggi sui diritti d'autore e dalle disposizioni dei Trattati Internazionali. È vietato copiare, riprodurre, modificare, pubblicare o distribuire in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo e per qualsiasi scopo qualsiasi parte del presente manuale senza previo consenso scritto della Medis Medical Imaging Systems BV. È concesso stampare gratuitamente copie non modificate del presente documento nella sua interezza, purché tali copie non vengano prodotte o distribuite a fini di lucro o commerciali.

Riconoscimenti del marchio commerciale

Medis, QMass, Qflow e QStrain sono marchi registrati di Medis Associated bv. DICOM è il marchio registrato della National Electrical Manufacturers Association (NEMA, Associazione nazionale produttori dispositivi elettrici) per le pubblicazioni standard relative alle comunicazioni digitali delle informazioni mediche. Tutti gli altri marchi, prodotti e nomi di aziende citati nel presente documento sono marchi commerciali o registrati dei loro rispettivi proprietari.

Informazioni di carattere normativo

Uso previsto

Medis Suite MRCT è un software destinato alla visualizzazione e l'analisi di immagini RM e TAC del cuore e dei vasi sanguigni.

Medis Suite MRCT è inteso come supporto alle seguenti funzioni di visualizzazione:

- cine loop e revisione 2D
- revisione doppia obliqua
- revisione 3D tramite MIP e rendering del volume
- riformattazione 3D
- esecuzione di calibrazioni

Medis Suite MRCT è inteso anche come supporto alle seguenti analisi:

- quantificazione della funzione cardiaca
- quantificazione del flusso con codifica di velocità RM
- anatomia e segmentazione dei tessuti
- analisi dell'intensità del segnale per il dimensionamento del miocardio e dell'infarto
- mappe parametriche della RM (come il rilassamento T1, T2, T2*).

Medis Suite MRCT è inteso anche per la:

- quantificazione dei risultati T2* nelle immagini RM utilizzabili per definire la quantità di ferro nel cuore e nel fegato
- quantificazione del flusso codificato in velocità RM del fluido spinale cerebrale.

Tali analisi si basano su contorni disegnati manualmente dal medico o da un tecnico clinico con adeguata formazione che usa il software, oppure vengono rilevate automaticamente dal software e successivamente visualizzate per il riesame e la modifica manuale. I risultati ottenuti sono visualizzati sopra le immagini e presentati sotto forma di referti.

I risultati delle analisi ottenuti con Medis Suite MRCT sono destinati all'uso da parte di cardiologi e radiologi a supporto delle decisioni cliniche relative al cuore e ai vasi sanguigni.

Indicazioni per l'uso

Medis Suite MRCT è indicato per l'uso in ambienti clinici in cui siano necessari risultati meglio riproducibili di quelli derivati manualmente a sostegno della visualizzazione e dell'analisi di immagini RM e TAC del cuore e dei vasi sanguigni, da utilizzare su singoli pazienti con patologie cardiovascolari. Inoltre, Medis Suite MRCT consente la quantificazione di T2* nelle immagini RM del cuore e del fegato. Infine, Medis Suite MRCT può essere utilizzato per la quantificazione del fluido spinale cerebrale nelle immagini di flusso codificate con la velocità MR.

Quando i risultati quantificati forniti da Medis Suite MRCT vengono impiegati in un ambiente clinico su immagini RM e TAC di un singolo paziente, è possibile utilizzarli a sostegno di decisioni cliniche per la diagnosi del paziente. In tal caso, i risultati non devono essere esplicitamente considerati come l'unica base irrefutabile per la diagnosi clinica, e devono essere utilizzati unicamente dai medici responsabili.

Limitazioni

Attualmente non sono state specificate limitazioni per la Medis Suite MRCT 2025.

AVVERTENZE



Medis Suite MRCT deve essere utilizzato da cardiologi, radiologi o tecnici preparati, qualificati per eseguire analisi delle condizioni cardiache. Se i risultati dell'analisi vengono impiegati per giungere a una diagnosi, devono essere interpretati da un professionista medico qualificato. Nella pratica clinica Medis Suite MRCT non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nella sezione Uso previsto.



Gli operatori devono possedere una competenza sufficiente della lingua inglese, leggere il presente manuale, familiarizzare con il software e devono essere certificati da Medis prima dell'utilizzo Medis Suite MRCT in ambiente clinico per ottenere risultati affidabili dell'analisi.

Nota su Proporzioni e Risoluzione del monitor



Le forme degli oggetti e dei calibri visualizzati potrebbero apparire leggermente distorte qualora la risoluzione del monitor sia impostata su una proporzione diversa rispetto alla proporzione fisica del monitor. Tale distorsione **NON** inficia l'accuratezza delle misurazioni o delle analisi. Per evitare distorsioni, impostare la risoluzione del monitor su una proporzione uguale a quella fisica. In genere i monitor LCD funzionano al meglio nella loro risoluzione originale. Quando in possesso di informazioni sufficienti, Microsoft Windows raccomanda l'uso di una particolare risoluzione.

Normative europee

	Medis Suite MRCT è qualificato come dispositivo medico di classe IIa. È conforme ai requisiti del Decreto olandese sui dispositivi medici (Besluit Medische Hulpmiddelen, Stb. 243/1995) e della Direttiva Europea sui dispositivi medici 93/42/CEE.
---	--

Medis Suite MRCT è registrato come dispositivo medico (classe II) dal Ministero della Salute in Turchia.

Normative nordamericane

Medis Suite MRCT ha ottenuto l'approvazione per la commercializzazione negli Stati Uniti dalla FDA (Food and Drug Administration, Agenzia per gli alimenti e i medicinali) in base alle disposizioni della Sezione 510(k) della legge sugli alimenti, i farmaci e i cosmetici (Food, Drug, and Cosmetic Act).

Attenzione

La Legge Federale degli Stati Uniti limita la vendita del presente dispositivo ai medici o la prevede esclusivamente dietro prescrizione medica.

Normative sudamericane

Medis Suite MRCT è conforme ai requisiti di INVIMA, ed è stato approvato in Colombia come dispositivo medico di Classe II. I moduli QFlow 4D e QStrain non sono stati autorizzati per l'uso clinico in Colombia.

Normative dell'area Asia-Pacifico

Medis Suite MRCT è conforme ai requisiti della Therapeutic Goods Administration australiana ed è stato approvato come dispositivo medico di Classe IIa.

Medis Suite MRCT è conforme ai requisiti della legge giapponese sui prodotti farmaceutici e i dispositivi medici ed è stato approvato come dispositivo medico di Classe II. I moduli QFlow 4D e QStrain non sono stati autorizzati per l'uso clinico in Giappone.

Medis Suite MRCT è conforme ai requisiti della legge sudcoreana sui dispositivi medici ed è stato approvato come dispositivo medico di Classe II.

Convenzioni utilizzate

All'interno del presente manuale si utilizzano le seguenti convenzioni per indicare le attività del mouse e della tastiera e per fare riferimento a elementi dell'interfaccia utente.

Mouse

Cliccare	Premere e rilasciare il tasto principale del mouse. Per i mancini, è possibile che come tasto principale sia stato impostato il destro.
Cliccare con il tasto destro	Premere e rilasciare il tasto secondario del mouse. Per i mancini, è possibile che come tasto secondario sia stato impostato il sinistro.
Cliccare al centro del mouse	Premere e rilasciare la rotellina o il tasto centrale del mouse. Se il mouse ha solo due tasti, premere e rilasciare entrambi i tasti contemporaneamente.
Fare doppio clic	Premere e rilasciare il tasto principale del mouse due volte.
LMB, MMB, RMB	Tasto sinistro del mouse (LMB, Left Mouse Button), tasto centrale del mouse (MMB, Middle Mouse Button) e tasto destro del mouse (RMB, Right Mouse Button).

Tastiera

MAIUSC/CTRL+clic	Tenere premuto il tasto MAIUSC oppure CTRL sulla tastiera e contemporaneamente fare clic su un pulsante o un oggetto.
CTRL+O	Tenere premuto il tasto CTRL sulla tastiera e contemporaneamente premere O , poi rilasciarli entrambi. Questo esempio apre la finestra di dialogo per l'apertura di uno studio.

Convenzioni tipografiche

Nella scheda Visualizza , seleziona l'opzione Nascondi tutti i disegni	I nomi di pulsanti, i campi, i menu, le opzioni di menu e i nomi delle schede sono tutti in maiuscolo e in grassetto.
Visualizza > Filmato	Una sequenza di opzioni di menu selezionate per eseguire un'attività specifica è indicata tra parentesi angolari.
<code>mass.ini</code>	La font del testo digitato o visualizzato sullo schermo, così come i nomi e le posizioni dei file, è il <code>Courier New</code> .

Simboli utilizzati



Riferimento. Indica la documentazione correlata o le sezioni correlate nel documento che potrebbero essere rilevanti nella situazione concreta.



Suggerimento. Fornisce informazioni utili o un metodo di lavoro alternativo.



Nota. Porta all'attenzione dell'utente ulteriori informazioni.



Avvertimento. Indica di fare attenzione durante l'esecuzione di un'attività.



Attenzione. Avvisa riguardo a una situazione potenzialmente pericolosa nella rappresentazione o nell'analisi di un'immagine che potrebbe condurre a risultati errati. Onde evitare tali situazioni si consiglia di attenersi alle istruzioni.

Sommario

Introduzione	1
1 Informazioni su Medis Suite MRCT	1
2 Requisiti di sistema	2
2.1 Hardware	2
2.2 Operating System	2
3 Supporto.....	3
Per iniziare	4
4 Avvio	4
4.1 Logon alla Suite Medis.....	4
4.2 Controllo degli accessi in base al ruolo	5
4.3 Licenze e voucher pay-per-use.....	5
4.4 Panoramica dell'Applicazione Medis Suite	6
5 Le Applicazioni di Medis Suite MRCT	9
5.1 Panoramica dell'Applicazione QMass.....	9
5.2 Panoramica dell'Applicazione QFlow	10
5.3 Panoramica dell'Applicazione QFlow 4D.....	11
5.4 Panoramica dell'Applicazione 3DView	13
5.5 Panoramica dell'Applicazione QStrain	14

1 Informazioni su Medis Suite MRCT

Medis Suite MRCT è la soluzione software di Medis per l'analisi degli studi di RM e TAC cardiaca. Si compone di una serie di applicazioni (app) che hanno funzioni specifiche: QMass, QFlow, QFlow 4D, 3DView e QStrain.

 **Occorre tener presente che alcune applicazioni (o sottoparti di esse) potrebbero non essere disponibili in particolari giurisdizioni (vedere la Sezione sulle normative per le relative informazioni) anche a causa di restrizioni nella configurazione delle licenze.**

La sua rilevazione automatica dei contorni consente di effettuare analisi quantitative in modo rapido e preciso. Medis Suite MRCT include strumenti di visualizzazione e quantificazione per l'analisi di funzione mediante risonanza magnetica (MRI), alcuni dei quali sono dedicati all'analisi della funzione ventricolare, all'analisi della deformazione e all'analisi dello inward displacement. Offre inoltre strumenti di quantificazione per la determinazione delle caratteristiche del tessuto per l'analisi delle dimensioni dell'infarto (indicata come analisi dell'intensità del segnale ritardato o DSI), l'analisi T2w, l'analisi T2w-DSI combinata, l'analisi della perfusione al primo passaggio (indicata come analisi dell'intensità del segnale nel tempo o TSI), l'analisi della funzione a livello di stress (indicata come analisi comparativa), l'analisi T1 e l'analisi T2/T2*. Sono poi disponibili applicazioni per la determinazione del flusso, alcune delle quali dedicate all'analisi del flusso 2D e all'analisi del flusso 4D, che consentono la visualizzazione tridimensionale e la quantificazione bidimensionale degli studi MR sul flusso 4D.

Medis Suite MRCT include anche strumenti di visualizzazione e quantificazione per la tomografia computerizzata (CT) al fine di ricostruire i dati dell'angiografia con tomografia computerizzata (CTA), di effettuare analisi funzionali e di deformazione su tali dati o di eseguire misurazioni calibrate sulla visualizzazione 2D

 **Medis Suite MRCT deve essere utilizzato da personale medico qualificato o da tecnici preparati. Se i risultati dell'analisi vengono impiegati per giungere a una diagnosi, devono essere interpretati da un medico qualificato. Medis Suite MRCT non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nella sezione Uso previsto.**

 **Medis Suite MRCT non può eseguire le seguenti analisi su dati riformattati TC; l'analisi dei tessuti delle dimensioni dell'infarto, l'analisi T2w, l'analisi della perfusione, l'analisi T1, l'analisi T2 e l'analisi T2*.**

 **I contorni creati in automatico e manualmente possono produrre risultati errati. Occorre riesamarli e correggerli, se necessario.**

2 Requisiti di sistema

2.1 Hardware

Medis Suite MRCT:

- Un processore a 64 bit
- 8 GB RAM
- 10 GB di spazio libero su disco dopo l'installazione del software
- Un monitor con una risoluzione dello schermo di 1,3 Megapixel (ad es. 1280 x 1024 pixel per un rapporto di visualizzazione 4:3, 1600 x 900 pixel per un rapporto di visualizzazione 16:9)

Sentinel license server:

- Un processore a 32 o 64 bit
- 4 GB RAM
- 5 GB di spazio disponibile su disco rigido

NOTE:

- Tutto l'hardware deve essere compatibile con il sistema operativo.
- Il requisito di spazio su disco non tiene conto dello spazio di archiviazione per i dati dell'immagine. Se si desidera archiviare le immagini sul computer locale, assicurarsi che sia disponibile spazio su disco sufficiente. Si noti inoltre che i computer client memorizzano temporaneamente nella cache i dati delle immagini dal server sul computer locale.
- Per visualizzare i dati dell'immagine, si consiglia una scheda grafica dedicata che supporti OpenGL e almeno 512 MB di memoria.
- Per collegare la propria workstation con altre macchine in rete (ad esempio una configurazione client-server o ricevere e inviare immagini a un nodo DICOM remoto) sarà necessaria una connessione di rete. Si consiglia una scheda di interfaccia di rete che supporti almeno 100 Mbps.
- Per il server delle licenze, si consiglia una workstation con un indirizzo IP fisso o un indirizzo IP riservato nel server DNS.

2.2 Operating System

Medis Suite MRCT:

- Microsoft Windows 10, 64-bit
- Microsoft Windows 11, 64-bit
- Microsoft Windows Server 2016, 64-bit
- Microsoft Windows Server 2019, 64-bit
- Microsoft Windows Server 2022, 64-bit
- Microsoft Windows Server 2025, 64-bit

Sentinel license server:

- Microsoft Windows 10, 32-bit and 64-bit
- Microsoft Windows 11, 64-bit
- Microsoft Windows Server 2016, 64-bit
- Microsoft Windows Server 2019, 64-bit
- Microsoft Windows Server 2022, 64-bit
- Microsoft Windows Server 2025, 64-bit

3 Supporto

Medis si impegna a offrire prodotti e servizi di alta qualità. Per porre domande sul software o suggerire miglioramenti del software o della documentazione, contattare l'helpdesk di Medis.

Se si contatta l'helpdesk Medis via e-mail, indicare il nome del software e il numero di versione nel campo dell'oggetto.

Per cercare il numero di versione del software, selezionare il menu dell'applicazione facendo clic



nell'angolo in alto a destra della finestra di Medis Suite, quindi **Aiuto > Informazioni...**

America del Nord e America del Sud

Medis Medical Imaging Systems, Inc.

Email: support@medisimaging.com

Telefono: +1 919 278 7888 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 EST)

Europa, Africa, Asia e Australia

Medis Medical Imaging Systems BV.

Email: support@medisimaging.com

Telefono: +31 71 522 32 44 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 CET)

4 Avvio


Per avviare la Suite Medis, fare doppio clic sulla relativa ‘icona sul desktop o seleziona la Suite Medis dal menu Avvio di Windows.

La Suite Medis offre l’interfaccia utente grafica nelle seguenti lingue: inglese, tedesco, spagnolo, italiano, francese, giapponese e portoghese.

- ❗ La lingua attiva può essere impostata nella finestra di dialogo delle opzioni della Suite Medis (cliccare su  > **Strumenti** > **Opzioni**, e selezionare la scheda **Generale**). Se la lingua del sistema operativo Windows utilizzata è supportata da Medis Suite, verrà attivata in automatico al primo avvio.
- ❗ Dopo che la Medis Suite sarà stata installata su un sistema informatico, dovrà essere configurata con le **licenze** appropriate, e dovrà essere effettuato il “**test post-installazione**” per garantire che il sistema sia installato, e configurato nella maniera corretta, affinché fornisca risultati clinici accurati. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle licenze e sull’esecuzione del test successivo all’installazione occorre consultare il Manuale d’installazione. Senza una licenza valida e un test post-installazione eseguito con successo, non sarà possibile caricare i dati all’interno di Medis Suite.

4.1 Logon alla Suite Medis

A seconda della configurazione della Suite Medis, potrebbe essere necessario specificare il nome utente e la password di Windows per accedere alla Suite Medis.

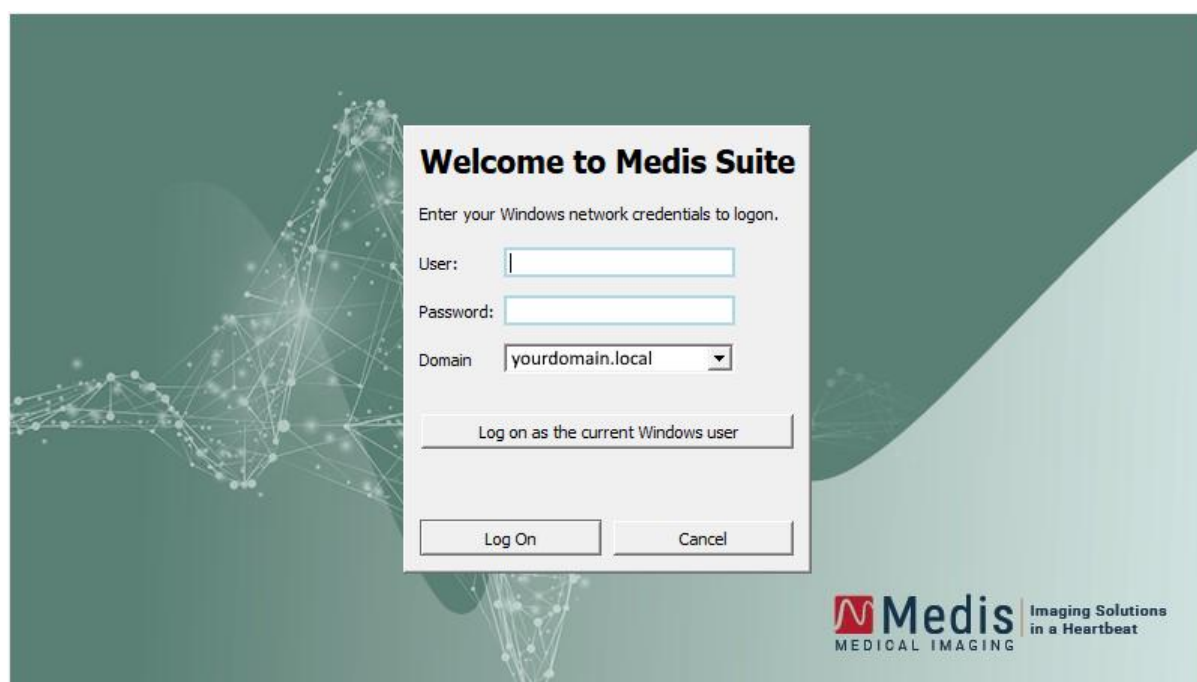

- ❗ Se l'accesso dell'utente a Medis Suite è abilitato, e si accede come un utente differente rispetto a quello che ha effettuato l'accesso a Window, occorre tenere presente che le unità di rete mappate disponibili per l'utente Windows non saranno disponibili all'interno di Medis Suite. Non sarà quindi possibile importare, né esportare dati da tali percorsi di rete mappati.
- ❗ Se l'accesso dell'utente a Medis Suite è disabilitato, per impedire l'accesso non autorizzato alla Medis Suite, il sistema operativo dovrà essere configurato, affinché non sia consentito l'accesso non autorizzato a Windows.
- ❗ Per impedire l'accesso non autorizzato a Medis Suite, occorre bloccare il sistema Windows oppure chiudere Medis Suite, quando si chiude il computer. Sia Windows che Medis Suite consentono opzioni di configurazione di blocco o di chiusura in automatico, quando non vengono utilizzati in maniera attiva.
- ❗ Quando la Medis Suite è in fase di esecuzione, utilizzerà risorse del computer e, per esempio, una licenza, e una porzione di memoria del computer non saranno a disposizione degli altri utenti. Per liberare risorse e renderle disponibili agli altri occorrerà, quindi, chiudere Medis Suite, quando non viene usata. Medis Suite consente opzioni di configurazione per la chiusura automatica, quando non è utilizzata in maniera attiva.

4.2 Controllo degli accessi in base al ruolo

La Suite Medis offre il “controllo dell'accesso basato sui ruoli” ad alcune delle sue funzionalità. Funzionalità specifiche della Suite Medis possono essere accessibili o inaccessibili a singoli utenti che hanno effettuato l'accesso alla Suite Medis. Il controllo degli accessi in base al ruolo è configurato dall'amministratore di sistema.

Le seguenti funzionalità possono essere disponibili o meno, a seconda del ruolo ricoperto:

- Generale (avvio, visualizzazione, analisi)
- Accesso alle opzioni avanzate
- Importare dati all'interno di un repository
- Esportare dati da un repository
- Eliminare dati all'interno di un repository
- Anonimizzare i dati di un repository
- Esportare i referti e i risultati
- Visualizza ed esporta i dettagli del voucher “pay per use”
- Accedere ai repository condivisi.

4.3 Licenze e voucher pay-per-use

La postazione di lavoro necessita dell'accesso a licenze e/o voucher “pay-per-use” per funzionare con Suite Medis e le app in essa installate. La disponibilità di funzionalità specifiche dell'applicazione può dipendere dalle licenze disponibili e/o dai voucher “pay-per-use”.

Per una panoramica della configurazione della licenza corrente, cliccare su  > Strumenti > Mostra licenze disponibili... Seleziona una licenza o un voucher “pay-per-use” dalla panoramica per esaminarne i dettagli. Essi include la data di scadenza della licenza, altri utenti che hanno richiesto una licenza e una panoramica dei token “pay-per-use” richiesti.

Per aggiornare la panoramica delle licenze disponibili e dei voucher “pay-per-use” clicca su .
Per avviare l'applicazione CMS License Manager clicca su . Per salvare una panoramica dei voucher “pay-per-use” clicca su .

La panoramica dei token “pay-per-use” fruiti può essere filtrata per mostrare solo quelli utilizzati durante un determinato periodo di tempo oppure da specifici utenti. Per filtrare in base al tempo occorre utilizzare il menu a discesa disponibile per impostare un intervallo di date predefinito (per esempio, il “Mese scorso”) oppure specificarne uno personalizzato. Per filtrare in base all’utente occorre utilizzare il menu a discesa disponibile, e selezionare quello o quelli da includere o da escludere all’interno del filtro. Per esportare l’elenco filtrato dei token “pay-per-use” fruiti occorre cliccare su .



Le modifiche alla configurazione delle licenze (inclusa l’installazione di nuove o di voucher “pay-per-use”) possono essere effettuate solo dall’applicazione CMS License Manager. Contattare l’Amministratore di sistema per ricevere ulteriori informazioni.



Medis Suite mostrerà un avviso, quando la relativa licenza sta per scadere (30 giorni sono l’impostazione predefinita) oppure quando uno qualsiasi dei voucher “pay-per-use” sta per essere completamente fruito (30 token sono l’impostazione predefinita). Le soglie di avviso possono essere impostate all’interno delle opzioni di Suite Medis.


4.4 Panoramica dell’Applicazione Medis Suite

La Medis Suite MRCT è la soluzione software di Medis per la visualizzazione di risonanza magnetica (RM), tomografia computerizzata (TAC) e immagini angiografiche a raggi (XA). Fornisce strumenti intuitivi per la visualizzazione di immagini RM, TAC e XA in 2D, e strumenti per misurazioni semplici e rapide.

La Suite Medis integra applicazioni in grado di fornire un’analisi avanzata, manuale e automatizzata, delle immagini. I risultati dalle applicazioni integrate saranno raggruppati in Suite Medis e possono essere utilizzati per generare un referto combinato.

La soluzione software della Suite Medis offre risultati di quantificazione che consentono ai cardiologi e ai radiologi di esaminare immagini RM TAC e XA e fornisce una solida base decisioni cliniche.

L’area di lavoro principale di Suite Medis è costituita dalle barre degli strumenti, da diversi pannelli dell’area di lavoro, e dall’area della finestra centrale.

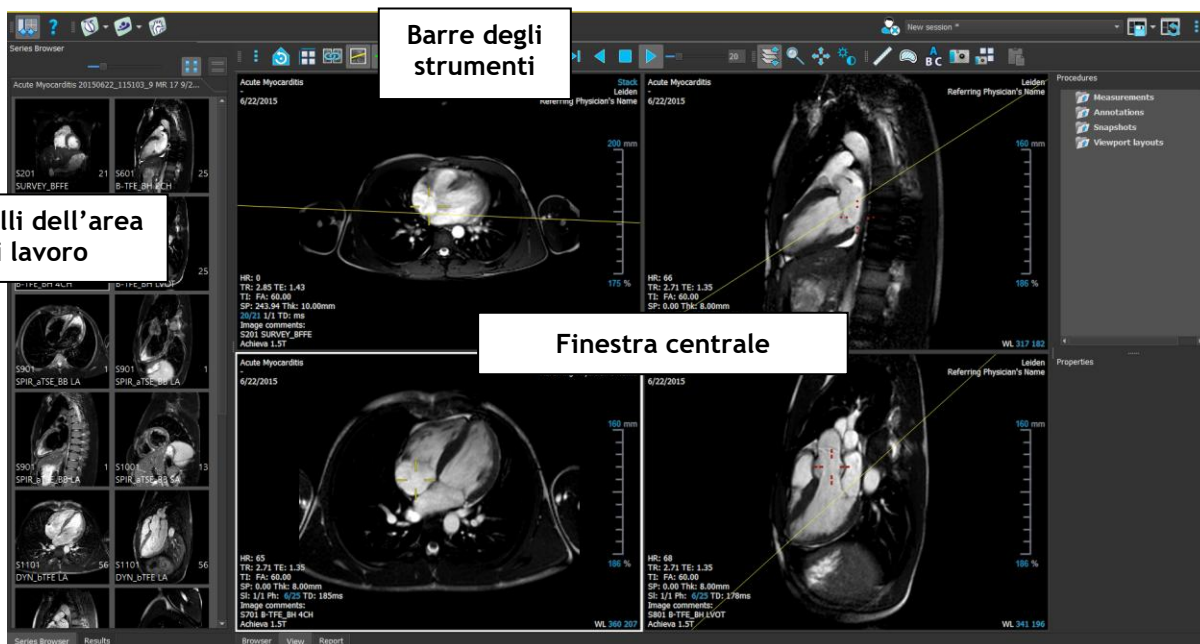

È possibile personalizzare l'area di lavoro principale nascondendo o spostando i pannelli e le barre degli strumenti. Qualunque modifica effettuata all'area di lavoro principale viene salvata per ciascun utente Windows.

L'area della finestra centrale contiene le schede **Browser**, **Vista** e **Crea Referto**, fornite dalla Suite Medis. Inoltre, la finestra centrale è l'area in cui, dopo averle lanciate, vengono visualizzate le applicazioni integrate della Suite Medis.

Per esempio, l'immagine seguente mostra l'app QMass in esecuzione, integrata nell'ambiente di Suite Medis. È possibile aprire più app contemporaneamente; ogni istanza verrà visualizzata nella propria scheda all'interno della finestra centrale. I risultati di ciascuna app potranno essere combinati in un unico referto di Medis Suite.



Usando la funzione di trascinamento ("Drag 'n Drop", "D'nD") si possono caricare dati di Medis Suite MRCT in una qualsiasi applicazione. A seconda dei tasti di modifica premuti durante il trascinamento, Medis Suite MRCT avrà un diverso comportamento in termini di caricamento dei dati:

D'nD	I dati saranno aggiunti alla sessione attuale e sarà attivata la prima serie.
D'nD + Maiusc	I dati vengono aggiunti. La serie attualmente in uso rimarrà attiva.
D'nD + Ctrl	I dati correnti vengono chiusi. Verranno caricati nuovi dati e attivata la prima serie.

Per ulteriori spiegazioni fare riferimento al [Manuale Medis Suite](#).


5 Le Applicazioni di Medis Suite MRCT

Questo capitolo fornisce una panoramica delle principali finestre delle applicazioni di Medis Suite MRCT.

5.1 Panoramica dell'Applicazione QMass

QMass consente il rilevamento automatico dei contorni, il che permette di eseguire analisi quantitative in modo rapido e accurato. QMass consente l'analisi della funzione ventricolare, l'analisi della dimensione dell'infarto (indicata come analisi DSI o Intensità Segnale Tardivo, "Delayed Signal Intensity"), l'analisi T2w, l'analisi combinata T2w-DSI, l'analisi della perfusione in primo passaggio (indicata come analisi TSI o Intensità segnale-tempo, "time-signal intensity"), l'analisi della funzione a livello di stress (indicata come analisi di confronto), l'analisi T1, e l'analisi T2/T2*. QMass può inoltre leggere dati riformattati della TAC, ed eseguire su questi ultimi un'analisi funzionale.

L'area di lavoro principale di QMass è costituita da una serie di barre degli strumenti, da una matrice di studio e da tre visualizzazioni. A seconda del tipo di studio, del suo orientamento e dell'analisi selezionata, le icone sono abilitate/visibili oppure disabilitate/invisibili nelle rispettive barre degli strumenti.

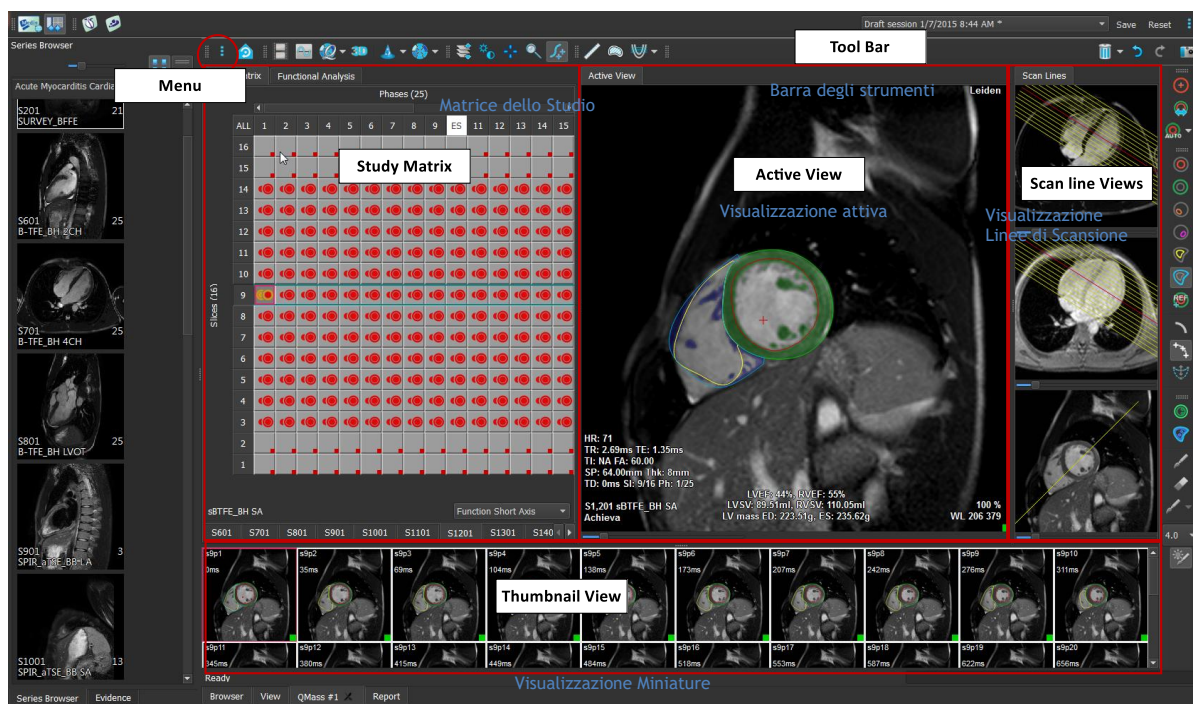

Menu

Il menu dell'applicazione è accessibile dal pulsante  e può essere utilizzato, per esempio, per reimpostare il layout, visualizzare grafici, referti o parametri degli studi, modificare le impostazioni, individuare e modificare contorni, annullare o ripetere azioni e, infine, tagliare, copiare e incollare elementi.

Matrice dello studio

La matrice dello studio mostra una panoramica delle immagini della serie selezionata.

Visualizzazione attiva

Il riquadro di visualizzazione mostra l'immagine selezionata all'interno della matrice dello studio.

Visualizzazione Linea di Scansione

Le visualizzazioni della linea di scansione mostrano la posizione degli strati della serie selezionata. Nelle prime due visualizzazioni si può passare a un'altra serie cliccando con il tasto destro del mouse e selezionando la nuova serie. Inoltre, ci si può spostare sull'immagine, e con i cursori si può ingrandire o ridurre l'immagine stessa.

Visualizzazione delle Miniature (Visualizzazione delle Immagini in Miniatura)

La visualizzazione delle Immagini in Miniatura mostra le Immagini in Miniatura della serie selezionata. La Visualizzazione delle Miniature mostra le immagini delle fasi o del modulo. Può essere configurata tramite il menu dell'applicazione. L'immagine in miniatura contrassegnata dal bordo rosso corrisponde all'immagine mostrata nella visualizzazione della fase o del modulo.

Barra degli strumenti


L'area della barra degli strumenti è costituita da una barra degli strumenti Medis Suite e da diverse barre degli strumenti QMass. Dalle barre degli strumenti QMass si può accedere, per esempio, al menu dell'applicazione, avviare un filmato, mostrare un grafico, accedere alle impostazioni principali, ed eseguire alcune manipolazioni elementari delle immagini, come lo spostamento e lo zoom. Dalle barre degli strumenti QMass si possono, inoltre, annullare e ripetere alcune azioni, si può creare un'istantanea, si possono individuare o disegnare contorni e modificarli o eliminarli.

Per ulteriori spiegazioni fare riferimento al [Manuale QMass](#).

5.2 Panoramica dell'Applicazione QFlow

QFlow può essere utilizzato per l'analisi quantitativa di studi di RM codificati in base alla velocità.

L'area di lavoro principale di QFlow è costituita da una serie di barre degli strumenti, da una visualizzazione di fase, da una visualizzazione di modulo e da una visualizzazione delle immagini in miniatura. Al menu dell'applicazione si accede attraverso un'icona del menu nella barra degli strumenti.

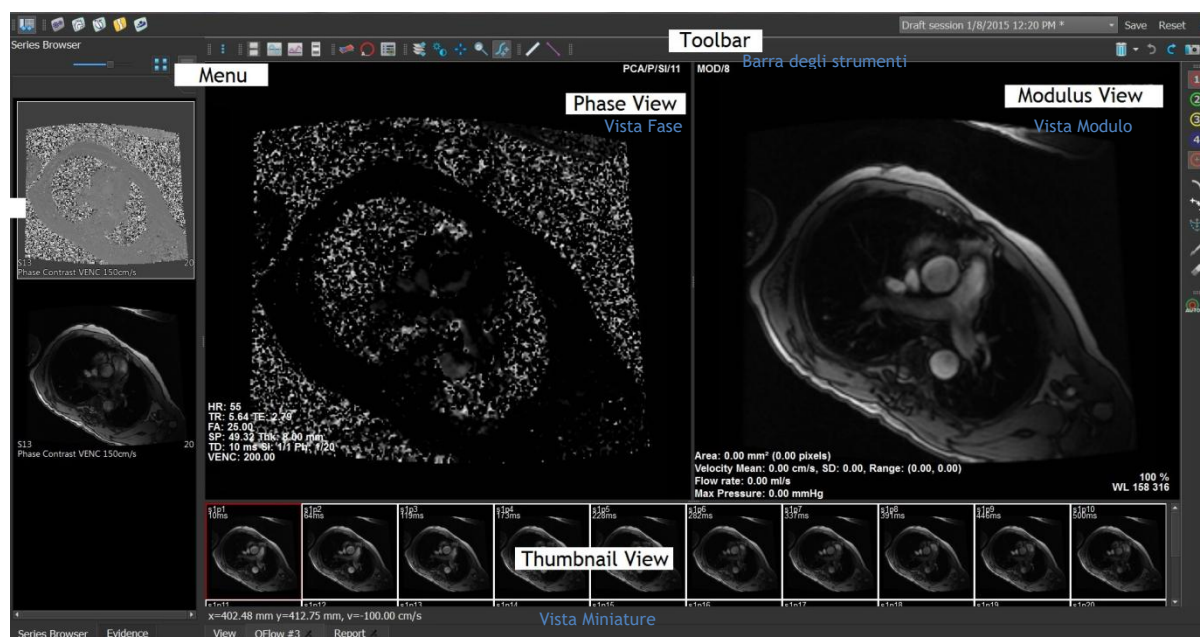

Menu

Il menu dell'applicazione è accessibile dal pulsante  e può essere utilizzato, per esempio, per reimpostare il layout, visualizzare grafici, referti o parametri degli studi, modificare le impostazioni, individuare e modificare contorni, annullare o ripetere azioni e, infine, tagliare, copiare e incollare elementi.

Visualizzazione della Fase

La Visualizzazione della Fase mostra un'immagine della velocità della serie selezionata.

Visualizzazione del Modulo

La Visualizzazione del Modulo mostra un'immagine del modulo della serie selezionata.

Visualizzazione delle Miniature (Visualizzazione delle Immagini in Miniatura)

La Visualizzazione delle Immagini in Miniatura mostra le immagini in ogni punto temporale della serie selezionata. Può essere mostrato il modulo oppure le immagini della fase. Può essere configurata tramite il menu dell'applicazione. L'immagine in Miniatura contrassegnata dal bordo rosso corrisponde all'immagine mostrata nella visualizzazione della fase o del modulo.

Barra degli strumenti

L'area della barra degli strumenti è divisa in due gruppi: il gruppo specifico di Medis Suite e quello di QFlow. Dalle barre degli strumenti QFlow si può accedere, per esempio, al menu dell'applicazione, avviare un filmato, mostrare un grafico, accedere alle impostazioni principali ed eseguire alcune manipolazioni elementari delle immagini, come lo spostamento e lo zoom. Le barre degli strumenti di QFlow possono anche essere utilizzate per annullare e ripetere alcune azioni, per creare un'istantanea, per rilevare o disegnare i contorni e per modificarli o eliminarli (parte del gruppo specifico di Medis Suite).

Per ulteriori spiegazioni fare riferimento al [Manuale QFlow](#).

5.3 Panoramica dell'Applicazione QFlow 4D

QFlow 4D è la soluzione software Medis progettata per supportare la visualizzazione 3D e l'analisi di quantificazione 2D degli studi di RM a flusso 4D. Consente a cardiologi, radiologi e tecnici di quantificare il flusso ematico arterioso e transvalvolare. QFlow 4D supporta un layout a visualizzazione doppia obliqua che include una visualizzazione trasversale dell'immagine della fase e l'MIP dei dati. Una volta selezionata la visualizzazione desiderata, è possibile eseguire un'analisi quantitativa del flusso.

L'area di lavoro principale di QFlow 4D è costituita da una barra dei menu, da barre degli strumenti, da pannelli dell'area di lavoro e dall'area della finestra centrale che comprende i



Barra degli strumenti

Referti

riquadri di visualizzazione delle immagini Doppie Oblique, 3D-MIP e Velocità. Ci sono anche i Pannelli dei Referti e delle Proprietà.



È possibile personalizzare l'area di lavoro nascondendo, ridimensionando o spostando i pannelli dell'area di lavoro e le barre degli strumenti. Qualunque modifica effettuata all'area di lavoro viene salvata per ciascun utente Windows.

Visualizzazione Doppia Obliqua

Lo scopo principale delle visualizzazioni doppie oblique è determinare il piano di interesse da utilizzare per l'analisi di flusso all'interno di Medis Suite MRCT. Vengono mostrate le visualizzazioni ortogonali del volume 3D.

Visualizzazione Velocità

La Visualizzazione della Velocità è una finestra che mostra le velocità del piano selezionato nella Visualizzazione Obliqua Doppia.

Visualizzazione MIP

La Visualizzazione MIP è una finestra che mostra la serie selezionata renderizzata in 3D.

Pannello dei Risultati

Il Pannello dei Risultati mostra quanto segue:

- Mostra le procedure standard, ovvero le misurazioni, le annotazioni e le istantanee eseguite sulla serie caricata all'interno del riquadro di visualizzazione.
- Mostra la correzione dello sfondo.
- Mostra l'elenco delle Analisi di Flusso.

Pannello delle Proprietà

Il Pannello delle Proprietà mostra le proprietà della procedura selezionata. È possibile modificare le procedure standard di Medis Suite MRCT, cioè le misurazioni, le annotazioni o le procedure per creare istantanee così come le ricostruzioni delle Analisi di Flusso.

Barra degli strumenti

La barra degli strumenti 4D di QFlow fornisce diverse funzionalità come, per esempio, l'accesso al menu dell'applicazione, le azioni Cine (riproduzione, pausa, arresto, ecc.), l'esecuzione di alcune manipolazioni di base dell'immagine come la panoramica o lo zoom, e le procedure di avvio.

Per ulteriori spiegazioni fare riferimento al [Manuale QFlow4D](#).

5.4 Panoramica dell'Applicazione 3DView

L'Applicazione 3DView può essere utilizzata per la visualizzazione di immagini di angiografia a tomografia computerizzata (CTA) e angiografia a risonanza magnetica (MRA). Fornisce strumenti intuitivi per manipolare le immagini CTA/MRA visualizzandole in 2D e 3D, nonché strumenti per misurazioni facili e veloci.

L'area di lavoro principale è costituita da barre degli strumenti, da pannelli multipli dello spazio di lavoro e dalla visualizzazione delle immagini.



Visualizzazione dell'Immagine

La Visualizzazione dell'Immagine mostra il volume 2x2 attualmente caricato in molteplici rappresentazioni. Per impostazione predefinita, le immagini nella Visualizzazione dell'Immagine mostrano una serie di dettagli del paziente e le informazioni sul volume. È possibile mostrare o nascondere queste sovrapposizioni sull'immagine.

Pannelli dell'area di lavoro

I riquadri dell'area di lavoro sono i seguenti:

- Il Pannello dei Risultati elenca i risultati delle azioni eseguite sul volume: annotazioni, misurazioni, istantanee, riformattazioni e modellazioni.
- Il Pannello delle Proprietà mostra le proprietà del risultato selezionato. È sempre possibile modificare l'Etichetta, ma è necessario attivare una riformattazione o una modellazione per visualizzare o modificare le altre proprietà.
- Il Pannello LUTs è utilizzato per migliorare la vista nella visualizzazione 3DVR.


Barra degli strumenti

La barra degli strumenti di 3DView consente di accedere al menu dell'applicazione, alle funzionalità basiche di Cine, ad alcune tecniche di manipolazione delle immagini come, per esempio, la panoramica o lo zoom, nonché a una serie di procedure applicabili all'applicazione.

Per ulteriori spiegazioni fare riferimento al [Manuale 3DView](#).

5.5 Panoramica dell'Applicazione QStrain

L'Applicazione QStrain deve essere utilizzata per una valutazione finalizzata a stabilire lo stato di salute del miocardio. Una valutazione generale può evidenziare diverse anomalie nel flusso e nei tessuti quantificandone l'entità.

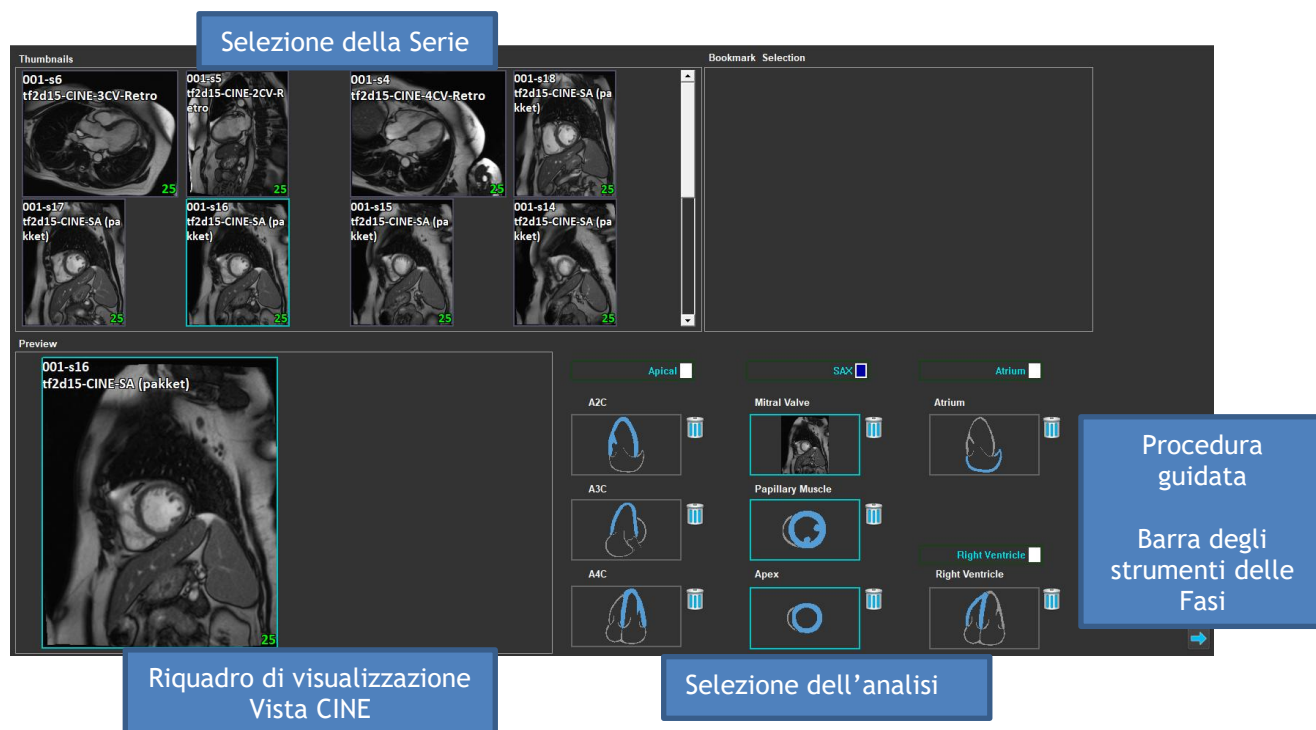

QStrain legge sia i dati della RM sia quelli della TAC. Consente 4 diversi tipi di analisi: Apicale (LAX), SAX, Atrio e Ventricolo Destro. Ogni strato può essere assegnato al blocco appropriato, a seconda del suo orientamento e dell'analisi da eseguire.

Selezione della Serie


Le immagini caricate sono raggruppate in base agli strati. Ogni strato contiene un certo numero di punti temporali. Lo strato può essere assegnato a una specifica analisi cliccandoci sopra.

Riquadro di visualizzazione CINE

Il riquadro di visualizzazione CINE consente la visualizzazione della serie selezionata. Al passaggio del mouse inizia la riproduzione del filmato. Se per la sezione interessata sono disponibili i contorni, nell'angolo in alto a sinistra viene visualizzata un'icona.

Selezione dell'analisi

Un'analisi può essere selezionata semplicemente cliccando su uno strato dal pannello Selezione della Serie, poi su uno dei blocchi di orientamento (A2C, A3C, A4C, valvola mitrale, ecc.).

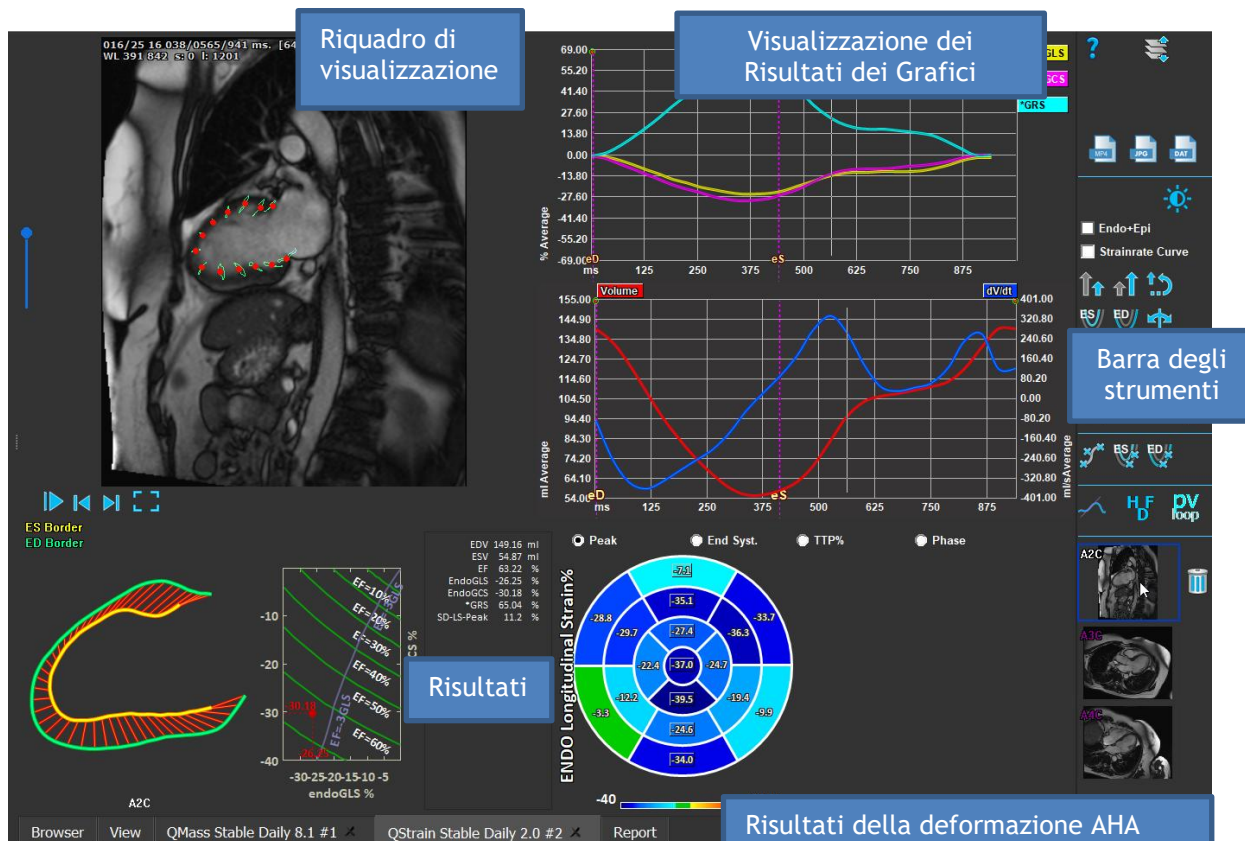

Riquadro di visualizzazione

Il riquadro di visualizzazione consente la vista del tracciamento del contorno in base ai contorni disegnati per le fasi ES e ED.

Risultati/Risultati dei Grafici/Risultati della deformazione AHA

Queste sezioni forniscono una visione obiettiva del miocardio. Mostrano i risultati e i grafici per indicare il movimento del miocardio. I Risultati sono semplicemente valori medici derivati in base agli input e ai contorni disegnati.

Barra degli strumenti

La barra degli strumenti offre la possibilità di effettuare diverse azioni come, per esempio, l'accesso al riquadro di visualizzazione per la selezione dei dati, l'esportazione di immagini, i filmati e i dati, i punti di riferimento relativi ai contorni, altre analisi disponibili, mentre viene mostrata l'analisi corrente.

Per ulteriori spiegazioni fare riferimento al [Manuale QStrain](#).