

QFlow 4D 1.1

Benutzerhandbuch



Medis Medical Imaging Systems bv
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden, Niederlande



[<http://www.medisimaging.com](http://www.medisimaging.com)

Medis Medical Imaging Systems bv
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden
P.O. Box 384, 2300 AJ Leiden, Niederlande
Tel.: +31 71 522 32 44
Fax: +31 71 521 56 17
E-Mail: support@medisimaging.com

Medis Medical Imaging Systems, Inc.
9360 Falls of Neuse Road, Suite 103
Raleigh, NC 27615-2484, USA
Tel.: +01 (919) 278 7888
Fax: +01 (919) 847 8817
E-Mail: support@medisimaging.com

Rechtliche Hinweise

Copyright-Vermerk

© 2020 Medis Medical Imaging Systems bv. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch unterliegt dem Urheberrecht und ist durch weltweite Urheberrechtsgesetze und Vertragsbestimmungen geschützt. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Medis Medical Imaging Systems bv darf kein Teil dieses Handbuchs in irgendeiner Form und zu keinem Zweck kopiert, reproduziert, geändert, veröffentlicht oder verteilt werden. Das Drucken von Kopien ist gestattet und unentgeltlich, insoweit die Kopien vollständig und unverändert sind und nicht erzeugt oder verteilt werden, um daraus Profit oder geschäftlichen Vorteil zu ziehen.

Anerkennung von Marken

DICOM ist die eingetragene Marke der National Electrical Manufacturers Association für deren Veröffentlichungen von Standards in Bezug auf die digitale Kommunikation medizinischer Daten. Alle anderen in diesem Dokument verwendeten Marken-, Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

QFlow ist eine eingetragene Marke der Medis Associated B.V.

Gesetzliche Vorschriften

Verwendungszweck

QFlow 4D ist eine Software zur Visualisierung und Analyse von MR 4D-Flussbildern des Herzens und der Blutgefäße. QFlow 4D soll die folgenden Visualisierungsfunktionen unterstützen:

- Cine Loop und 2D-Bewertung
- Bewertung in Doppeltschrägsicht
- 3D-Überprüfung mittels MIP und Volume Rendering
- 3D-Neuformatierung
- Durchführen von Messungen

QFlow 4D unterstützt auch die folgenden Analysen:

- Geschwindigkeitscodierte MRT-Flow Quantifizierung

Diese Analysen basieren auf Konturen, die entweder manuell vom Krankenhausarzt oder von einem geschulten Medizintechniker, der die Software bedient, erstellt wurden oder automatisch von der Software erkannt und anschließend zur Prüfung und manuellen Bearbeitung präsentiert werden. Die ermittelten Ergebnisse werden oben in den Bildern angezeigt und auch in Berichten ausgewiesen.

Die mit QFlow 4D erzielten Analyseergebnisse richten sich an Kardiologen und Radiologen zur Unterstützung klinischer Entscheidungen in Bezug auf Herz und Gefäße.

Indikationen für die Anwendung

QFlow 4D ist zur Anwendung in klinischer Umgebung indiziert, wo validierbare und reproduzierbare quantifizierte Ergebnisse benötigt werden, um die Visualisierung und Analyse von MR-Bildern der Herzkammern und der Blutgefäße zu unterstützen, und wird bei einzelnen Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen eingesetzt.

Wenn die von QFlow 4D gelieferten quantifizierten Ergebnisse in einer klinischen Umgebung für MR-Bilder eines einzelnen Patienten verwendet werden, können sie zur Unterstützung des klinischen Entscheidungsfindungsprozesses für die Diagnose des Patienten oder die Beurteilung der Therapie eingesetzt werden. In diesem Falle sind die Ergebnisse ausdrücklich nicht als alleinige, unwiderlegbare Grundlage für die klinische Diagnose zu betrachten und dürfen nur von den jeweils verantwortlichen Klinikärzten verwendet werden.

Einschränkungen

Derzeit wurden keine Einschränkungen für QFlow 4D 1.1 festgelegt.

WARNUNGEN

 QFlow 4D darf nur von Kardiologen, Radiologen oder anderen Personen eingesetzt werden, die für die Durchführung von Analysen qualifiziert sind. Werden die Analyseergebnisse zur Stellung einer Diagnose verwendet, müssen sie von einem qualifizierten Arzt interpretiert werden. QFlow 4D darf in der klinischen Praxis zu keinen anderen Zwecken eingesetzt werden als den im Abschnitt „Verwendungszweck“ aufgeführten.

 Es wird ausdrücklich empfohlen, Flussparameter nur in Abfolgen zu messen, die für Flussmessungen validiert sind. Zuverlässige Messergebnisse können nur mit validierten Messungen erzielt werden.

 Benutzer müssen über ausreichende Kenntnisse in der ausgewählten Betriebssystemsprache verfügen, dieses Handbuch lesen, sich mit der Software vertraut machen und zuverlässige Analyseergebnisse erhalten können.

Anmerkung zu Bildformat und Auflösung des Bildschirms

 Die Formen der angezeigten Objekte und Messungen können leicht verzerrt werden, wenn die Auflösung auf ein anderes Seitenverhältnis als das physikalische Seitenverhältnis des Monitors eingestellt wird. Diese Verzerrung beeinträchtigt **NICHT** die Genauigkeit von Messungen oder Analysen. Um Verzerrungen zu vermeiden, stellen Sie die Auflösung des Monitors auf ein Seitenverhältnis ein, das dem physischen Seitenverhältnis entspricht. LCD-Monitore arbeiten normalerweise am besten mit ihrer nativen Auflösung. Microsoft Windows empfiehlt eine Auflösung, wenn ausreichend Informationen vorhanden sind.

Europäische Vorschriften

	QFlow 4D ist als medizintechnisches Gerät der Klasse IIa klassifiziert. Es erfüllt die Anforderungen der holländischen Medizingeräterichtlinie („Besluit Medische Hulpmiddelen“, Stb. 243/1995) und der europäischen Medizingeräterichtlinie 93/42/EWG.
---	---

Nordamerikanische Vorschriften

QFlow 4D ist gemäß den Bestimmungen in Abschnitt 510(k) des Food, Drug, and Cosmetic Act der FDA (Food and Drug Administration) für den Markt in den Vereinigten Staaten zugelassen.

Achtung

Laut Gesetzgeber ist der Verkauf dieses Geräts ausschließlich auf ärztliche Anordnung zulässig.

QFlow 4D erfüllt die Anforderungen der Canadian Medical Devices Regulations und wurde als medizinisches Gerät der Klasse II lizenziert.

Weitere Regulierungen

QFlow 4D erfüllt die Anforderungen des Japanese Pharmaceutical and Medical Device Law und wurde als medizinisches Gerät der Klasse II lizenziert.

In diesem Handbuch verwendete Konventionen

Die folgenden Konventionen und Abkürzungen werden in diesem Handbuch verwendet, um die Verwendung der Maus oder Tastatur zu kennzeichnen sowie zur Bezugnahme auf Elemente der Benutzeroberfläche.

Maus

Klick	Drücken Sie die primäre Maustaste und lassen Sie sie wieder los. Wenn Sie Linkshänder sind, haben Sie möglicherweise die rechte Maustaste als primäre Maustaste belegt.
Klicken und ziehen	Halten Sie die primäre Maustaste gedrückt. Ziehen Sie die Maus, um eine Funktion auszuführen. Lassen Sie die primäre Maustaste los. Wenn Sie Linkshänder sind, haben Sie möglicherweise die rechte Maustaste als primäre Maustaste belegt.
Rechtsklick	Drücken Sie kurz die sekundäre Maustaste. Wenn Sie Linkshänder sind, haben Sie möglicherweise die linke Maustaste als sekundäre Maustaste belegt.
Mittelklick	Drücken Sie kurz die Radtaste oder die mittlere Maustaste. Wenn Sie eine Zwei-Tasten-Maus haben, drücken Sie die linke und rechte Maustaste gleichzeitig und lassen sie gleichzeitig los.
Doppelklick	Drücken Sie zweimal die primäre Maustaste und lassen Sie sie los.
Mausrad	Drehen Sie das Mausrad.

Tastatur

UMSCHALT/STRG+Klicken	Halten Sie die UMSCHALTASTE/STRG auf Ihrer Tastatur gedrückt, während Sie auf eine Schaltfläche oder ein Objekt klicken.
STRG-Taste + K	Drücken und halten Sie auf Ihrer Tastatur die STRG gedrückt, während Sie die Taste K drücken, und lassen Sie beide Tasten anschließend los.

Typographische Konventionen

Auf dem Knoten **Anmerkung** des Fensters **Ergebnisse...**

Namen von Schaltflächen, Feldern, Menüs, Menüoptionen und Registerkartennamen werden groß und fett gedruckt.

Arbeitsabläufe >
Textanmerkung >

Eine Abfolge von Menüoptionen, die gewählt werden muss, um eine bestimmte Aufgabe durchzuführen, wird durch rechteckige Klammern angezeigt.

Ansicht > Film

Eine Abfolge von Menüoptionen, die gewählt werden muss, um eine bestimmte Aufgabe durchzuführen, wird durch rechteckige Klammern angezeigt.

Bezeichnung: Flussanalyse	Text, den Sie eingeben oder der auf dem Bildschirm angezeigt wird, z.B. Anmerkungsbezeichnung, wird in Segou UI angezeigt.
Wählen Sie auf der Registerkarte Anzeige die Option Alle Zeichnungen ausblenden .	Namen von Schaltflächen, Feldern, Menüs, Menüoptionen und Registerkartennamen werden groß und fett gedruckt.

Verwendete Symbole



Referenz: Verweist auf die zugehörige Dokumentation oder auf zugehörige Abschnitte in dem Dokument, die für die konkrete Situation relevant ist/sind.



Tipp: Liefert hilfreiche Informationen oder eine alternative Vorgehensweise.



Hinweis: Weist auf zusätzliche Informationen hin.



Achtung: Weist Sie an, beim Durchführen einer Aufgabe Vorsicht walten zu lassen.



Warnung: Warnt Sie vor einer potenziell gefährlichen Situation bei Bilddarstellung oder Bildanalyse, die zu fehlerhaften Ergebnissen führen kann. Um dies zu vermeiden ist ein Befolgen der Anweisungen unerlässlich.

Inhaltsverzeichnis

QFlow 4D 1.1	I
Benutzerhandbuch.....	I
Gesetzliche Vorschriften.....	IV
In diesem Handbuch verwendete Konventionen.....	VII
Typographische Konventionen	VII
Inhaltsverzeichnis.....	IX
Einführung	12
1 Über QFlow 4D.....	12
1.1 QFlow 4D Verwendung	12
2 Systemanforderungen	12
2.1 Hardware.....	12
2.2 Betriebssystem	13
3 Kundendienst	14
Erste Schritte.....	15
4 Der QFlow-4D-Arbeitsbereich	15
4.1 Übersicht.....	16
4.2 Menü	16
4.3 Werkzeugleisten.....	18
4.4 Arbeitsbereichsfenster	21
4.4.1 Ergebnisbereich	22
4.4.2 Eigenschaftenbereich.....	23
Betrachten.....	24
5 Betrachten	24
5.1 Serien laden	24
5.2 Ansichtsfenster	24
5.3 Ansichtsfenster-Layout	25
5.3.1 Ansichtslayout zur Überprüfung der Flussrichtung	26
5.3.2 Flussanalyse-Layout.....	27

5.3.3	2D-Ansichtslayout	29
5.4	Rauschunterdrückung.....	31
5.4.1	Optionen der Rauschunterdrückung	32
5.4.2	Aktivieren/Deaktivieren der Rauschunterdrückung	32
5.5	Visualisierung der Ansichtsfenster-Überlagerung.....	33
5.5.1	Überlagerungsdarstellung umschalten	33
5.5.2	Überlagerung Ursprungsebene der Stromlinien	35
5.6	Frameauswahl	36
5.7	Maussteuerungen.....	37
5.7.1	Stapeln	37
5.7.2	Zoomen	37
5.7.3	Schwenken	38
5.7.4	Fensterbreite und Ebene.....	38
5.7.5	Ausgangsansicht	39
5.8	Standardmessungen.....	40
5.8.1	Anmerkungen	40
5.8.2	Abstandsmessungen.....	40
5.8.3	Bereichsmessungen	41
5.8.4	Momentaufnahmen	42
	QFlow 4D-Analyse.....	43
6	Eine QFlow 4D-Analyse durchführen	43
6.1	Überprüfen der Flussgeschwindigkeitsrichtungen: Übersicht.....	43
6.1.1	Optional: Überprüfen aller Flussgeschwindigkeitsrichtungen	45
6.1.2	Überprüfen der HF/FH-Geschwindigkeitsrichtung.....	46
6.1.3	Überprüfen der AP/PA-Geschwindigkeitsrichtung.....	47
6.1.4	Überprüfen der RL/LR-Geschwindigkeitsrichtung	48
6.1.5	Schließen der Ansicht zur Überprüfung der Geschwindigkeitsrichtung.....	49
6.1.6	Benutzerdefinierte Systemoptionen.....	49
6.2	Hintergrundkorrektur	49
6.2.1	Aktivieren der Hintergrundkorrektur	50

6.2.2	Hintergrundkorrektur löschen	50
6.2.3	Hintergrundkorrekturoptionen	50
6.3	Phase Unwrapping	51
6.3.1	Phase Unwrapping aktivieren	52
6.3.2	Phase Unwrapping löschen.....	52
6.3.3	Phase-Unwrapping-Optionen	52
6.4	Flussanalyse.....	53
6.4.1	Flussanalyse starten	53
6.4.2	Flussanalyse-App	54
6.4.3	Mehrfachflussanalyse	54
	Berichterstattung	56
7	Sitzungen.....	56
	Referenz	57
8	Tastenkombinationen.....	57
9	Allgemeine Referenzen.....	58

1 Über QFlow 4D

QFlow 4D ist die Medis-Softwarelösung zur Unterstützung der 3D-Visualisierung und 2D-Quantifizierungsanalyse von 4D-Flow-MR-Studien. Es ermöglicht Kardiologen, Radiologen und Technikern die Quantifizierung des arteriellen und transvalvulären Blutflusses.

QFlow 4D unterstützt Kardiologen, Radiologen oder ausgebildete Techniker bei der Auswahl der geeigneten Schrägansichten der Herzanatomie oder der umgebenden Gefäße für die quantitative Flussanalyse.

QFlow 4D läuft als App im Medis-Suite-Produkt. Die Funktionalität von Medis Suite, einschließlich Anweisungen zum Starten von QFlow 4D und Laden von Bilddaten, wird im Medis-Suite-Benutzerhandbuch beschrieben. Die Medis-Suite-Dokumentation ist auf der Registerkarte Benutzerdokumente verfügbar, die wie folgt geöffnet werden kann;

- Drücken Sie F1.
- Wählen Sie die  Hilfe-Taste.
- Klicken Sie die Hauptmenü-Taste der Medis Suite in der oberen rechten Ecke  > **Hilfe** > **Benutzerdokumente**

1.1 QFlow 4D Verwendung

Die Verfügbarkeit des Produkts QFlow 4D hängt von den Lizenzen ab. Wenn Sie eine Lizenz für eine oder mehrere der QFlow 4D-Anwendungen erwerben möchten, wenden Sie sich bitte an Medis.

2 Systemanforderungen

2.1 Hardware

QFlow 4D:

- Intel oder kompatibler Quad-Core-Prozessor
- 16 GB RAM
Wenn Sie größere Bildsätze verwenden, insbesondere zu mehreren Zeitpunkten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie über ausreichend Speicher verfügen.
- 250 GB verfügbarer Festplattenspeicher, SSD empfohlen
(wenn Sie Serien lokal speichern möchten, stellen Sie sicher, dass Sie über genügend Speicherplatz verfügen)
- 3-Tasten-Maus, Scrollrad empfohlen
- CD-ROM-Laufwerk zum Installieren der Software von der CD-ROM
- Ein USB-Anschluss oder eine Netzwerkverbindung, um das Installationsprogramm auf das System zu übertragen
- Grafikkarte, die OpenGL unterstützt und über 512 MB Speicher verfügt

- Breitbildmonitor mit einer Mindestauflösung von 1920 x 1080 Pixel
- Netzwerkkarte mit mindestens 100 MBit/s für den Zugriff auf, den Empfang und das Senden von Serien über das Netzwerk

Sentinel-Lizenzserver:

- Intel oder kompatibler Prozessor mit einer Mindestgeschwindigkeit von 550 MHz
- 128 MB RAM
- 1 GB verfügbarer Festplattenspeicher
- Netzwerkkarte

BEMERKUNGEN:

- Die gesamte Hardware muss mit dem Betriebssystem kompatibel sein
- Für den Lizenzserver wird dringend ein PC mit einer festen IP-Adresse oder einer reservierten IP-Adresse im DNS-Server empfohlen

2.2 Betriebssystem

QFlow 4D:

- Microsoft Windows 7, SP1, 64-Bit-Version
- Microsoft Windows 8.1, 64-Bit-Version
- Microsoft Windows 10, 64-Bit-Version
- Microsoft Windows Server 2008 R2, SP1, 64-Bit-Version
- Microsoft Windows Server 2012 R2, 64-Bit-Version
- Microsoft Windows Server 2016, 64-Bit-Version

Sentinel-Lizenzserver:

- Microsoft Windows 7, 32- und 64-Bit-Version
- Microsoft Windows 8, 32- und 64-Bit-Version
- Microsoft Windows 8.1, 32- und 64-Bit-Version
- Microsoft Windows 10, 32- und 64-Bit-Version
- Microsoft Windows Server 2008, 32- und 64-Bit-Version
- Microsoft Windows Server 2008 R2, 64-Bit-Version
- Microsoft Windows Server 2012, 64-Bit-Version
- Microsoft Windows Server 2012 R2, 64-Bit-Version
- Microsoft Windows Server 2016, 64-Bit-Version

3

Kundendienst

Medis hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige Produkte und Services anzubieten. Falls Sie Fragen zur Software haben oder uns Vorschläge zur Verbesserung der Software oder der Dokumentation unterbreiten möchten, können Sie sich gerne an den Helpdesk von Medis wenden.

Wenn Sie den Helpdesk von Medis per E-Mail kontaktieren, sollten Sie den Namen der Software und die Versionsnummer im Betreff-Feld erwähnen. Die Versionsnummer Ihrer Software finden Sie,

indem Sie unter  > **Hilfe** > **Info...**

Nordamerika und Südamerika

Medis Medical Imaging Systems, Inc.
E-Mail: support@medisimaging.com
Telefon: +1 919 278 7888 (werktags 9.00-17.00 Uhr EST)

Europa, Afrika, Asien und Australien

Medis Medical Imaging Systems B.V.
E-Mail: support@medisimaging.com
Telefon: +31 71 522 32 44 (werktags 9.00-17.00 Uhr MEZ)

4

Der QFlow 4D- Arbeitsbereich

QFlow 4D wird über die App-Werkzeugleiste, das App-Kontextmenü oder den App-Bereich von Medis

Suite durch Auswahl des QFlow 4D-Symbols  gestartet. Detaillierte Informationen zum Starten einer Anwendung und zum Laden von Serien in die Anwendung finden Sie im Medis-Suite-Benutzerhandbuch.

Dieses Kapitel behandelt die folgenden Themen:

- Übersicht
- Menüleiste
- Werkzeugleisten
- Arbeitsbereichsfenster
- Anzeigen

4.1 Übersicht

Der Hauptarbeitsbereich besteht aus einer Menüleiste, Werkzeugleisten, Arbeitsbereichsfenstern und dem zentralen Fensterbereich, der aus Doppelschrägen (Double Oblique), 3D-MIP- und Geschwindigkeits-Bildansichtsfenstern besteht. Es gibt auch Ergebnis- und Eigenschaftenbereiche.

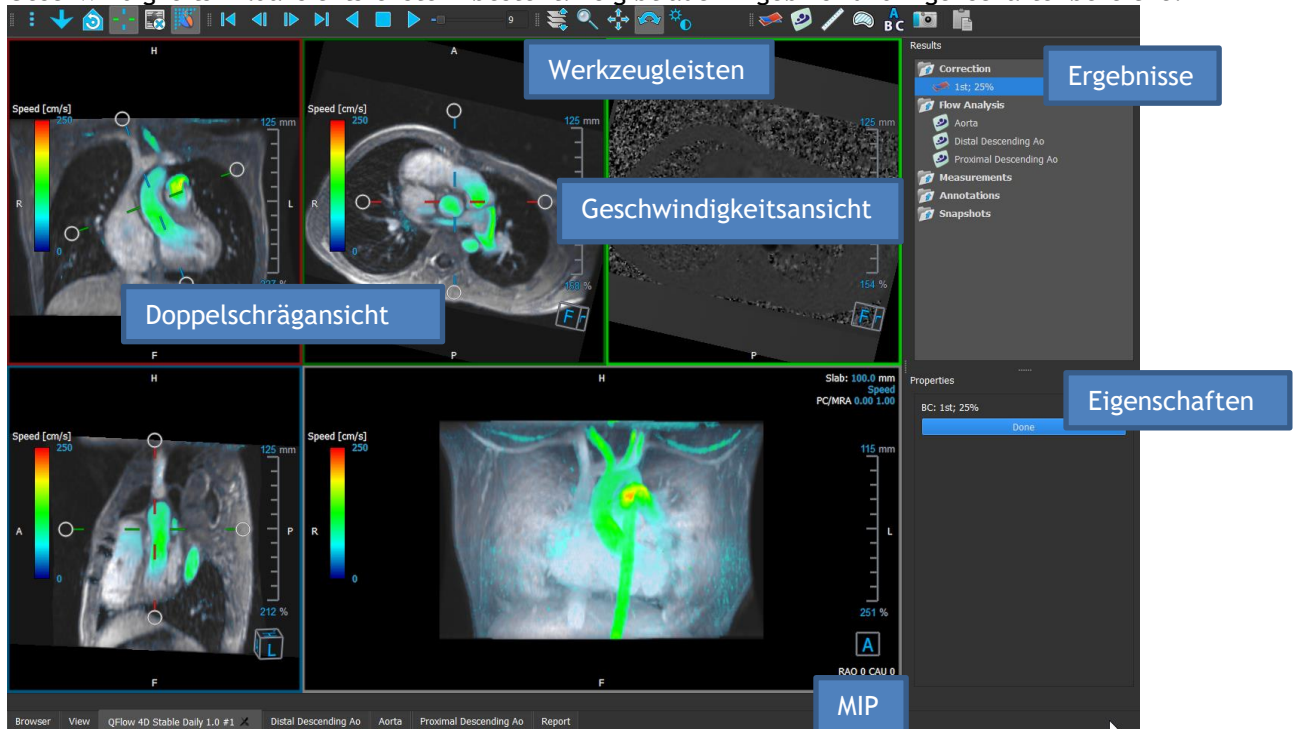


Abbildung 1 : Übersicht über den Arbeitsbereich

Sie können den Arbeitsbereich anpassen, indem Sie die Arbeitsbereichsfenster und Werkzeugleisten ausblenden oder verschieben. Alle Änderungen, die Sie am Arbeitsbereich vornehmen, werden für jeden einzelnen Windows-Benutzer gespeichert.

4.2 Menü

Das Menü enthält Befehle zum Aktivieren der Anwendungsfunktionalität.


So machen Sie das Menü sichtbar:

- Wählen Sie auf dem Menü das Symbol  in der Werkzeugleiste **Allgemein**.

Die Menübefehle sind in die folgenden Hauptmenüs unterteilt: **Fenster**, **Werkzeugleisten**, **Film**, **Bildsteuerung**, **Arbeitsabläufe** und **Hilfe**.

Darüber hinaus gibt es Menüpunkte; **Layout zurücksetzen**, **Fenster/Ebene zurücksetzen**, **Ausgangsansicht**, **Achsen** und **Optionen ein-/ausblenden**. Für einige dieser Befehle stehen in den Werkzeugleisten Werkzeugschaltflächen als Verknüpfungen zur Verfügung.

⚠ Menübefehle sind möglicherweise ausgegraut, wenn Sie einen Arbeitsablauf ausführen, z.B. eine Bereichsmessung. Sie können die Menübefehle aktivieren, indem Sie den Arbeitsablauf abbrechen oder beenden.

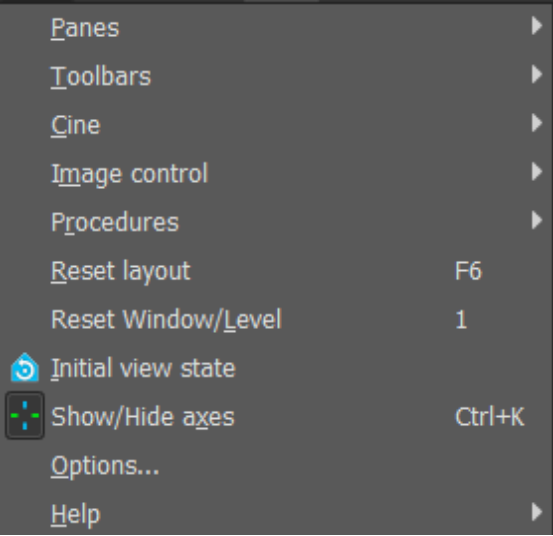Menü	Befehl	Beschreibung
	Fensterbereiche	Ein- oder Ausblenden eines Arbeitsbereichs
	Werkzeugleisten	Ein- oder Ausblenden einer Werkzeugleiste
	Film	Steuerung der Frameauswahl
	Bildsteuerung	Steuerung der Bildanzeige
	Arbeitsabläufe	Einen neuen Arbeitsablauf starten
	Layout zurücksetzen	Setzen Sie das Standardlayout zurück
	Fenster/Ebene zurücksetzen	Fenster/Ebene auf Standard zurücksetzen
	Ausgangsansicht	Ansichtsstatus zurücksetzen
	Achsen ein-/ausblenden	Aktivieren/Deaktivieren der Achsensichtbarkeit
	Optionen	Standardeinstellungen der Anwendung
	Hilfe	Benutzerdokumentation und Info

4.3 Werkzeugleisten

Sie können Werkzeugleisten in einen anderen Teil des Hauptfensters verschieben. Sie können Werkzeugleisten auch ein- oder ausblenden.



So verschieben Sie eine Werkzeugleiste:

- Klicken Sie auf den Doppelleistenbereich  der Werkzeugleiste und ziehen Sie sie. Sie können die Werkzeugleiste jetzt an eine beliebige Stelle an den Seiten des Hauptfensters verschieben. Klicken Sie einfach auf die Werkzeugleiste und ziehen Sie sie an ihre neue Position. Die Position der Werkzeugleiste wird gespeichert, wenn Sie die Anwendung schließen.

Ein- oder Ausblenden einer Werkzeugleiste:


1. Wählen Sie  > **Werkzeugleisten**.
2. Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die Werkzeugleiste anzuzeigen, und deaktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die Werkzeugleiste auszublenden.

Oder:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Werkzeugleistenbereich. Dies öffnet ein Kontextmenü.
2. Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die Werkzeugleiste anzuzeigen, und deaktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die Werkzeugleiste auszublenden.

Der Status der Werkzeugleisten wird gespeichert, wenn Sie die Anwendung schließen.

Symbol	Funktion
Werkzeugleiste Allgemein	
	Menü anzeigen
	Flussrichtung überprüfen.
	Wechseln Sie zum 3D-Layout der Flussanalyse.
	Wechseln Sie zum 2D-Ansichtslayout.

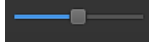Symbol	Funktion
	In die Ausgangsansicht wechseln und Zoom \ Schwenken \ Fensterbreite \ Fensterebene zurücksetzen
	Achsen ein- und ausblenden
	Hintergrundrauschen bei der Geschwindigkeitsüberlagerung entfernen
	Bildtextüberlagerung aktivieren und deaktivieren
Werkzeugleiste für Animationen	
	Zum ersten Frame
	Zum vorherigen Frame
	Zum nächsten Frame
	Zum letzten Frame
	Eine Animation rückwärts abspielen
	Animation stoppen
	Animation vorwärts abspielen
	Wiedergabegeschwindigkeit der Animation einstellen
Werkzeugleiste für Maussteuerelemente	
	Stapeln
	Zoomen

Symbol	Funktion
	Schwenken
	Fensterbreite und Fensterebene
	Drehen (nur wenn das 3D-Ansichtsfenster ausgewählt ist)
Werkzengleiste für Arbeitsabläufe	
	Hintergrundkorrektur von Daten
	Phase Unwrapping von Daten
	Eine Flussanalyse starten
	Erstellen einer Abstandsmessung
	Erstellen einer Bereichsmessung
	Erstellen einer Textanmerkung
	Erstellen einer Momentaufnahme
	Alle Messergebnisse in die Zwischenablage kopieren

4.4 Arbeitsbereichsfenster

Standardmäßig werden im Arbeitsbereich die folgenden Bereiche rechts neben den Bildansichten angezeigt:

- **Ergebnisse**
- **Eigenschaften**

Sie können Fensterbereiche ein- oder ausblenden, Fensterbereiche andocken, Fensterbereiche zu einem Bedienfeld mit Registerkarten kombinieren und Fensterbereiche aus einem Bedienfeld entfernen.

So blenden Sie einen Fensterbereich ein oder aus:

- Wählen Sie  > Fensterbereich und wählen Sie einen ausgeblendeten Fensterbereich aus, um ihn anzuzeigen, oder wählen Sie einen sichtbaren Fensterbereich aus, um ihn auszublenden.

So docken Sie einen Fensterbereich an:

1. Klicken und ziehen Sie die Titelleiste des Fensterbereichs.
2. Bewegen Sie den Bereich an die Seiten des Ansichten-Fensters, um einen der Ankerbereiche auszuwählen. Wenn sich der Fensterbereich einem Ankerbereich nähert, wird der Bereich mit einer gepunkteten Linie hervorgehoben. Der Fensterbereich kann mit einem anderen Fensterbereich kombiniert oder separat eingefügt werden.
3. Wenn der Ankerbereich Ihrer Wahl hervorgehoben erscheint, lassen Sie die Maustaste los.

Dadurch wird der Fensterbereich an der ausgewählten Position angedockt.

So fügen Sie Fensterbereiche zu einem Bedienfeld mit Registerkarten zusammen:

- Klicken Sie auf die Titelleiste des Fensterbereichs und ziehen Sie ihn in die Titelleiste des Fensterbereichs, mit dem Sie ihn kombinieren möchten.

Dadurch wird ein Bedienfeld mit Registerkarten erstellt.

So entfernen Sie Fensterbereiche von einem Bedienfeld:

- Klicken Sie auf die Titelleiste des Fensterbereichs und ziehen Sie ihn vom Bedienfeld weg.

4.4.1 Ergebnisbereich

Der **Ergebnisbereich** zeigt Folgendes in QFlow 4D.

- Es werden Standard-Arbeitsabläufe angezeigt, d.h. Messungen, Anmerkungen und Momentaufnahmen, die für die in das Ansichtsfenster geladene Serie ausgeführt wurden.
- Es zeigt die **Hintergrundkorrektur**.
- Es zeigt die Liste der **Flussanalysen**.

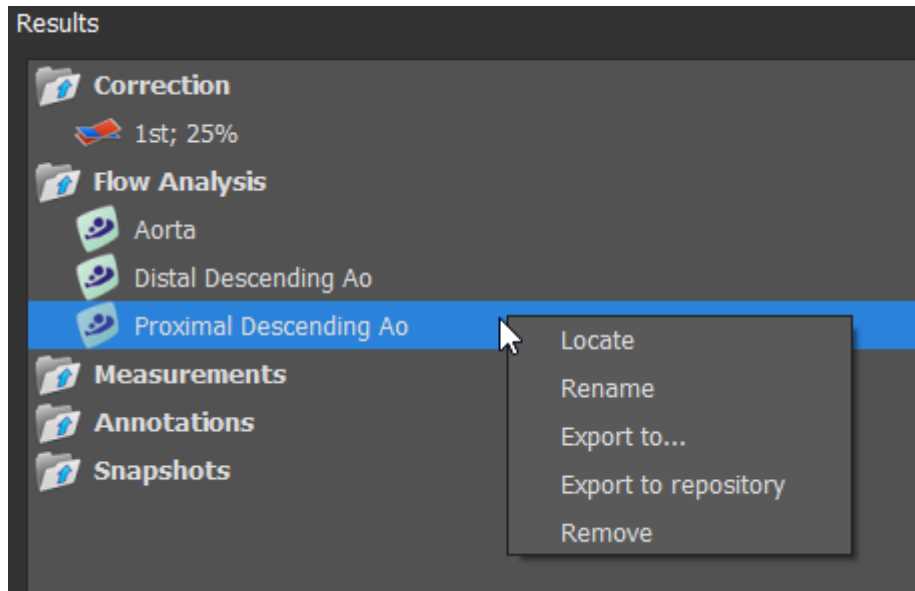


Abbildung 2 Ergebnisbereich

Sie können ein Element einklappen und erweitern, indem Sie es in der Gruppenüberschrift auswählen.

Sie können mit der rechten Maustaste auf einen Arbeitsablauf klicken, um Aktionen für den Arbeitsablauf auszuführen. Abhängig von der Art des Arbeitsablaufs erhalten Sie ein Kontextmenü mit mehreren Optionen.

Lokalisieren: Das Bild und die Bildausrichtung, bei der der Arbeitsablauf ursprünglich durchgeführt wurde, werden aktiviert. Lokalisieren ist automatisch für die Flussanalyse aktiviert.

Umbenennen: Umbenennen des Arbeitsablaufs.

Exportieren nach: Exportieren des Arbeitsablaufs auf die Festplatte.

In Repository exportieren: Exportieren des Arbeitsablaufs in ein Repository.

Entfernen: Löschen des Arbeitsablaufs.



Flussanalyse-Arbeitsabläufe bieten eine Liste vordefinierter Bezeichnungen.

4.4.2 Eigenschaftenbereich

Im **Eigenschaftenbereich** werden die Eigenschaften des ausgewählten Arbeitsablaufs angezeigt. Sie können Standard-Arbeitsabläufe, d.h. Messungen, Anmerkungen oder Momentaufnahmen vornehmen sowie die Rekonstruktionen der Flussanalyse ändern.

So ändern Sie eine Bezeichnung (Messungen, Anmerkungen und Momentaufnahmen):

1. Wählen Sie im **Ergebnisbereich** den Arbeitsablauf aus.
2. Klicken Sie im **Eigenschaftenbereich** auf die Ellipse  rechts neben dem Feld **Bezeichnung** und wählen Sie eine vordefinierte Bezeichnung aus, oder tippen Sie eine benutzerdefinierte Bezeichnung ein und drücken Sie die Eingabetaste.

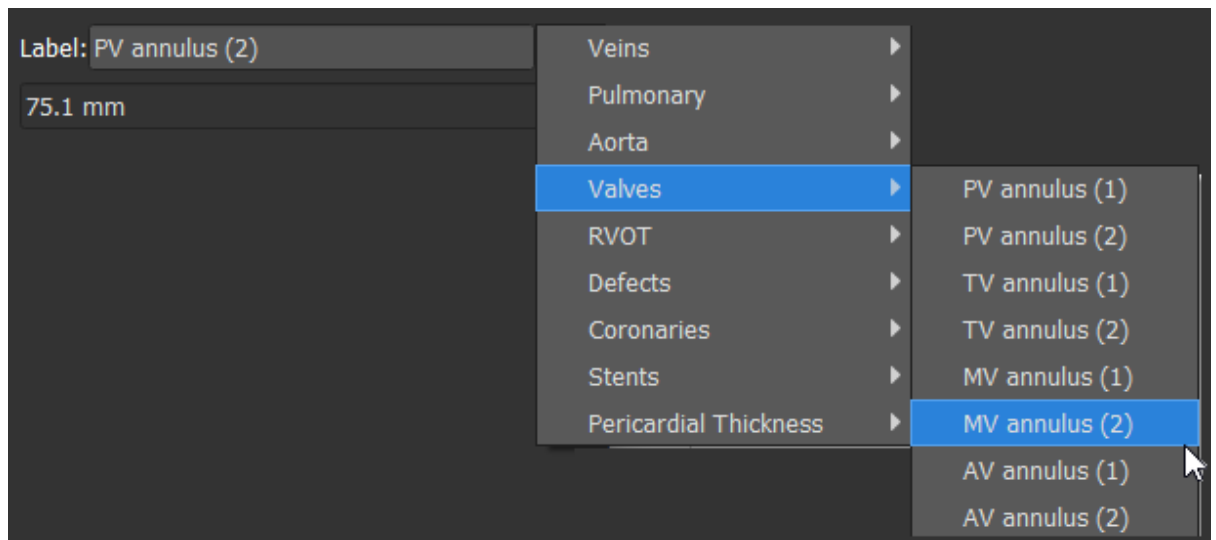
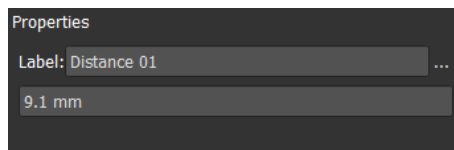


Abbildung 3 Menü Vordefinierte Bezeichnungen

5

Betrachten

5.1 Serien laden

Serien können in QFlow 4D über den **Serien-Browser** der Medis Suite geladen werden. Ausführliche Anweisungen finden Sie im Medis-Suite-Benutzerhandbuch.

Ein 4D-Fluss-MRT-Datensatz besteht aus zeitaufgelösten dreidimensionalen Serien, die in drei Geschwindigkeitsrichtungen codiert sind und einer einzelnen Modul- (oder Größen-) Serie; QFlow 4D unterstützt auch Kurz- und Langachsenserien.

 Für QFlow 4D ist mindestens ein Satz an 4D-Flow-MRT-Daten erforderlich, um mit der Visualisierung zu beginnen.

So laden Sie Serien aus dem Serien-Browser der Medis Suite

1. Wählen Sie in der Bild- oder Textansicht des Medis-Suite-**Serien-Browsers** drei Sätze von 4D-Flussgeschwindigkeitsserien und eine 4D-Fluss-Modul-Serie aus.
2. Klicken Sie auf die ausgewählten Elemente und ziehen Sie sie in ein beliebiges Ansichtsfenster.

Oder:

1. Doppelklicken Sie auf ein Element in der Bild- oder Textansicht des Medis-Suite-**Serien-Browsers**.

Oder:

1. Wählen Sie alle Serien in der Bild- oder Textansicht des Medis-Suite-**Serien-Browsers** aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste über die ausgewählte Serie, um ein Kontextmenü zu öffnen.

Wählen Sie QFlow 4D.

Dadurch wird die Serie in die Ansichtsfenster geladen. Standardmäßig wird eine Animation abgespielt, um alle einzelnen Frames zu präsentieren.

 QFlow 4D lädt nur MR-DICOM-Serien.

5.2 Ansichtsfenster

In der Textüberlagerung des Ansichtsfensters werden detaillierte Informationen zum Patienten, zum Krankenhaus, zur Bildaufnahme und zu den Anzeigeeinstellungen angezeigt.

So zeigen Sie die Patienten- und Bildinformationen an oder blenden sie aus:

- Wählen Sie  > Optionen, Hangings.
Aktivieren oder deaktivieren Sie **Patienteninformationen anzeigen** oder **Bildinformationen anzeigen**.

Oder

- Verwenden Sie „O“, um zwischen den verschiedenen Modi zum Ausblenden der Überlagerungsdarstellungen zu wechseln.

Oder

- Wählen Sie  in der Werkzeugleiste, um zwischen den verschiedenen Modi zum Ausblenden der Überlagerungsdarstellungen zu wechseln.

So maximieren Sie ein Bild im Ansichtsfenster:

- Doppelklicken Sie auf das Bild.

Dadurch wird das Ansichtsfenster maximiert, sodass es das gesamte Ansichtsfenster einnimmt.

Doppelklicken Sie erneut auf das Bild, um zum ursprünglichen Layout des Ansichtsfensters zurückzukehren.



Interaktive Grafiken werden in blauer Farbe angezeigt **Frame: 21/53** und ermöglichen es Ihnen, Bild- oder Anzeigeeigenschaften mit der Maus zu ändern.

5.3 Ansichtsfenster-Layout

QFlow 4D besteht aus drei unabhängigen Bildschirmlayouts.

- Ansichtslayout Überprüfung der Flussrichtung
- Ansichtslayout 3D-Flussanalyse
- 2D-Ansichtslayout

So aktivieren Sie das Ansichtslayout zur Überprüfung der Flussrichtung



Drücken Sie  um das Ansichtslayout zur Überprüfung der Flussrichtung zu aktivieren.

So aktivieren Sie das 3D-Ansichtslayout der Flussanalyse



Drücken Sie , um das 3D-Ansichtslayout für die Flussanalyse zu aktivieren.

So aktivieren Sie das 2D-Ansichtslayout



Drücken Sie , um das 2D-Ansichtslayout zu aktivieren.

5.3.1 Ansichtslayout zur Überprüfung der Flussrichtung

Dies ist das Ansichtslayout zur Überprüfung der Flussrichtung.

Siehe Abschnitt: Überprüfen der Flussgeschwindigkeitsrichtungen: Übersicht

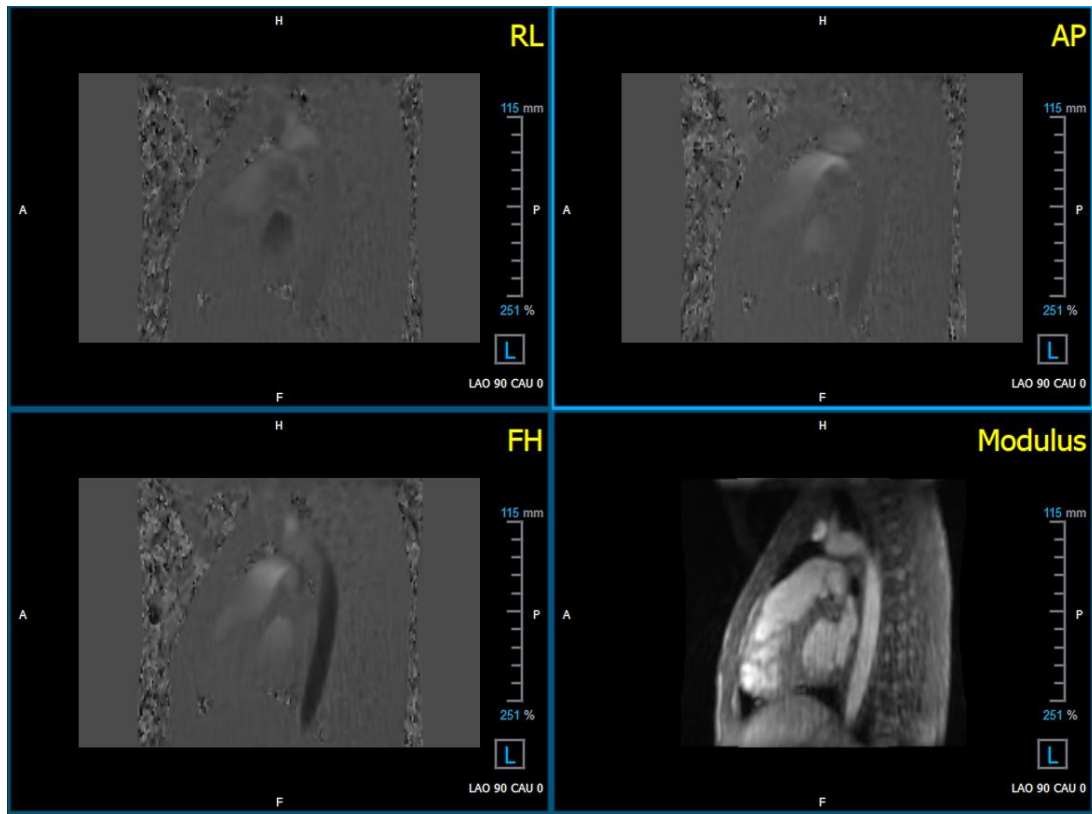


Abbildung 4 Ansichtslayout zur Überprüfung der Flussrichtung

5.3.2 Flussanalyse-Layout

Das primäre Layout von QFlow 4D besteht aus fünf Ansichtsfenstern.

1. Drei doppelschräge Ansichten
2. 3D-Ansicht
3. Geschwindigkeitsansicht

5.3.2.1 Doppelschräge Ansicht

Der Hauptzweck der doppelschrägen Ansichten besteht darin, die interessierende Ebene zu bestimmen, die für die Flussanalyse in QFlow 4D verwendet werden soll. Die doppelschrägen Ansichten zeigen die orthogonalen Ansichten des 3D-Volumens.

Die doppelschrägen Ansichtsfenster sind in Abbildung 5 Layout doppelschräge Ansicht blau hervorgehoben.

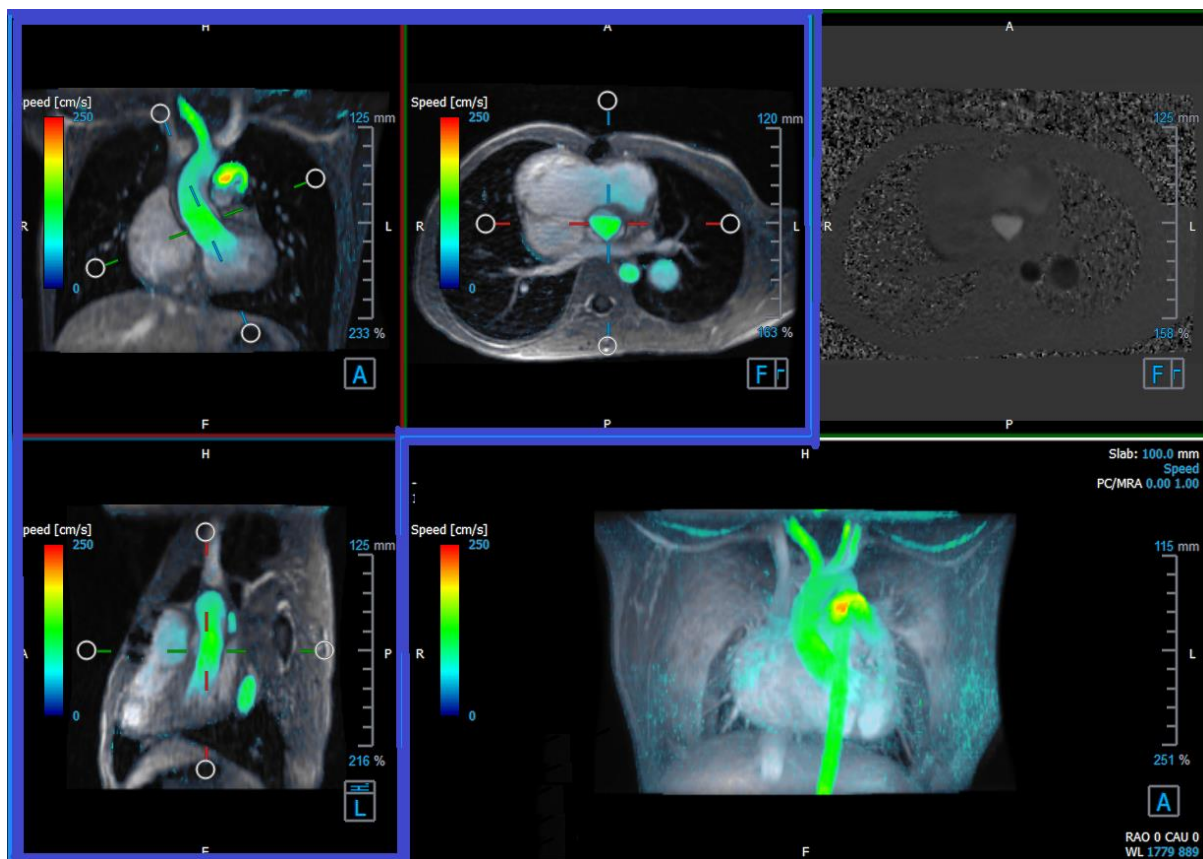


Abbildung 5 Layout doppelschräge Ansicht

5.3.2.2 3D-Ansicht

Das 3D-Ansichtsfenster wird in Abbildung 6 3D-Ansicht, Ansichtsfenster blau hervorgehoben.

Die 3D-Ansicht ist ein Ansichtsfenster, in dem die in 3D-gerechneten Serien angezeigt werden.

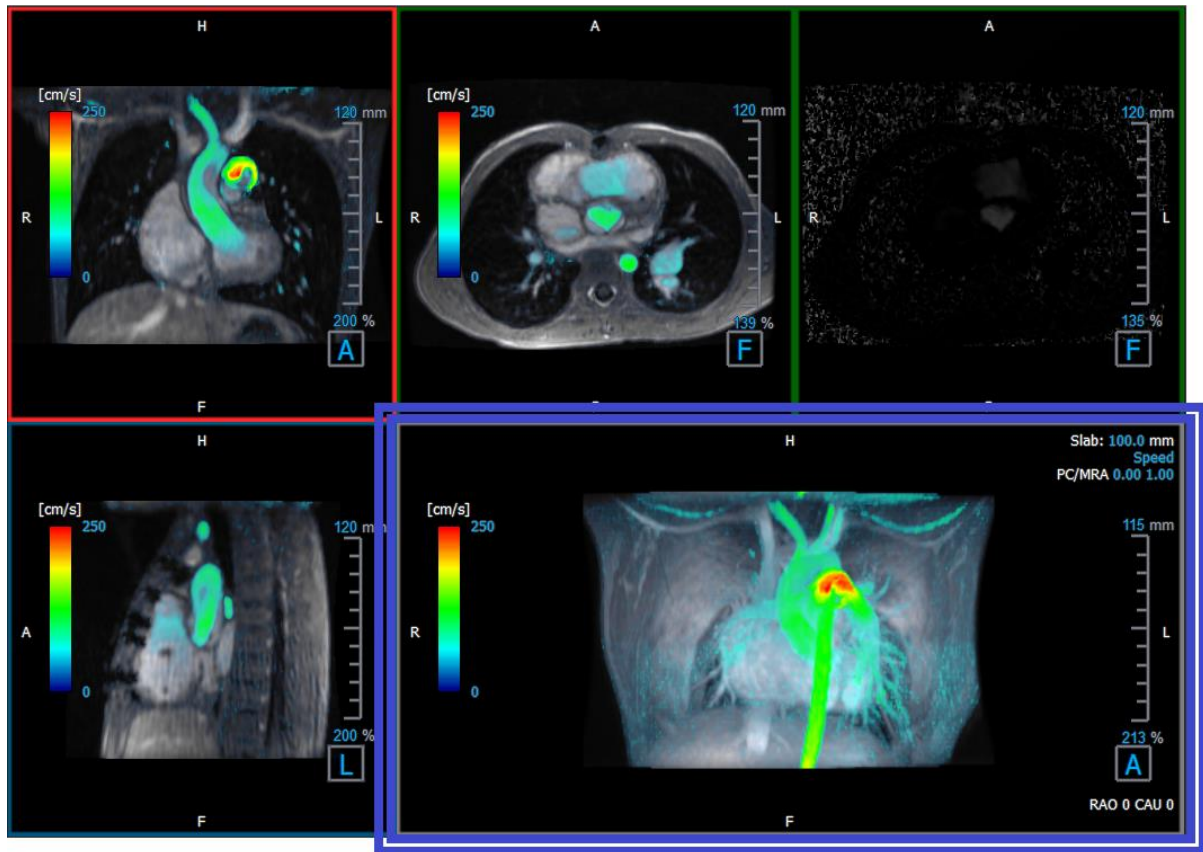


Abbildung 6 3D-Ansicht, Ansichtsfenster

5.3.2.3 2D-Flussdarstellung

Die oberen mittleren und oberen rechten Ansichtsfenster zeigen die Serien auf der Rekonstruktionsebene, die vom Benutzer für den Flussanalyse-Arbeitsablauf definiert wurde. Das obere mittlere Ansichtsfenster zeigt das rekonstruierte Modulbild und das obere rechte Ansichtsfenster zeigt die senkrechten Geschwindigkeiten dieser Ebene.

Diese beiden Ebenen, die in Abbildung 6 rot markiert sind, zeigen die Daten, die für die Flussanalyse verwendet werden.

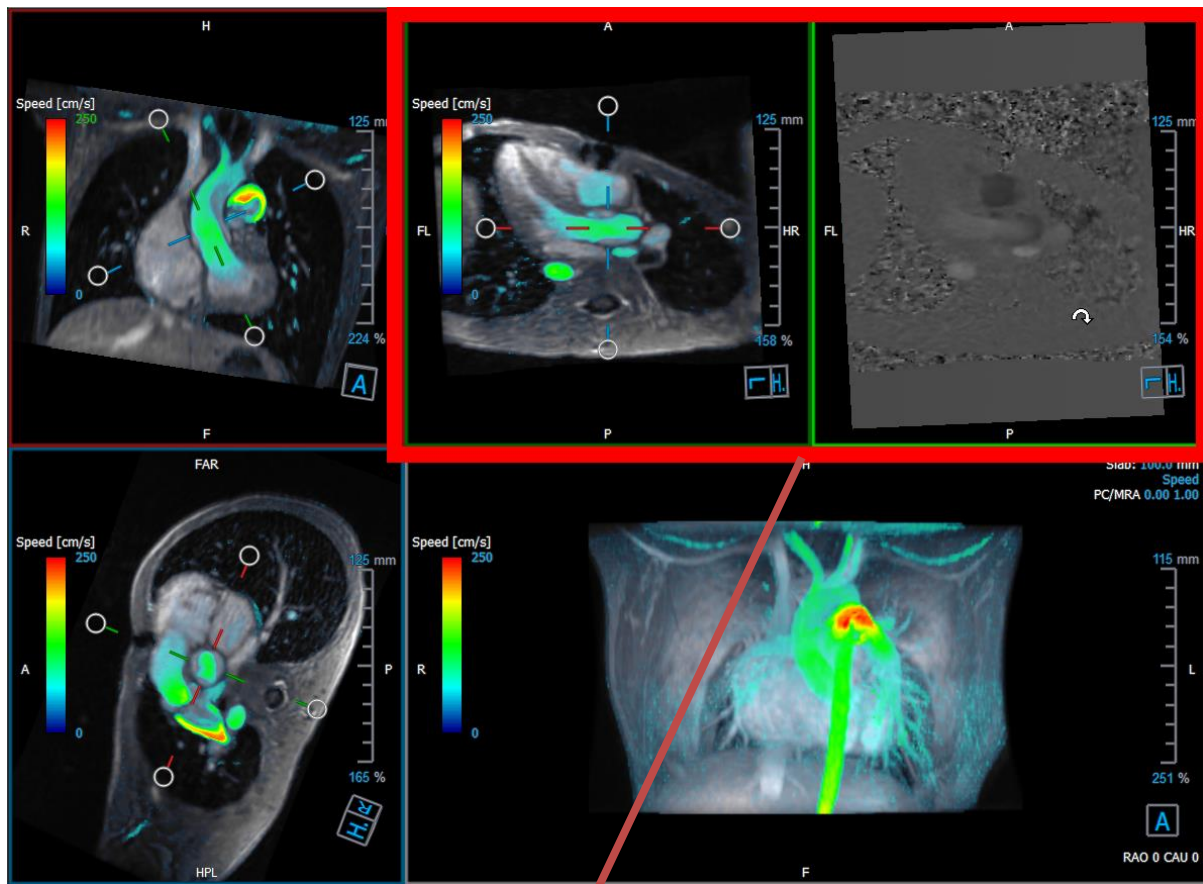


Abbildung 7 Die Modul- und Phasenbilder

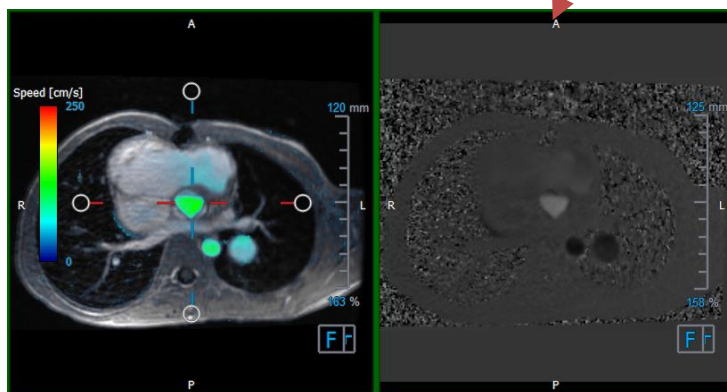


Abbildung 8 Flussanalyseebene von Modul- und Phasenbildern

5.3.3 2D-Ansichtslayout

Alle Ansichtsfenster zeigen 2D-Orientierungsbilder. Optional können Geschwindigkeit, Vektoren und Stromlinien angezeigt werden.

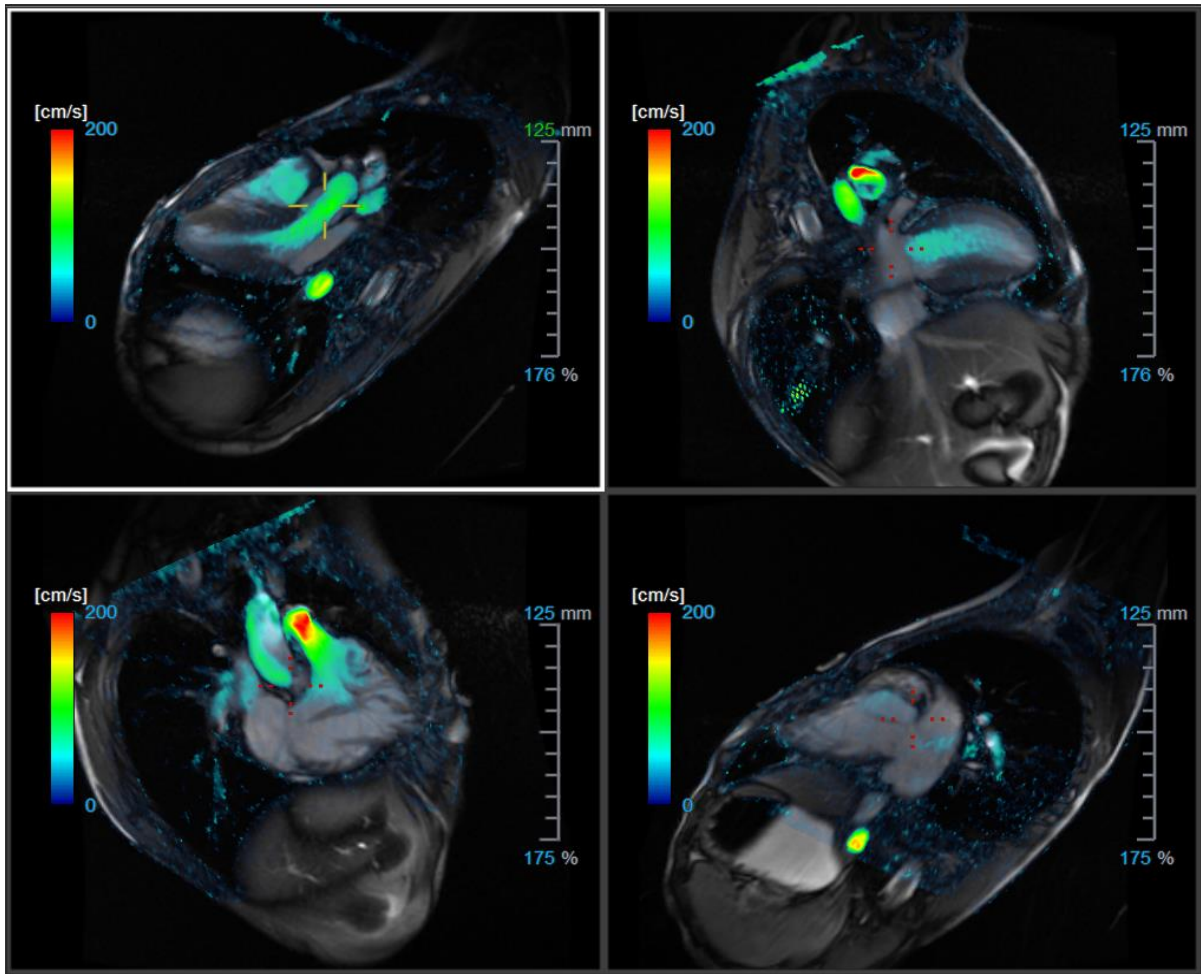


Abbildung 9 2D-Ansichtslayout mit 4 hochauflösenden Serien. Auf diesen Bildern wird eine Geschwindigkeitsüberlagerung angezeigt.

5.3.3.1 Laden neuer Serien in das 2D-Ansichtslayout

Serien können über den **Serien-Browser** in das Ansichtsfenster geladen werden.

So laden Sie Serien in das Ansichtsfenster

1. Klicken Sie auf ein Element in der Bild- oder Textansicht des Serien-Browsers, um es auszuwählen.
2. Klicken Sie auf die ausgewählte Serie und ziehen Sie sie aus dem **Serien-Browser** in das Ansichtsfenster.

Dadurch wird die Serie in das Ansichtsfenster geladen. Wenn mehrere Schnitte in der Serie enthalten sind, wird standardmäßig der mittlere Schnitt angezeigt. Wenn die Serie mehrere Zeitpunkte enthält, wird standardmäßig der erste Zeitpunkt angezeigt.

So überprüfen Sie alle Serien in der aktiven Studie

1. Drücken Sie auf Ihrer Tastatur die **Bild-ab-Taste**, um die nächste Serie in das Ansichtsfenster zu laden.

2. Drücken Sie auf Ihrer Tastatur auf **Bild auf**, um die vorherige Serie in das Ansichtsfenster zu laden.

5.3.3.2 Querverweise




Das Fadenkreuz-Werkzeug ermöglicht es dem Benutzer, das aktive Bild und die Bildposition visuell mit der der verschiedenen Serien zu verknüpfen, die in andere Ansichtsfenster geladen wurden. Querverweise sind sichtbar, wenn mehrere verwandte Serien geladen werden.

So aktivieren/deaktivieren Sie das Fadenkreuz



- Klicken Sie auf  in der allgemeinen Werkzeugleiste, um das Fadenkreuz zu aktivieren oder zu deaktivieren.

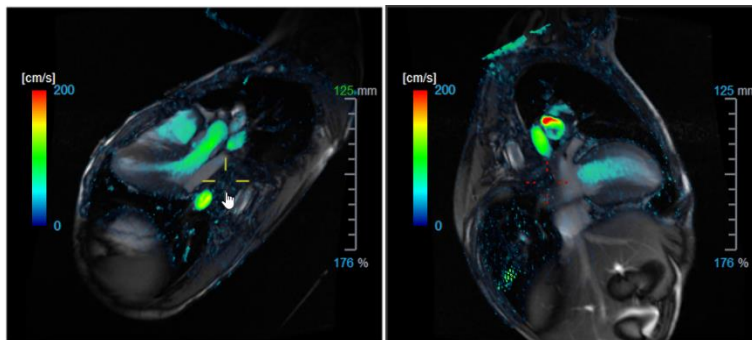

 Eine Fadenkreuzreferenz derselben Farbe impliziert, dass es eine genaue oder nahegelegene Positionsreferenz gibt. Ein andersfarbiges Fadenkreuz zeigt an, dass sich die Position außerhalb des Bereichs des Fadenkreuzes im aktiven Bild befindet.

5.4 Rauschunterdrückung

QFlow 4D Rauschunterdrückung ist ein Werkzeug und dient nur zur Visualisierung. Es ist verfügbar, wenn Bilder im **3D-Ansichtslayout der Flussanalyse** und im **2D-Ansichtslayout** angezeigt werden. Es filtert die Luft und das umgebende statische Gewebe heraus und hebt im Wesentlichen die Bewegungsgeschwindigkeit des Blutpools hervor. Wenn die Rauschunterdrückung aktiviert ist, wird sie automatisch auf die drei doppelschrägen Ansichten sowie die Layoutfenster für **3D- und 2D-Ansichten** angewandt. Das Geschwindigkeitsansichtsfenster oben rechts im **3D-Ansichtslayout der Flussanalyse** bleibt davon unberührt.

Es gibt zwei Parameter, die das Verhalten der Rauschunterdrückung bestimmen, den Standardabweichungsschwellwert und den Modul-Schwellwert.

- Der Standardabweichungsschwellwert kann Werte von 0-1% annehmen. Dieser definiert das zu entfernende statische Gewebe basierend auf der Geschwindigkeit des Gewebes.
- Der Modul-Schwellwert kann Werte von 0 bis 100% annehmen und den zu entfernenden Bereich basierend auf der Intensität des Modulbildes. Der entfernte Bereich basiert auf der Intensität des Modulbildes und entspricht hauptsächlich der Umgebungsluft und der Lunge.


❗ QFlow 4D Rauschunterdrückung hat keinen Einfluss auf die Quantifizierung oder die numerischen Ergebnisse und wird nicht auf Daten angewandt.

❗ Bitte stellen Sie sicher, dass QFlow 4D Rauschunterdrückung nur Rauschen aus den Bildern entfernt.

5.4.1 Optionen der Rauschunterdrückung

So ändern Sie die Einstellungen der Rauschunterdrückung:

1. Wählen Sie  > Optionen, Rauschunterdrückung.

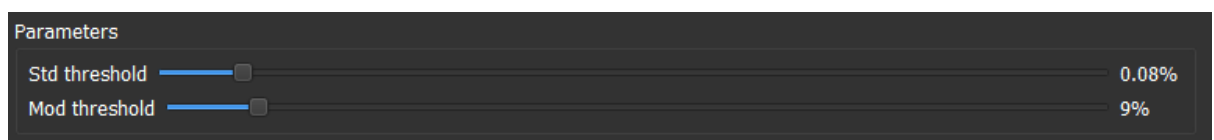

❗ Höhere Werte führen in beiden Fällen dazu, dass ein größerer Teil der Geschwindigkeitsüberlagerung aus dem Bild entfernt wird.

5.4.2 Aktivieren/Deaktivieren der Rauschunterdrückung

So aktivieren/deaktivieren Sie die Rauschunterdrückung:

1. Wählen Sie  in der Werkzeugleiste, um die Rauschunterdrückung zu aktivieren.

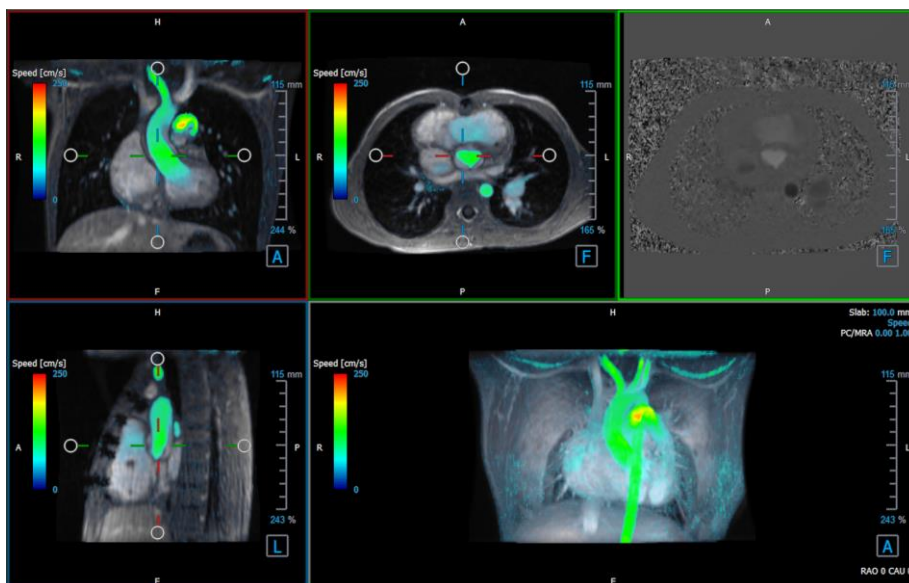


Abbildung 10 Rauschunterdrückung aktiviert

2. Wählen Sie  in der Werkzeugleiste, um die Rauschunterdrückung zu deaktivieren.

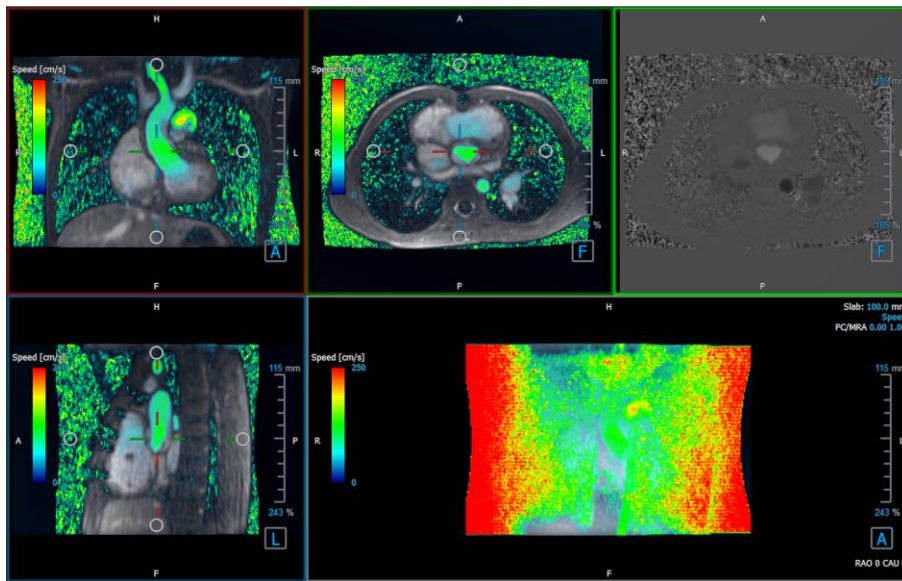


Abbildung 11 Rauschunterdrückung deaktiviert

5.5 Visualisierung der Ansichtsfenster-Überlagerung

QFlow 4D bietet mehrere Überlagerungstypen, die jeweils unterschiedliche visuelle Aspekte der Daten definieren.

- PCMRA
- Geschwindigkeit
- Stromlinien
- Vektoren

5.5.1 Überlagerungsdarstellung umschalten

Überlagerungen mit Geschwindigkeit, Stromlinien oder Vektoren können aktiviert oder deaktiviert werden. Im 3D-Layout der Flussanalyse sind sie in den drei doppelschrägen Ansichtsfenstern und im 3D-MIP-Ansichtsfenster sichtbar. Im 2D-Ansichtslayout sind die Überlagerungen in allen Ansichtsfenstern mit einer geladenen Serie sichtbar.

So ändern Sie die Überlagerungsdarstellung im Ansichtslayout der Flussanalyse:

1. Wählen Sie den Text in der oberen rechten Ecke im 3D-MIP-Ansichtsfenster aus. Es wird umgeschaltet zwischen
 - Keine Überlagerung
 - Geschwindigkeit
 - Stromlinien
 - Vektoren

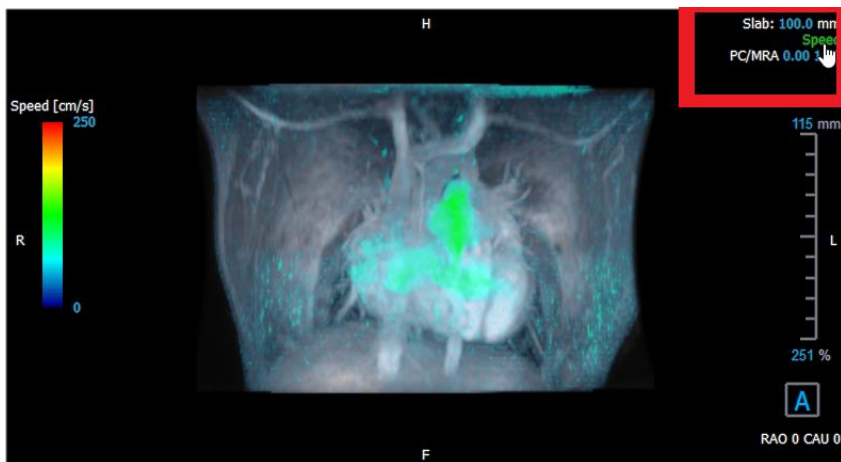


Abbildung 12 Auswahl der Überlagerungstyp-Anmerkung im 3D-Layout der Flussanalyse

Oder:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Text in der oberen rechten Ecke des 3D-MIP-Ansichtsfensters. Dies öffnet ein Kontextmenü.
2. Wählen Sie **Keine Überlagerung, Geschwindigkeit, Stromlinien oder Vektoren**.

So ändern Sie die Überlagerungsdarstellung im 2D-Ansichtslayout:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Text in der oberen rechten Ecke jedes Ansichtsfensters. Dies öffnet ein Kontextmenü.
2. Wählen Sie **Keine Überlagerung, Geschwindigkeit, Stromlinien oder Vektoren**.

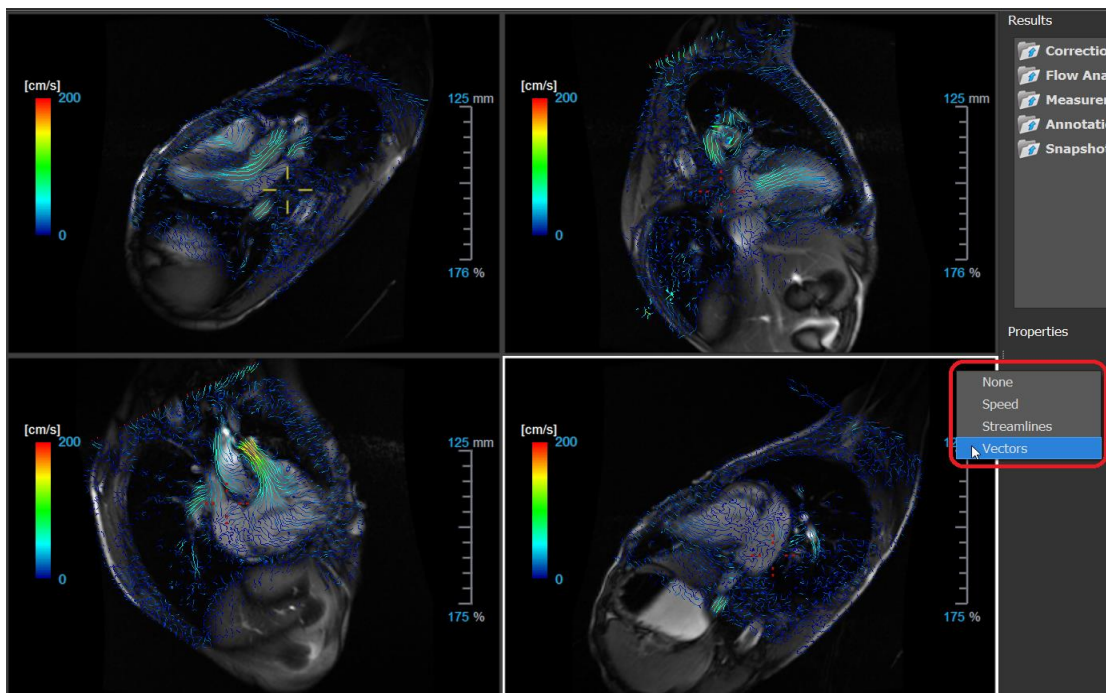


Abbildung 13 Auswahl Überlagerungstyp-Kontextmenü im 2D-Ansichtslayout

5.5.2 Überlagerung Ursprungsebene der Stromlinien

Wenn Stromlinien im 3D-MIP-Ansichtsfenster angezeigt werden, ist auch die Ursprungsebene der Stromlinien sichtbar. Die Ursprungsebene zeigt die axiale Ansicht, also im doppelschrägen Ansichtsfenster (DOV) oben in der Mitte, das grün markiert ist. Die Ebene repräsentiert auch die Position und Ausrichtung des rekonstruierten Modulbildes.

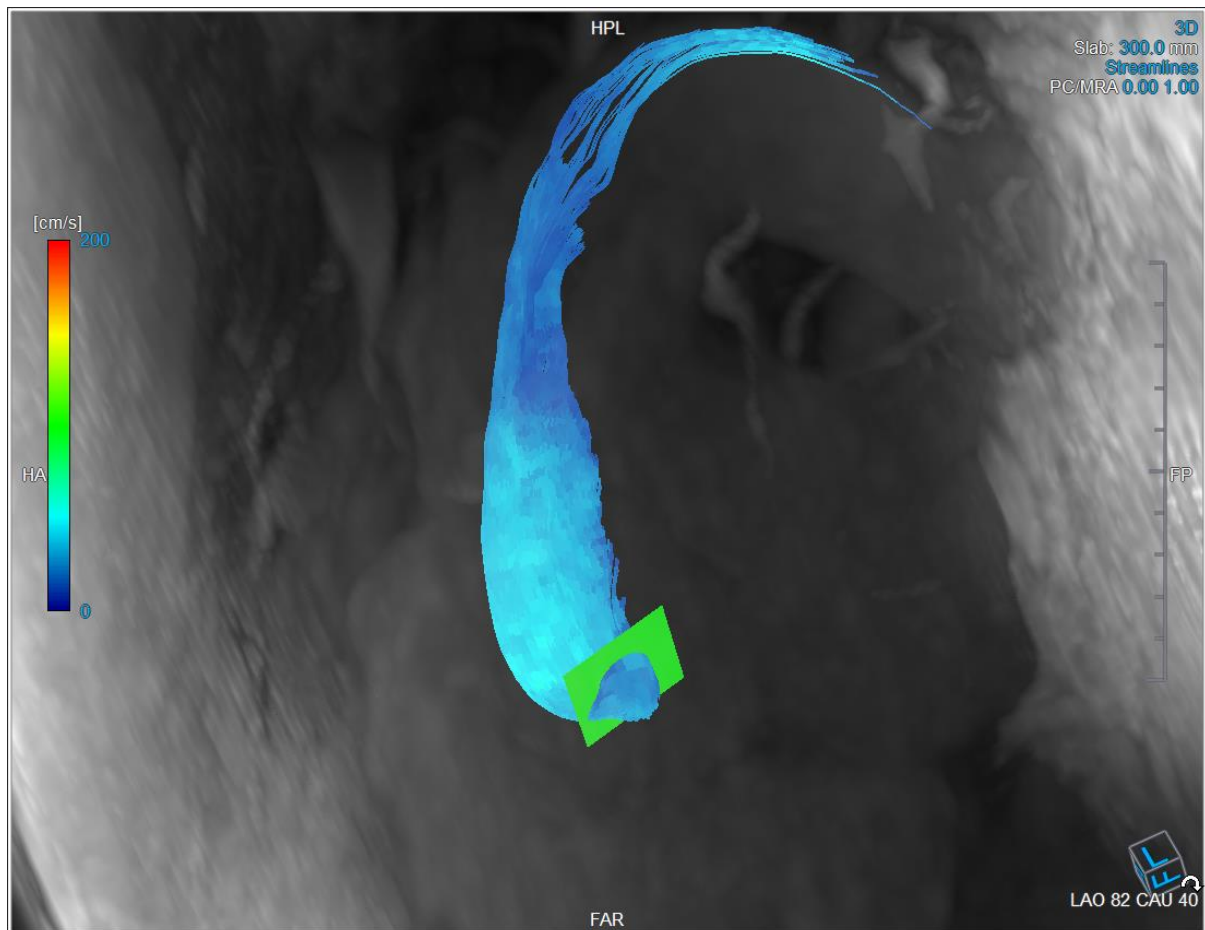


Abbildung 14 Das 3D-MIP-Ansichtsfenster mit Stromlinien und der Ursprungsebene im 3D-Layout der Flussanalyse

So ändern Sie die Ursprungsebene im Ansichtslayout der Flussanalyse:

1. Wählen Sie entweder das sagittale Ansichtsfenster mit blauem Rand oder das koronale Ansichtsfenster mit rotem Rand.
2. Ändern Sie die Position der Achsen.

So ändern Sie die Position der Achsen.

1. Bewegen Sie die Maus zu einem kreisförmigen Griff am Ende einer Achse. Der Mauszeiger ändert sich in den Rotieren-Cursor .
2. Klicken Sie auf die Achsen und ziehen Sie sie in den gewünschten Winkel.

Oder:

3. Um die Achsen vertikal zu ziehen, drücken Sie gleichzeitig mit der Maustaste die Strg-Taste und ziehen Sie dann.
4. Um die Achsen horizontal zu ziehen, drücken Sie gleichzeitig mit der Maustaste die UMSCHALTTASTE und ziehen Sie dann.

5.6 Frameauswahl

Sie können sich auf verschiedene Arten vorwärts oder rückwärts durch die Frames im Bild bewegen.

Das Bewegen durch Frames kann mithilfe der folgenden Schaltflächen erfolgen:

- Drücken Sie  oder  auf der Ansichtswerkzeugleiste, um zum vorherigen oder nächsten Frame zu wechseln.

Oder:

- Drücken Sie  oder  auf der Ansichtswerkzeugleiste, um eine Animation in Rückwärts- oder Vorwärtsrichtung durch die Frames abzuspielen. Klicken Sie hier , um die Animation anzuhalten.

Oder:

- Drücken Sie  oder  auf der Ansichtswerkzeugleiste, um zum ersten oder letzten Frame zu wechseln.

Das Bewegen durch Frames kann mithilfe der folgenden Tastaturtasten erfolgen:

- Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um zum vorherigen oder nächsten Frame zu gelangen.

Oder:

- Drücken Sie STRG+Linkspfeil, STRG+Rechtspfeil, um eine Animation in Rückwärts- oder Vorwärtsrichtung abzuspielen. Drücken Sie Esc, um die Animation anzuhalten.

Oder:


- Drücken Sie HOME oder ENDE, um zum ersten oder letzten Frame zu gelangen.

Das Bewegen durch Frames kann mithilfe interaktiver Grafiken erfolgen:

- Wählen Sie die interaktiven Grafiken für die Frameauswahl in den Ansichtsfenstern aus, um zum nächsten Frame zu wechseln.

Oder:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die interaktiven Grafiken für die Frameauswahl und geben Sie die gewünschte Framenummer ein.

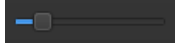💡 Die Animationsgeschwindigkeit kann mit dem Schieberegler  in der Ansichtswerkzeugleiste geändert werden.

5.7 Maussteuerungen

5.7.1 Stapeln

Sie können mit **Stapeln** durch die Frames navigieren, wenn Sie den Stapel-Cursor sehen .

So aktivieren Sie die Stapel-Maussteuerung:

- Drücken Sie  in der Werkzeugleiste der Maussteuerung.

Oder:

- Wählen Sie im Kontextmenü des Ansichtsfensters die Option **Stapeln**.

So stapeln Sie vorwärts oder rückwärts durch Frames:

- Klicken und ziehen Sie die Maus nach links und rechts oder nach unten und oben, um durch die Frames zu scrollen. Es wird eine Schleife zum ersten oder letzten Frame ausgeführt.

Oder:

- Unabhängig vom Status der Stapel-Maussteuerung können Sie mit dem Mousrad durch die Frames stapeln. Dies endet beim ersten oder letzten Frame.

5.7.2 Zoomen

Sie können das Ansichtsfenster mithilfe von **Zoomen** vergrößern und verkleinern, wenn Sie den Vergrößerungscursor sehen .

So aktivieren Sie die Zoom-Maussteuerung:

- Drücken Sie  in der Werkzeugleiste der Maussteuerung.

Oder:

- Wählen Sie im Kontextmenü des Ansichtsfenster die Option **Zoomen**.

Vergrößern und Verkleinern:

- Klicken und ziehen Sie die Maus vorwärts und rückwärts, um hinein- und herauszuzoomen.

Oder:

- Unabhängig vom Status der Zoom-Maussteuerung können Sie auf die interaktiven Grafiken der Zoomskala klicken und diese ziehen oder die STRG-Taste gedrückt halten und das Mausrad nach oben und unten bewegen, um hinein- und herauszuzoomen.



Der aktuelle Zoomfaktor wird in den Skalierungsgrafiken im Ansichtsfenster angezeigt. Der Wert über der Skala ist die physikalische Größe der Skala.

Die Zahl unter der Skala gibt den relativen Zoom an:

100% bedeutet, dass ein Anzeigepixel einem Erfassungsvoxel entspricht.



5.7.3 Schwenken

Sie können das Bild im Ansichtsfenster mithilfe von **Schwenken** nach links, rechts, oben und unten verschieben, wenn Sie den Handcursor  sehen.

So aktivieren Sie die Schwenk-Maussteuerung:

- Drücken Sie  in der Werkzeugleiste der Maussteuerung.

Oder:

- Wählen Sie im Kontextmenü des Ansichtsfensters die Option **Schwenken** .

So schwenken Sie das Bild:

- Klicken und ziehen Sie die Maus in eine beliebige Richtung.

Oder:

- Unabhängig vom Status der Schwenk-Maussteuerung können Sie mit der mittleren Maustaste klicken und die Maus in eine beliebige Richtung ziehen, um das Bild zu schwenken.

5.7.4 Fensterbreite und Ebene

Sie können die Fensterbreite und -ebene (WWL) anpassen, wenn Sie den WWL-Cursor  sehen.

So aktivieren Sie die Fenster-/Ebenen-Maussteuerung:

- Drücken Sie  in der Werkzeugleiste der Maussteuerung.

Oder:

- Wählen Sie im Kontextmenü des Ansichtsfensters **Fenster/Ebene**.

So passen Sie Fensterbreite und -ebene an:

- Klicken und ziehen Sie im Ansichtsfenster
 - Nach rechts oder links, um die Breite zu vergrößern oder zu verkleinern.
 - Nach unten oder oben, um die Ebene zu erhöhen oder zu verringern.

Oder:

- Unabhängig vom Status der Fenster-/Ebenen-Maussteuerung können Sie mit der rechten Maustaste klicken und die Maus ziehen
 - Nach rechts oder links, um die Breite zu vergrößern oder zu verkleinern.
 - Nach unten oder oben, um die Ebene zu erhöhen oder zu verringern.

Oder:

- Klicken Sie unabhängig vom Status der Fenster-/Ebenen-Maussteuerung auf die interaktive Grafik für Fensterbreite oder -ebene und ziehen Sie sie nach oben oder unten, um die Fensterbreite oder -ebene zu erhöhen oder zu verringern.

Oder:

- Klicken Sie unabhängig vom Status der Fenster-/Ebenen-Maussteuerung mit der rechten Maustaste auf die Fensterbreite oder die interaktiven Ebenengrafiken und geben Sie die gewünschten Werte ein.

 Die aktuellen Werte für Fensterbreite und -ebene werden in den Überlagerungsgrafiken unten rechts im Ansichtsfenster angezeigt.

5.7.5 Ausgangsansicht

So setzen Sie die Einstellungen für Zoomen, Schwenken sowie Fensterbreite und -ebene auf die Ausgangsansicht zurück:

- Drücken Sie , um das Zoomen, Schwenken sowie die Fensterbreite und -ebene zurückzusetzen.

5.8 Standardmessungen

QFlow 4D unterstützt die folgenden Standardmessungen:

- Anmerkungen,
- Abstandsmessungen,
- Bereichsmessungen,
- Momentaufnahmen.

5.8.1 Anmerkungen

Sie können einem Ansichtsfenster Anmerkungen hinzufügen, um es für die Analyse zu markieren oder um auf bestimmte Details aufmerksam zu machen. Anmerkungen werden im Ansichtsfenster angezeigt. Alle Anmerkungen der aktiven Studie werden im **Ergebnisbereich** aufgelistet.

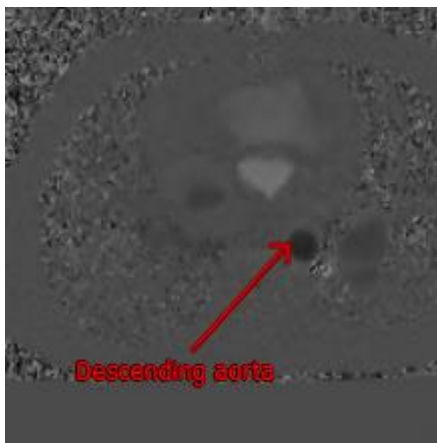


Abbildung 15 Beispiel Anmerkung

 Wenn Sie eine andere Serie auswählen oder zu einem anderen Zeitpunkt in der aktiven Serie navigieren, wird Ihre Anmerkung nicht mehr im Ansichtsfenster angezeigt. Dies liegt daran, dass der Punkt, auf den sich die Anmerkung bezieht, nicht auf dem aktuell sichtbaren Bild liegt. Um Ihre Anmerkung erneut anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anmerkung im **Ergebnisbereich** und wählen Sie **Lokalisieren**; oder doppelklicken Sie auf die Anmerkung im **Ergebnisbereich**.

Einzelheiten zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Anmerkungen finden Sie im Medis-Suite-Benutzerhandbuch.

5.8.2 Abstandsmessungen

Ein Verfahren zum Messen der Entfernung von einem Punkt zum anderen. Wenn Sie einen Abstand gemessen haben, können Sie die Anmerkung und die Endpunkte der Messung ändern. Alle Abstandsmessungen der aktiven Studie werden im **Ergebnisbereich** aufgelistet. Alle Abstandsmessungen der aktiven Sitzung werden im **Ergebnisbereich** der Medis Suite aufgelistet.

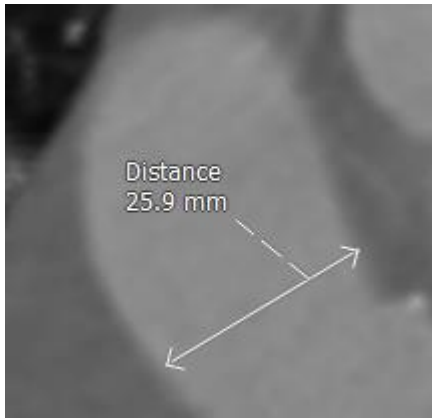


Abbildung 16 Beispiel Abstandsmessung

💡 Wenn Sie eine andere Serie auswählen oder zu einem anderen Zeitpunkt in der aktiven Serie navigieren, wird Ihre Abstandsmessung möglicherweise nicht im Ansichtsfenster angezeigt. Dies liegt daran, dass die Punkte, zwischen denen Sie gemessen haben, nicht auf dem aktuell sichtbaren Bild liegen. Um Ihre Messung erneut anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Messung im **Ergebnisbereich** und wählen Sie **Lokalisieren**; oder doppelklicken Sie auf die Messung im **Ergebnisbereich**.

Einzelheiten zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Abstandsmessungen und zum Kopieren der Ergebnisse in die Zwischenablage finden Sie im Medis-Suite-Benutzerhandbuch.

5.8.3 Bereichsmessungen

Mit dem Bereichsmesswerkzeug können Sie 2D-Bereiche aufziehen und messen. Wenn Sie einen Bereich gemessen haben, können Sie die Bereichskontur oder Anmerkung ändern. Alle Bereichsmessungen der aktiven Studie werden im **Ergebnisbereich** aufgelistet. Alle Bereichsmessungen der aktiven Sitzung werden im **Ergebnisbereich** von Medis Suite aufgelistet.



Abbildung 17 Beispiel Bereichsmessung

💡 Wenn Sie eine andere Serie auswählen oder zu einem anderen Zeitpunkt in der aktiven Serie navigieren, wird Ihre Bereichsmessung möglicherweise nicht im Ansichtsfenster angezeigt. Dies liegt daran, dass das Bild, auf dem Sie den Bereich gemessen haben, nicht mit dem aktuell sichtbaren Bild übereinstimmt. Um Ihre Messung erneut anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Messung im **Ergebnisbereich** und wählen Sie **Lokalisieren**; oder doppelklicken Sie auf die Messung im **Ergebnisbereich**.

Einzelheiten zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Bereichsmessungen und zum Kopieren der Ergebnisse in die Zwischenablage finden Sie im Medis-Suite-Benutzerhandbuch.

5.8.4 Momentaufnahmen

Sie können Momentaufnahmen als Beweis für eine Analyse oder Diagnose speichern. Momentaufnahmen werden im **Eigenschaftenbereich** angezeigt und im **Ergebnisbereich** aufgelistet. Wenn eine Momentaufnahme erstellt wird, können Sie den Namen jederzeit ändern.

 Wenn Sie eine andere Serie auswählen oder zu einem anderen Zeitpunkt in der aktiven Serie navigieren, werden die in der Momentaufnahme angezeigten Anmerkungen und Messungen möglicherweise nicht im Ansichtsfenster angezeigt. Dies liegt daran, dass die Punkte, an denen die Anmerkungen und Messungen erstellt wurden, nicht auf dem aktuell sichtbaren Bild liegen. Um zu derselben Serie und demselben Zeitpunkt zurückzukehren, zu dem eine Momentaufnahme erstellt wurde, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Momentaufnahme im **Ergebnisbereich** und wählen Sie **Lokalisieren**; oder doppelklicken Sie im **Ergebnisbereich** auf die Momentaufnahme.

Einzelheiten zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Momentaufnahmen finden Sie im Medis-Suite-Benutzerhandbuch.

QFlow 4D-Analyse

6 Eine QFlow 4D-Analyse durchführen

Der Arbeitsablauf zur Flussanalyse formatiert eine Reihe zeitaufgelöster 3D-Volumina in eine 2D-CINE-Serie um, die dann in QFlow quantifiziert werden kann.

Um eine QFlow 4D-Flussanalyse durchzuführen, können Sie die folgenden Richtlinien verwenden.

- Serien laden
- Daten visuell überprüfen
Rauschunterdrückung anwenden: Siehe Rauschunterdrückung [5.4].
- Optional: Überprüfen aller Flussgeschwindigkeitsrichtungen
- Optional: Erstellen eines Phase Unwrapping
- Optional: Erstellen einer Hintergrundkorrektur
- Starten einer Flussanalyse
- Überprüfen des Berichts
- Speichern der Sitzung

6.1 Überprüfen der Flussgeschwindigkeitsrichtungen: Übersicht

Ein 4D-Fluss-MRT-Datensatz besteht aus zeitaufgelösten dreidimensionalen Serien, die in drei Geschwindigkeitsrichtungen kodiert sind und einer einzelnen Modul- (oder Größen-) Serie. In QFlow4D sind die drei Geschwindigkeitsorientierungen wie folgt

- LR/RL (links-rechts/rechts-links)
- HF/FH (Kopf-Fuß/Fuß-Kopf) und
- AP/PA (Anterior-Posterior/Posterior-Anterior)

Wenn die Geschwindigkeitskodierung positiv ist, sind die Pixel weiß und wenn sie negativ ist, sind die Pixel schwarz. In einer Serie, in der die Daten in RL-Richtung kodiert sind, wären die Bereiche, die den Fluss von rechts nach links zeigen, positiv und würden visuell als weiße Pixel angesehen, während Bereiche, die den Fluss von links nach rechts zeigen, negativ und als schwarz zu sehen sein würden.

Da es im 4D-Fluss-MRI-Feld keine Standardisierung der Geschwindigkeitskodierungsrichtungen gibt, sollten die Richtungen in den Daten überprüft werden.



Der Benutzer muss alle Ausrichtungen überprüfen.



Nicht alle Siemens- und Philips-Scanner verfügen über ein 4D-Fluss-MR-Erfassungsprotokoll für ihre Serien. Daher können die korrekten Geschwindigkeitsrichtungen nicht garantiert werden und sollten daher überprüft werden.



Nachbearbeitungspakete können die Geschwindigkeitskodierungsrichtungen ändern.


💡 Wenn QFlow 4D die Geschwindigkeitskodierung nicht korrekt ermittelt hat, wenden Sie sich an Installation & Kundendienst, um Unterstützung bei der korrekten Konfiguration Ihres Systems zu erhalten. Siehe den Abschnitt Kundendienst.



Abbildung 18 Modulbild

❗ H, P, A und F sind Indikatoren, die bei der Bestimmung der Flussrichtung und der Bildorientierung helfen.

❗ Der Orientierungswürfel in der unteren rechten Ecke kann geändert werden, um die Betrachtungsausrichtung zu ändern. Siehe Abbildung 18 Modulbild.

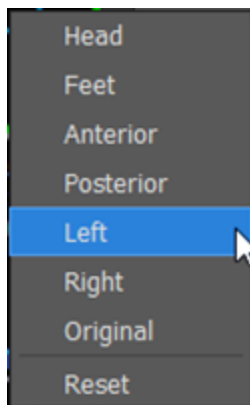

6.1.1 Optional: Überprüfen aller Flussgeschwindigkeitsrichtungen

So überprüfen Sie alle Geschwindigkeitsrichtungen:



1. Drücken Sie  in der Werkzeugleiste.

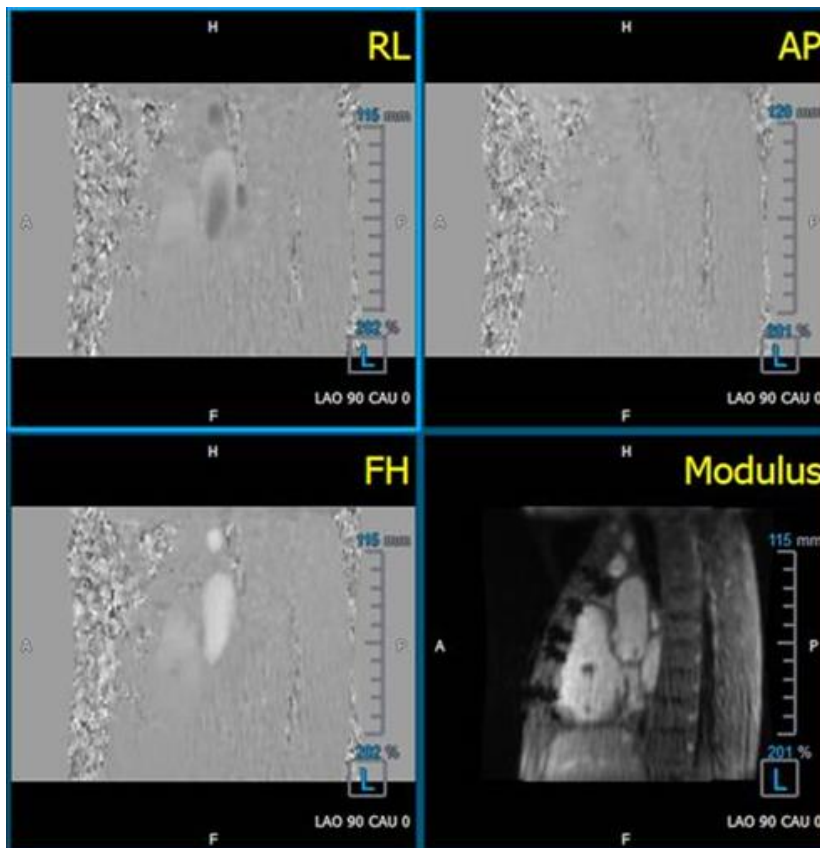


Abbildung 19 Ansichtslayout zur Überprüfung der Flussgeschwindigkeitsrichtung

2. Stellen Sie die Ausrichtung des MODUL-Ansichtsfensters LINKS ein
 "L" im Quadrat in der rechten unteren Ecke des Ansichtsfensters.
3. Scrollen Sie im MODUL-Ansichtsfenster durch die Bilder, um einen Schnitt mit der absteigenden Aorta und den Herzkammern zu finden.
4. Bestimmen Sie den systolischen Zeitrahmen, in dem die Bilder das Signal mit der höchsten Geschwindigkeitsintensität aufweisen.
5. Überprüfen der HF/FH-Geschwindigkeitsrichtung
6. Überprüfen der AP/PA-Geschwindigkeitsrichtung
7. Überprüfen der RL/LR-Geschwindigkeitsrichtung

6.1.2 Überprüfen der HF/FH-Geschwindigkeitsrichtung

So überprüfen Sie die HF/FH-Geschwindigkeitsrichtung:



1. Drücken Sie  in der Werkzeugleiste.
2. Stellen Sie die Ausrichtung des MODUL-Ansichtsfensters LINKS ein
3. Scrollen Sie im MODUL-Ansichtsfenster durch die Bilder, um einen Schnitt mit der absteigenden Aorta und den Herzkammern zu finden.
4. Bestimmen Sie den systolischen Zeitrahmen, in dem die Bilder ein endgültiges Geschwindigkeitssignal zeigen.
5. Bitte überprüfen Sie, ob mindestens eine der folgenden Situationen korrekt ist. Wenn nicht, wenden Sie sich an den Medis-Kundendienst, siehe Abschnitt: Kundendienst.

⚠ Wenn die absteigende Aorta im Ansichtsfenster mit der HF/FH-Ansicht weiß ist, sollte die Geschwindigkeitskodierungsrichtung HF sein.

⚠ Wenn die absteigende Aorta im Ansichtsfenster mit der HF/FH-Ansicht schwarz ist, sollte die Geschwindigkeitskodierungsrichtung FH sein.

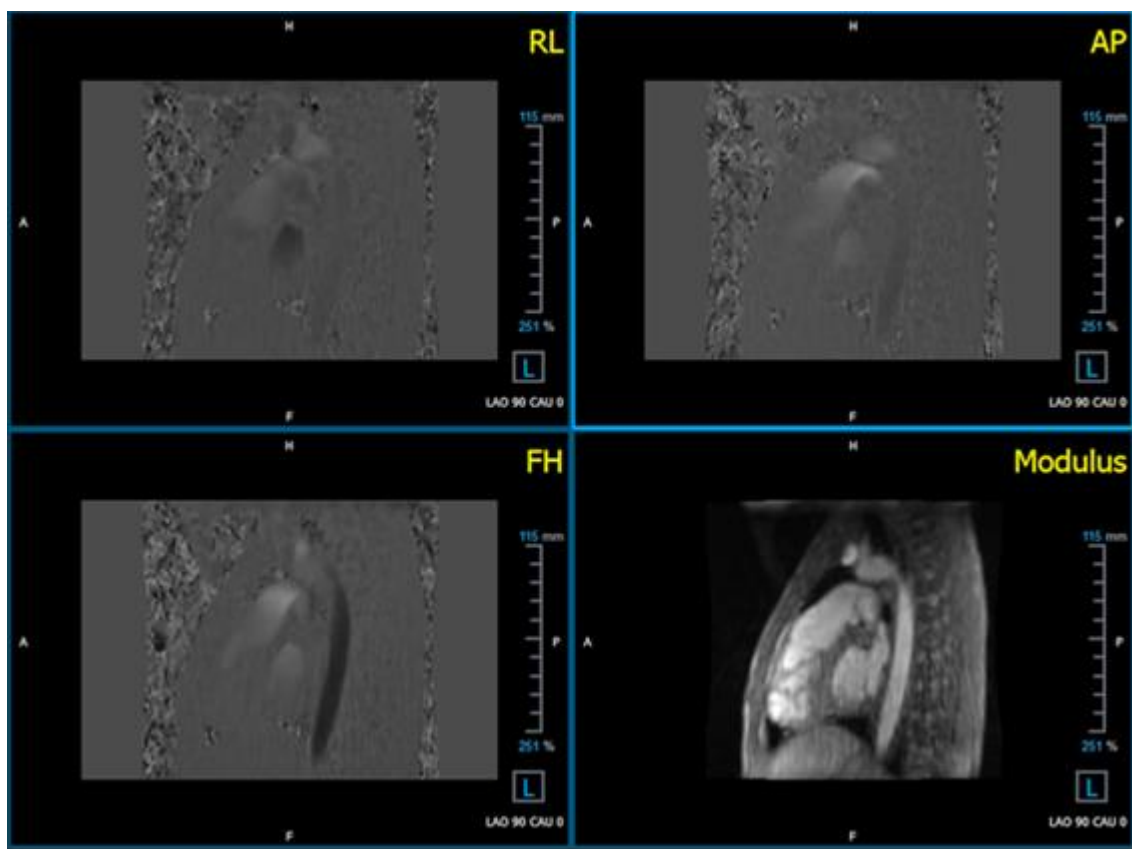


Abbildung 20 Ansichtslayout zur Überprüfung der Flussgeschwindigkeitsrichtung

6.1.3 Überprüfen der AP/PA-Geschwindigkeitsrichtung

So überprüfen Sie die AP/PA-Geschwindigkeitsrichtung:



1. Drücken Sie  in der Werkzeugleiste.
2. Stellen Sie die Ausrichtung des MODUL-Ansichtsfensters LINKS ein („L“ im Quadrat in der rechten unteren Ecke des Ansichtsfensters).
3. Suchen Sie im MODUL-Ansichtsfenster den Aortenbogen.
4. Bestimmen Sie den systolischen Zeitrahmen, in dem die Bilder ein endgültiges Geschwindigkeitssignal zeigen.
5. Bitte überprüfen Sie, ob mindestens eine der folgenden Situationen korrekt ist. Wenn nicht, wenden Sie sich an den Medis-Kundendienst, siehe Abschnitt: Kundendienst.

⚠ Wenn der Aortenbogen im Ansichtsfenster mit der PA/AP-Ansicht weiß ist, sollte die Geschwindigkeitskodierungsrichtung AP sein.

⚠ Wenn der Aortenbogen im Ansichtsfenster mit der PA/AP-Ansicht schwarz ist, sollte die Geschwindigkeitskodierungsrichtung PA sein.

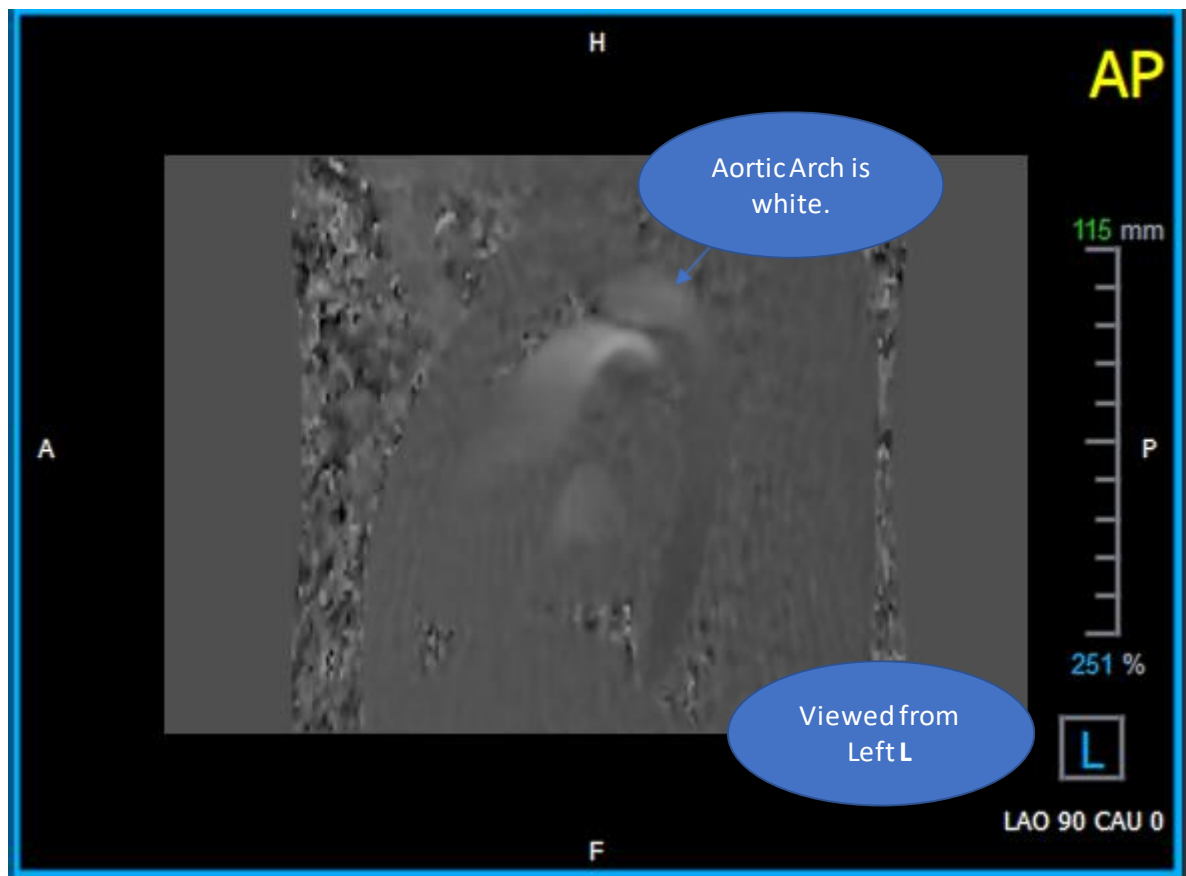


Abbildung 21 AP Positiv codiertes Ansichtsfenster mit einem weißen Aortenbogen und einer dunkleren absteigenden Aorta.

6.1.4 Überprüfen der RL/LR-Geschwindigkeitsrichtung

So überprüfen Sie die AP/PA-Geschwindigkeitsrichtung:



1. Drücken Sie  in der Werkzeugleiste.
2. Stellen Sie die Ausrichtung des MODUL-Ansichtsfensters auf ANTERIOR ein
3.  "A" im Quadrat in der rechten unteren Ecke des Ansichtsfensters.
3. Suchen Sie im MODUL-Ansichtsfenster den Schnitt mit der aufsteigenden Aorta.
4. Bestimmen Sie den systolischen Zeitrahmen, in dem die Bilder ein endgültiges Geschwindigkeitssignal zeigen.
5. Bitte überprüfen Sie, ob mindestens eine der folgenden Situationen korrekt ist. Wenn nicht, wenden Sie sich an den Medis-Kundendienst, siehe Abschnitt: Kundendienst.

 In dem Ansichtsfenster, das die RL/LR-Ansicht enthält, ist die Ausrichtung LR, wenn die proximale aufsteigende Aorta weiß und die distale aufsteigende Aorta schwarz ist.

 In dem Ansichtsfenster, das die RL/LR-Ansicht enthält, ist die Ausrichtung RL, wenn die proximale aufsteigende Aorta schwarz und die distale aufsteigende Aorta weiß ist.

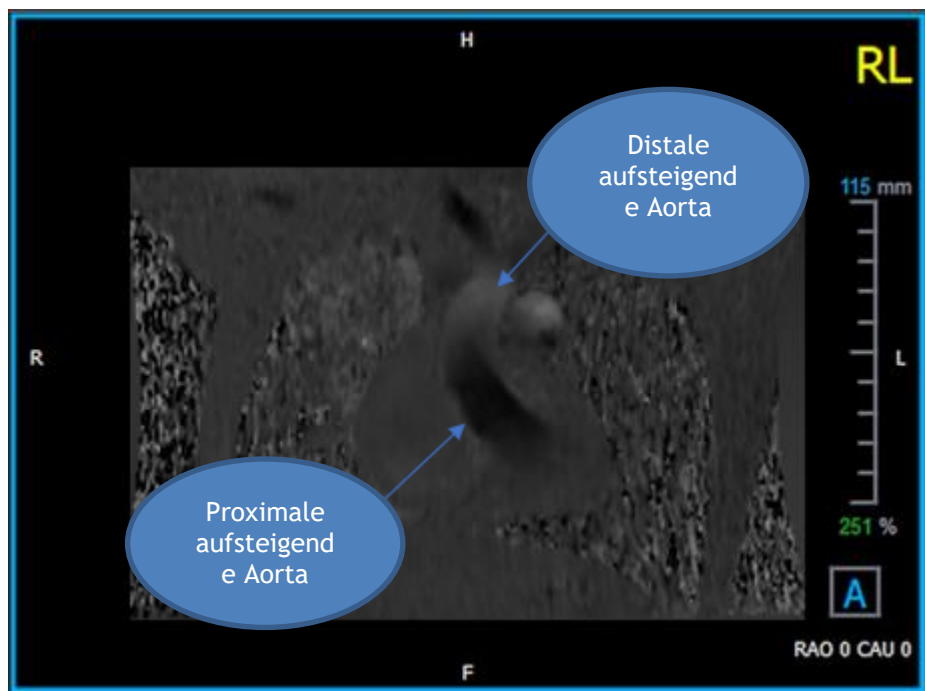


Abbildung 22 RL Positiv kodiertes Ansichtsfenster mit proximaler und distaler aufsteigender Aorta

6.1.5 Schließen der Ansicht zur Überprüfung der Geschwindigkeitsrichtung



1. Drücken Sie  in der Werkzeugleiste. Das Layout kehrt in das QFlow 4D-Analyselayout zurück.

6.1.6 Benutzerdefinierte Systemoptionen

Wenn die Geschwindigkeitsrichtung für einen bestimmten Datensatz nicht korrekt ist, wenden Sie sich an Medis Installation & Kundendienst.

6.2 Hintergrundkorrektur

Die Qualität der Phasengeschwindigkeitsdaten kann aufgrund von Hintergrundphasenverzerrungen beeinträchtigt werden. Diese Verzerrungen können durch Anwenden eines stationären Flussanpassungsalgorithmus auf die Daten korrigiert werden. Das Werkzeug zur Hintergrundkorrektur ist ein quantitatives Werkzeug, das Phasenversatzfehler aus den Daten entfernt und dadurch Phasenversatzfehler korrigiert.

Die Hintergrundkorrektur, die auch als stationärer Flussanpassungsalgorithmus bezeichnet wird, verfügt über zwei konfigurierbare Einstellungen, den **Standardabweichungsschwellwert** zum Definieren der statischen Gewebemaske und die **Anpassungsreihenfolge**, die den Komplexitätsgrad der Anpassung definiert.

Standardabweichungsschwellwert.

Ein niedriger Schwellwert für die Standardabweichung kann dazu führen, dass ein unzureichendes statisches Gewebevolumen einbezogen wird, um eine genaue Hintergrundkorrektur zu erhalten

Ein hoher Schwellwert für die Standardabweichung kann dazu führen, dass der Flussbereich als statisches Gewebe eingeschlossen wird, was zu einer ungenauen Hintergrundkorrektur führen würde.

Der Standardschwellwert von 25% ist die Standardeinstellung.

Anpassungsreihenfolge

Die Anpassungsreihenfolge des stationären Flussanpassungsalgorithmus definiert die Komplexität der Anpassungsebenen, die zur Korrektur des Phasenversatzfehlers verwendet werden. Es gibt drei Anpassungsreihenfolgen, 1., 2. und 3., die theoretisch komplexere Hintergrundkorrekturen erzeugen, obwohl sie eine längere Rechenzeit erfordern.

Die Einstellungen für die Hintergrundkorrektur werden für alle Rekonstruktionen verwendet und als Teil jeder Rekonstruktionsausgabe im **Ergebnisbereich** auf der Registerkarte **Bericht** in Medis Suite veröffentlicht.



Die Hintergrundkorrektur wirkt sich auf die Rekonstruktionsprozedur(en) aus. Wenn eine Hintergrundkorrektur geändert oder abgeschlossen wird, werden alle vorhandenen Rekonstruktionen in der aktuellen Sitzung aktualisiert, um die neuen hintergrundkorrigierten Daten zu verwenden.



Die Rauschunterdrückung hat keinen Einfluss auf die Hintergrundkorrektur.


6.2.1 Aktivieren der Hintergrundkorrektur

So aktivieren Sie die Hintergrundkorrektur.

1. Drücken Sie  in der Werkzeugleiste.

Im **Eigenschaftenbereich** der Hintergrundkorrektur wird Folgendes angezeigt:

- Fortschritt der Hintergrundkorrektur
- Der ausgewählte Schwellwert
- Die ausgewählte Anpassungsreihenfolge
- **Abbrechen**-Schaltfläche, um die Korrektur abubrechen

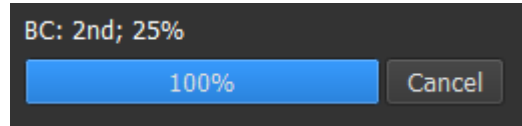

Die Hintergrundkorrektur kann in der Liste Korrekturen im Ergebnisbereich ausgewählt werden, in der der entsprechende Eigenschaftenbereich angezeigt wird.

Im **Eigenschaftenbereich** kann jede Hintergrundkorrektur gefunden, gelöscht und umbenannt werden. Im **Eigenschaftenbereich** werden die Optionen und der Fortschritt für die Hintergrundkorrektur angezeigt.

 Alle Änderungen des Schwellwerts für die Hintergrundkorrektur oder der Anpassungsreihenfolge werden auf **alle** Rekonstruktionen in der aktuellen Sitzung angewendet.

6.2.2 Hintergrundkorrektur löschen

Sie können jede erstellte Hintergrundkorrektur löschen.

So löschen Sie eine Hintergrundkorrektur:

1. Wählen Sie die Hintergrundkorrektur in der Liste **Korrekturen im Ergebnisbereich** aus.
2. Drücken Sie Entf (Delete) auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Entfernen**. Dadurch wird die Hintergrundkorrektur gelöscht.

 Durch Entfernen einer Hintergrundkorrektur werden **alle** Rekonstruktionen in der aktuellen Sitzung aktualisiert.

6.2.3 Hintergrundkorrekturoptionen

Sie können die Einstellungen für die Hintergrundkorrektur über das Optionsmenü ändern und anwenden.

So ändern Sie die Einstellungen für die Hintergrundkorrektur:

1. Wählen Sie  > Optionen, Hintergrundkorrektur.

- Der Standardschwellwert kann mit dem Schieberegler  geändert werden.
 - Die stationäre Flussanpassung, Anpassungsreihenfolge können ausgewählt werden.
2.  Alle Änderungen des Schwellwerts für die Hintergrundkorrektur oder der Anpassungsreihenfolge werden auf **alle** Rekonstruktionen in der aktuellen Sitzung angewendet.

6.3 Phase Unwrapping

Die Qualität der Phasengeschwindigkeitsdaten kann aufgrund eines falsch gewählten Venc beeinträchtigt werden. Geschwindigkeiten, die höher als Venc sind, können nicht in den Phasengeschwindigkeitsdaten kodiert werden und werden „umhüllt“ angezeigt, d.h. mit einem niedrigeren Wert, ein Phänomen, das als Aliasing bekannt ist. Der Phase-Unwrapping-Algorithmus erkennt Aliasing in den Daten und macht es rückgängig, indem eine entsprechende Verschiebung auf die Phasengeschwindigkeitsdaten angewendet wird.

Der Phase-Unwrapping-Algorithmus hat zwei Parameter und einen oberen sowie einen unteren Schwellwert, deren Werte in den Optionen geändert werden können. Die anfängliche Berechnung des Phase-Unwrapping-Algorithmus ergibt eine Menge an Aliasing, das einen beliebigen Wert haben kann. Es wird jedoch angenommen, dass das Aliasing immer 2x Venc ist. Um die Algorithmusausgabe entsprechend einzuschränken, gibt es einen **oberen Schwellwert**, über dem Werte auf 2 Venc gerundet werden, und einen **unteren Schwellwert**, unter dem Werte auf -2 Venc gerundet werden.

Oberer Schwellwert

Der obere Schwellwert kann Werte zwischen 0 und 2 Venc annehmen. Höhere Werte dieses Schwellwerts bewirken, dass der Algorithmus beim Identifizieren von Aliasing in der Richtung der positiven Geschwindigkeit konservativer ist, während niedrigere Werte bewirken, dass der Algorithmus Aliasing leichter identifiziert. Ein oberer Schwellwert unter 0,5 Venc wird nicht empfohlen.

Unterer Schwellwert

Der untere Schwellwert kann Werte zwischen -2 Venc und 0 annehmen. Niedrigere Werte dieses Schwellwerts bewirken, dass der Algorithmus beim Identifizieren von Aliasing in der Richtung der negativen Geschwindigkeit konservativer ist, während höhere Werte bewirken, dass der Algorithmus Aliasing leichter identifiziert. Ein niedrigerer Schwellwert als -0,5 Venc wird nicht empfohlen.

Das Phase Unwrapping wird für alle Rekonstruktionen verwendet. Ob eine vorhanden ist, wird als Teil jeder Rekonstruktionsausgabe im Bereich **Ergebnisse** auf der Registerkarte **Bericht** in Medis Suite veröffentlicht.

 Das Phase Unwrapping wirkt sich auf die Rekonstruktions- und Hintergrundkorrektur-Abläufe aus. Wenn ein Phase Unwrapping abgeschlossen ist, werden eine vorhandene Hintergrundkorrektur und anschließend alle Rekonstruktionen in der aktuellen Sitzung aktualisiert, um die neuen entpackten Daten zu verwenden.

 Aus Leistungsgründen wenden Sie das Phase Unwrapping vor der Hintergrundkorrektur an und verhindern Sie die Neuberechnung der Hintergrundkorrektur nach Abschluss des Phase Unwrapping.

 Rauschunterdrückung und Hintergrundkorrektur haben keinen Einfluss auf das Phase Unwrapping.


6.3.1 Phase Unwrapping aktivieren

So aktivieren Sie Phase Unwrapping.

1. Drücken Sie  in der Werkzeugleiste.

Im **Eigenschaftensbereich** des Phase Unwrapping wird Folgendes angezeigt:

- Fortschritt beim Phase Unwrapping
- **Abbrechen**-Schaltfläche, um den Unwrapping-Vorgang abubrechen

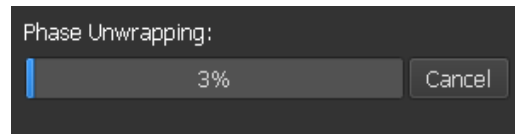

Die Hintergrundkorrektur kann in der Liste Korrekturen im Ergebnisbereich ausgewählt werden, in der der entsprechende Eigenschaftensbereich angezeigt wird.

Im **Ergebnisbereich** kann das Phase Unwrapping gefunden, gelöscht und umbenannt werden. Der **Eigenschaftensbereich** zeigt den Fortschritt des Phase Unwrapping an.

6.3.2 Phase Unwrapping löschen

Sie können alle erstellten Phase Unwrappings löschen.

So löschen Sie ein Phase Unwrapping:

1. Wählen Sie das Phase Unwrapping in der Liste **Korrekturen** im **Ergebnisbereich** aus.
2. Drücken Sie Entf (Delete) auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Entfernen**. Dadurch wird das Phase Unwrapping gelöscht.

 Durch das Entfernen eines Phase Unwrapping werden **alle** Rekonstruktionen in der aktuellen Sitzung aktualisiert.

6.3.3 Phase-Unwrapping-Optionen

Sie können die Phase-Unwrapping-Einstellungen über das Optionsmenü ändern und anwenden.

So ändern Sie die Phase-Unwrapping-Einstellungen:

1. Wählen Sie  > **Optionen, Phase Unwrapping**.
 - Der obere Schwellwert kann mit dem oberen Schieberegler  geändert werden.
 - Der untere Schwellwert kann mit dem unteren Schieberegler  geändert werden.
2.  Alle Änderungen an den Phase-Unwrapping-Parametern werden auf **alle** Hintergrundkorrekturen und -rekonstruktionen angewendet.

6.4 Flussanalyse

Die QFlow 4D Flussanalyse wird als **Rekonstruktion** bezeichnet. Der Arbeitsablauf zur Flussanalyse ermöglicht die Neuformatierung des zeitbasierten 3D-Volumens in eine 2D-Serie, die dann in einer anderen App, QFlow 2D, quantifiziert wird.

Dies sind die Schritte zum Abschließen einer Flussanalyse.

1. Suchen Sie die gewünschte Ebene. Siehe Doppelschräge Ansicht.
2. Eine Flussanalyse starten
 - Optional: Benennen Sie die Rekonstruktion um
3. Führen Sie eine Flussanalyse durch
4. Umbenennen Sie die Bezeichnung für die Flussanalyse von „Rekonstruktion“ in eine geeignete Bezeichnung.

! Alle Ergebnisse der Flussanalyse werden in den QFlow 4D Ergebnissen, Berichten und der Sitzung gespeichert.

! Es können mehrere Flussanalysen gestartet werden.

! Die Flussanalyse in QFlow 4D wird auf einer separaten Registerkarte außerhalb von QFlow 4D mit der vorhandenen QFlow-Anwendung durchgeführt.

6.4.1 Flussanalyse starten

QFlow 4D unterstützt das Auffinden, Umbenennen, Exportieren und Entfernen der Flussanalysen. Die Flussanalyse wird standardmäßig als „Rekonstruktion“ bezeichnet.

So starten Sie eine Flussanalyse

- Wählen Sie  aus der Werkzeugleiste.

Oder:

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Ansichtsfensterbereich. Dies öffnet ein Kontextmenü.
4. Wählen Sie **Flussanalyse**

6.4.2 Flussanalyse-App

Die Flussanalyse wird mit dem von QFlow 4D neu formatierten Datensatz gestartet.

- Drücken Sie F1.
- Drücken Sie die  Hilfetaste.
- Klicken Sie die Hauptmenü-Taste der Medis Suite in der oberen rechten Ecke  > **Hilfe** > **Benutzerdokumente**. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung von Flow 2D finden Sie im QFlow-2D-Benutzerhandbuch.



Abbildung 23 QFlow2D mit der Flussanalyse

6.4.3 Mehrfachflussanalyse

QFlow 4D unterstützt Mehrfachflussanalysen. Jede neue Flussanalyse erzeugt eine neue Registerkarte.

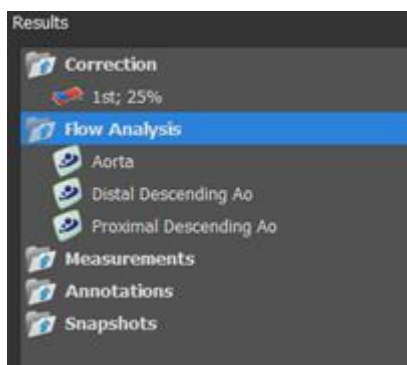


Abbildung 24 Ergebnisbereich mit Mehrfachflussanalyse

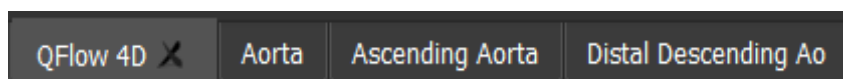


Abbildung 25 Liste mit mehreren Registerkarten mit jeweils einer Flussanalyse

Berichterstattung

QFlow 4D-Ergebnisse werden im Medis-Suite-Ergebnisbereich und im Medis-Suite-Bericht zur Verfügung gestellt.

Report created by:
Report date/time:
Session name:

Medis

Patient Study Info

Name: Study date: 11/11/2010
ID: Description: MRI Heart Morph + Func w/ + w/o Con
Birthdate: Accession number:
Age/Gender: Referring physician's name:
Modality: Institution name:
Manufacturer: Performing physician's name:
Manufacturer model: Operator's name:
Acquisition number: 1

Reason for Referral [Edit]

QFlow 4D Stable Daily 1.0 #1

Background Correction

Fitting Order: 1
Std Threshold: 25%

Reconstruction 01 Results ROI 1:[ROI 1] slice 1

	per HB	per Minute
Net flow volume	34.17 ml/beat	3.04 l/min
Forward flow volume (S.I)	34.45 ml/beat	3.06 l/min
Backward flow volume (S.I)	0.27 ml/beat	0.02 l/min
Regurgitant fraction (S.I)	0.80 %	
Average flow velocity	16.90 cm/s	
Peak flow velocity	145.10 cm/s	
Peak pressure gradient	8.42 mmHg	
Min vessel area	257.63 mm ²	
Max vessel area	293.36 mm ²	

Reconstruction 01 Results ROI 2:[ROI 2] slice 1

	per HB	per Minute
Net flow volume	-14.14 ml/beat	-1.26 l/min
Forward flow volume (S.I)	18.95 ml/beat	1.68 l/min
Backward flow volume (S.I)	4.81 ml/beat	0.43 l/min
Regurgitant fraction (S.I)	25.39 %	
Average flow velocity	-16.07 cm/s	
Peak flow velocity	102.20 cm/s	
Peak pressure gradient	4.18 mmHg	
Min vessel area	107.46 mm ²	
Max vessel area	126.93 mm ²	

Conclusions [Edit]

Results

Patient Study Info

Reason for Referral

Technique

Viewer

QFlow 4D Stable Daily 1.0 #1

Background Correction

Fitting Order: 1
Std Threshold: 25%

Reconstruction 01 Results ROI 1:[ROI 1] slice 1

Net flow volume 34.17 ml/beat 3.04 l/min
Forward flow volume (S.I) 34.45 ml/beat 3.06 l/min
Backward flow volume (S.I) 0.27 ml/beat 0.02 l/min
Regurgitant fraction (S.I) 0.80 %
Average flow velocity 16.90 cm/s
Peak flow velocity 145.10 cm/s
Peak pressure gradient 8.42 mmHg
Min vessel area 257.63 mm²
Max vessel area 293.36 mm²

Reconstruction 01 Results ROI 2:[ROI 2] slice 1

Net flow volume -14.14 ml/beat -1.26 l/min
Forward flow volume (S.I) 18.95 ml/beat 1.68 l/min
Backward flow volume (S.I) 4.81 ml/beat 0.43 l/min
Regurgitant fraction (S.I) 25.39 %
Average flow velocity -16.07 cm/s
Peak flow velocity 102.20 cm/s
Peak pressure gradient 4.18 mmHg
Min vessel area 107.46 mm²
Max vessel area 126.93 mm²

Impressions

Extra-cardiac Findings

Miscellaneous

Comments

Conclusions

Abbildung 26 Medis-Suite-Bericht mit QFlow-4D-Ergebnissen

Die Berichtsfunktionen von Medis Suite werden im Medis-Suite-Benutzerhandbuch beschrieben. Die Medis-Suite-Dokumentation ist auf der Registerkarte Benutzerdokumente verfügbar, die wie folgt geöffnet werden kann;

- Drücken Sie F1.
- Drücken Sie die  Hilfetaste.
- Klicken Sie die Hauptmenü-Taste der Medis Suite in der oberen rechten Ecke  > **Hilfe** > **Benutzerdokumente**

7

Sitzungen

Der QFlow 4D-Status kann in einer Medis-Suite-Sitzung gespeichert werden. Die Sitzung kann neu geladen werden, um die Analysen fortzusetzen oder zu überprüfen.

Die Sitzungsfunktionen in Medis Suite werden im Medis-Suite-Benutzerhandbuch beschrieben. Die Medis-Suite-Dokumentation ist auf der Registerkarte Benutzerdokumente verfügbar, die wie folgt geöffnet werden kann;

- Drücken Sie F1.
- Drücken Sie die  Hilfetaste.
- Klicken Sie die Hauptmenü-Taste der Medis Suite in der oberen rechten Ecke  > **Hilfe** > **Benutzerdokumente**

8 Tastenkombinationen

Wenn Sie mit QFlow 4D arbeiten, können Sie verschiedene Tastenkombinationen auf Ihrer Tastatur und Maus verwenden, um die folgenden Aufgaben schnell auszuführen.

Drücken	Ergebnis
Layout	
F11	Ein- oder Ausblenden die Fenster des Arbeitsbereichs
Bildsteuerung	
Mittlere Maustaste klicken und halten	Alle Grafiken ausblenden
Mittlere Maustaste und ziehen, oder STRG und ziehen	Schwenken
STRG+UMSCHALT und ziehen	Zoomen
ALT+UMSCHALT und ziehen	Stapeln
Arbeitsabläufe	
A	Erstellen einer Bereichsmessung
D	Erstellen einer Abstandsmessung
S oder STRG + LEERTASTE	Erstellen einer Momentaufnahme
Esc	Beenden der Bearbeitung des Arbeitsablaufs

Drücken	Ergebnis
Löschen	Löschen des aktuell ausgewählten Arbeitsablaufs
UMSCHALT+Entf	Alle Arbeitsabläufe löschen
Navigationssteuerung	
HOME	Ersten Zeitpunkt anzeigen
ENDE	Anzeigen des letzten Zeitpunkts
Pfeil nach oben	Anzeigen des vorherigen Schnittes
Pfeil nach unten	Anzeigen des nächsten Schnittes
Linkspfeil	Anzeigen des vorherigen Zeitpunkts
Rechtspfeil	Anzeigen des nächsten Zeitpunkts
STRG+Linkspfeil	Animation rückwärts abspielen
STRG+Rechtspfeil	Animation vorwärts abspielen
Esc	Abspielen der Animation stoppen
Bild auf	Anzeigen der vorherigen Serie
Bild ab	Anzeigen der nächste Serie

9 Allgemeine Referenzen

Anterior (oder **ventral**) Beschreibt die Vorderseite oder Richtung zur Vorderseite des Körpers. Die Zehen sind anterior zum Fuß.

Posterior (oder **dorsal**) Beschreibt die Rückseite oder die Richtung zum Rücken des Körpers. Der Popliteus befindet sich posterior zur Patella.

Stromlinien Beschreibt den Blutfluss entlang einer anatomischen Struktur, z.B. eines Blutgefäßes. Sie stellen eine Gruppe verbundener Linien dar, wobei die Farbe jeder Linie die Geschwindigkeit an einem bestimmten Ort angibt.

Vektoren - Beschreibt ein mikroskopisch kleines Blutpartikel, das durch die relevante Struktur wandert. Es zeigt die Richtung mit einer Pfeilspitze und die Geschwindigkeit mit Farbe.