

QFlow 4D 1.1

ユーザーマニュアル



Medis Medical Imaging Systems bv
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden, the Netherlands



<http://www.medisimaging.com>

Medis Medical Imaging Systems bv

Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden

P.O. Box 384, 2300 AJ Leiden, The Netherlands

P +31 71 522 32 44

F +31 71 521 56 17

E support@medisimaging.com

Medis Medical Imaging Systems, Inc.

9360 Falls of Neuse Road, Suite 103

Raleigh, NC 27615-2484, USA

P +01 (919) 278 7888

F +01 (919) 847 8817

E support@medisimaging.com

法的通知

著作権

© 2020 Medis Medical Imaging Systems bv. 著作権所有

このマニュアルは著作権で保護されており、世界的な著作権法および条約の規定によって保護されています。Medis Medical Imaging Systems bv による書面での事前許可なしに、このマニュアルのいかなる部分も、いかなる目的のためにも、いかなる形式または手段によって、複製、修正、公開、または配布することはできません。複製が、営利または商業的利益のために作成または配布されない限り、このドキュメント全体の変更されていない複製を自由に印刷することが許可されます。

商標同意

DICOM は、医療情報デジタル通信に関連する規格出版物に関する、全米電気製造業者協会の登録商標です。このドキュメントに記載されているその他すべてのブランド、製品、および会社名は、それぞれの所有者の登録商標です。

QFlow は Medis Associated bv の登録商標です。

規制情報

使用目的

QFlow 4D 心臓と血管の MR 4D フロー画像の視覚化と分析に使用することを目的としたソフトウェアです。QFlow 4D は次の視覚化機能をサポートすることができます。

- シネループと 2D レビュー
- 二重斜投影レビュー
- MIP およびボリュームレンダリングによる 3D レビュー
- 3D リフォーマット
- キャリパー測定の実行

QFlow 4D また次の分析をサポートすることも目的としています。

- MR 速度エンコードされたフローの定量化

この分析は、ソフトウェアを操作する臨床医または訓練を受けた医療技術者によって手動で描画された、またはソフトウェアによって自動検出された後、レビューおよび手動編集のために提示された輪郭に基づいています。得られた結果は画像の上に表示され、レポートで提供されます。

QFlow 4D で得られた分析結果は、心臓専門医や放射線専門医が、心臓や血管に関する臨床判断をサポートするために使用することを目的としています。

使用上の注意


QFlow 4D 検証済みで再現可能な定量結果が、心臓血管疾患の患者で使用する心臓と血管の MR 画像の視覚化と分析をサポートするために、必要な臨床設定での使用を示しています。


QFlow 4D により提供された定量結果が、患者の X 線画像の臨床現場で使用される場合、それらは患者の診断または行った治療評価を行うための臨床的意思決定をサポートするために使用できます。この場合、結果は臨床診断の唯一の反駁できない根拠と見なされるべきではなく、責任ある臨床医による使用のみを目的としています。


制限

現在、QFlow 4D1.1 に対する制限は指定されていません。


警告

 QFlow 4D 心臓病専門医、放射線科医、または心臓分析を行う資格のある訓練を受けた技術者が使用する必要があります。分析結果が診断に使用される場合、結果は有資格医療専門家によって解釈されなければなりません。臨床現場では QFlow 4D 「使用目的」のセクションに示されている目的以外で使用しないでください。


 フロー測定で検証されたシーケンスでのみフローパラメーターを測定することが推奨されます。信頼性の高い測定結果は、検証済みの収集でのみ取得できます。

 ユーザーは、選択した操作言語に十分な熟練度があり、このマニュアルを読み、ソフトウェアに慣れ、信頼できる分析結果を得ることができる必要があります。

モニターのアスペクト比と解像度に関する注意

 解像度をモニターの物理的なアスペクト比とは異なるアスペクト比に設定すると、表示されるオブジェクトやキャリパーの形状がわずかに歪む場合があります。この歪みは、測定や分析の精度には影響しません。歪みを避けるには、モニターの解像度を物理的なアスペクト比と同じアスペクト比に設定します。LCD モニターは通常、ネイティブ解像度で最適に動作します。Microsoft Windows では、十分な情報がある解像度を推奨しています。

欧州の法規制

 1639	QFlow 4D クラス IIa 医療機器として認定されています。これは、オランダ医療機器法令 (Besluit Medische Hulpmiddelen, Stb. 243/1995) およびヨーロッパ医療機器指令 93/42 / EEC の要件に準拠しています。
---	--

北米の法規制

QFlow 4D 食品医薬品化粧品法のセクション 510 (k) の規定に基づき、FDA (食品医薬品局) によって米国市場向けに認可されています。

警告

連邦法により、このデバイスは医師による、または医師の指示に則る販売に制限されています。

QFlow 4D カナダ医療機器規制の要件に準拠し、クラス II 医療機器として認可されています。

その他規制

QFlow 4D 日本の医薬品医療機器法の要件に準拠しており、クラス II 医療機器として認可されています。

使用される規則

このマニュアルでは、マウスとキーボードの操作を示し、ユーザーインターフェイスを参照するために、次の規則と頭字語が使用されています。

マウス

クリック	マウスの主ボタンを押し、放します。左利きの場合は、左利き用マウスボタンをプライマリボタンとして設定している可能性があります。
クリック&ドラッグ	マウスの主クリックを押し続けます。マウスをドラッグして機能を実行し、クリックを放します。左利きの場合は、左利き用マウスボタンをプライマリボタンとして設定している可能性があります。
右クリック	マウス右クリックし、放します。左利きであれば、左利きマウスの該当ボタンを押して下さい。
ミドルクリック	ホイールボタンまたはマウスの中央ボタンを押して放します。2ボタンマウスを使用している場合は、マウスの左ボタンと右ボタンを同時に押して放します。
ダブルクリック	マウスの主ボタンを2回押して放します。
スクロール	マウスのスクロールホイールを回転させます。

キーボード

SHIFT/CTRL+click	キーボードの SHIFT/CTRL キーを押したまま、ボタンまたはオブジェクトをクリックします。
CTRL+K	キーボードの CTRL キーを押しながら K を押して、両方のキーを放します。

表記規約

結果ペインの注釈ノードで…	ボタン、フィールド、メニュー、メニューオプション、およびタブの名称は、大文字で太字で示されています。
手順>テキスト注釈	特定タスクを実行するために選択する一連のメニューオプションは、山括弧で示されます。
ビュー>ムービー	特定タスクを実行するために選択する一連のメニューオプションは、山括弧で示されます。
ラベル: フロー分析	入力したテキストや注釈ラベルなどの画面に表示されるテキストは、Segou UI で表示されます。
表示タブで、すべての図面を非表示オプションを選択します。	ボタン、フィールド、メニュー、メニューオプション、およびタブの名称は、大文字で太字で示されています。

使用される



参照：状況に関連する可能性がある、関連ドキュメントまたはこのドキュメントの関連セクション。



ヒント：役立つ情報または代替の作業方法を提供します。



注記：追加情報を提供します。



注意：タスクを実行するときは注意してください。



警告：画像の表示や分析で潜在的に危険な状況が発生すると警告が表示され、誤った結果が生じる可能性があります。回避するには、指示に従うことをお勧めします。

目次

QFlow 4D 1.1	I
ユーザーマニュアル	I
規制情報	IV
使用される規則	VII
表記規約	VII
目次.....	IX
イントロダクション	12
1 QFlow 4D について	12
1.1 QFlow 4D 使用法.....	12
2 システム要件	12
2.1 ハードウェア	12
2.2 オペレーティングシステム	13
3 サポート.....	14
始める	15
4 QFlow 4D ワークスペース	15
4.1 概要	15
4.2 メニュー.....	16
4.3 ツールバー	17
4.4 ワークスペースペイン.....	20
4.4.1 結果ウィンドウ.....	21
4.4.2 プロパティペイン	22
ビューイング	23
5 ビューイング	23
5.1 ローディングシリーズ.....	23
5.2 ビューポート	23

5.3	ビューポートレイアウト	24
5.3.1	フロー方向レイアウトの検証	25
5.3.2	フロー分析レイアウト.....	26
5.3.3	2D ビューレイアウト.....	28
5.4	ノイズ除去	30
5.4.1	ノイズ除去オプション.....	31
5.4.2	ノイズ除去有効化/無効化.....	31
5.5	ビューポートオーバーレイ可視化	32
5.5.1	オーバーレイ表現を切り替え	32
5.5.2	ストリームライン原点平面オーバーレイ	34
5.6	フレーム選択	36
5.7	マウスコントロール	37
5.7.1	スタッキング	37
5.7.2	ズーム	37
5.7.3	パンニング	38
5.7.4	ウィンドウ幅とウィンドウレベル	38
5.7.5	初期ビューステート	39
5.8	標準測定.....	39
5.8.1	注釈	40
5.8.2	距離測定.....	40
5.8.3	面積測定.....	41
5.8.4	スナップショット	41
QFlow 4D 分析		43
6	分析 QFlow 4D 実行.....	43
6.1	流速方向の確認：概要.....	43
6.1.1	すべての流速方向を確認する	45
6.1.2	HF / FH 速度方向を確認する	46



6.1.3	AP / PA 速度方向を確認.....	47
6.1.4	RL / LR 速度方向を確認.....	49
6.1.5	速度方向検証ビューを閉じます.....	50
6.1.6	カスタムシステムオプション.....	50
6.2	背景補正.....	50
6.2.1	背景補正を有効化.....	51
6.2.2	背景補正を削除.....	51
6.2.3	背景補正オプション.....	51
6.3	位相接続.....	52
6.3.1	位相接続の有効化.....	53
6.3.2	位相接続の削除.....	53
6.3.3	位相接続オプション.....	53
6.4	フロー分析.....	54
6.4.1	フロー分析を開始.....	54
6.4.2	フロー分析アプリ.....	55
6.4.3	複数のフロー分析.....	55
	レポート.....	57
7	セッション.....	57
	リファレンス.....	59
8	ショートカットキー.....	59
9	一般参照.....	60

1 QFlow 4D について

QFlow 4D 4DフローMRスタディの3D視覚化および2D定量分析をサポートするように設計されたMedisソフトウェアソリューションです。心臓病専門医、放射線科医、および技術者が、動脈および弁を通る血流を定量化できるようにします。

QFlow 4D 循環器科医、放射線科医、または訓練を受けた技術者が、定量的なフロー分析のために心臓の解剖学的構造または周辺血管の適切な斜投影ビューを選択することをサポートします。

QFlow 4D Medis Suite 製品のアプリとして実行されます。Medis Suite の機能（画像データの起動方法 QFlow 4D と読み込み方法を含む）は、Medis Suite ユーザーマニュアルに記載されています。Medis Suite のドキュメントは、次のように開くことができるユーザードキュメントタブから利用できます。

- F1 キーを押します。
-  ヘルプボタンを選択します。
- 右上隅の Medis Suite メインメニューボタン  ヘルプ > ユーザードキュメントを選択します。

1.1 QFlow 4D 使用法

製品の可用性 QFlow 4D はライセンスに依存します。QFlow 4D アプリケーションの複数ライセンスを購入する場合は、Medis にお問い合わせください。

2 システム要件

2.1 ハードウェア

QFlow 4D:

- Intel または互換性のあるクアッドコアプロセッサ
- 16GB の RAM
特に複数時点で大きな画像セットを使用している場合は、十分なメモリがあることを確認してください。
- 250 GB のハードディスク空き容量、SSD を推奨
(シリーズをローカルに保存する場合は、十分なディスク容量があることを確認してください)
- 3 ボタンマウス、スクロールホイール推奨
- CD-ROM からソフトウェアをインストールするための CD-ROM プレーヤー
- インストーラーをシステムに転送するための USB ポートまたはネットワーク接続
- OpenGL をサポートし、512 MB のメモリを搭載したビデオカード
- 1920x1080 ピクセルの最小解像度をサポートするワイドスクリーンモニター

- ネットワーク経由でシリーズにアクセス、受信、送信するための少なくとも100MBit/sのネットワークインターフェイスカード

Sentinelライセンスサーバー:

- 最小速度550 MHzのIntelまたは互換プロセッサ
- 128MBのRAM
- 1GBの空き容量のあるハードディスク
- ネットワークインターフェイスカード

注記:

- すべてのハードウェアがオペレーティングシステムに準拠している必要があります
- ライセンスサーバーには、固定IPアドレスまたはDNSサーバーで取得済みIPアドレスを持つPCを強くお勧めします

2.2 オペレーティングシステム

QFlow 4D:


- Microsoft Windows 7, SP1, 64 bit
- Microsoft Windows 8.1, 64 bit
- Microsoft Windows 10, 64 bit
- Microsoft Windows Server 2008 R2, SP1, 64 bit
- Microsoft Windows Server 2012 R2, 64 bit
- Microsoft Windows Server 2016, 64 bit

Sentinelライセンスサーバー:

- Microsoft Windows 7, 32 and 64 bit
- Microsoft Windows 8, 32 and 64 bit
- Microsoft Windows 8.1, 32 and 64 bit
- Microsoft Windows 10, 32 and 64 bit
- Microsoft Windows Server 2008, 32 and 64 bit
- Microsoft Windows Server 2008 R2, 64 bit
- Microsoft Windows Server 2012, 64 bit
- Microsoft Windows Server 2012 R2, 64 bit
- Microsoft Windows Server 2016, 64 bit

3 サポート

Medis は、品質の高い製品とサービスの提供をお約束します。ソフトウェアについて質問がある場合、またはソフトウェアまたはドキュメントの改善について提案したい場合は、Medis ヘルプデスクにお問い合わせください。

Medis ヘルプデスクに電子メールで連絡する場合は、件名フィールドにソフトウェアの名前とバージョン番号を記載してください。ソフトウェアのバージョン番号を調べるには、ヘルプ>バージョン情報…を選択します。

北南米

Medis Medical Imaging Systems, Inc.
E-mail: support@medisimaging.com
TEL: +1 919 278 7888 (営業日 9.00-17.00 EST)

Europe, Africa, Asia and Australia

Medis Medical Imaging Systems bv
E-mail: support@medisimaging.com
TEL: +31 71 522 32 44 (営業日 9.00-17.00 CET)

4 QFlow 4D ワークスペース

QFlow 4D アプリのツールバー、アプリのコンテキストメニュー、または Medis Suite のアプリケーションウィンドウから、QFlow 4D アプリアイコン  を選択して起動します。起動方法とシリーズをアプリケーションにロードする方法詳細については、Medis Suite ユーザーマニュアルを参照してください。

本項では以下のトピックを説明します：

- 概要
- メニューバー
- ツールバー
- ワークスペースペイン
- ビューイング

4.1 概要

メインワークスペースは、メニューバー、ツールバー、ワークスペースペイン、二重斜投影、3D-MIP、速度画像ビューポートを含む中央ウィンドウ領域で構成されます。結果ペインとプロパティペインもあります。

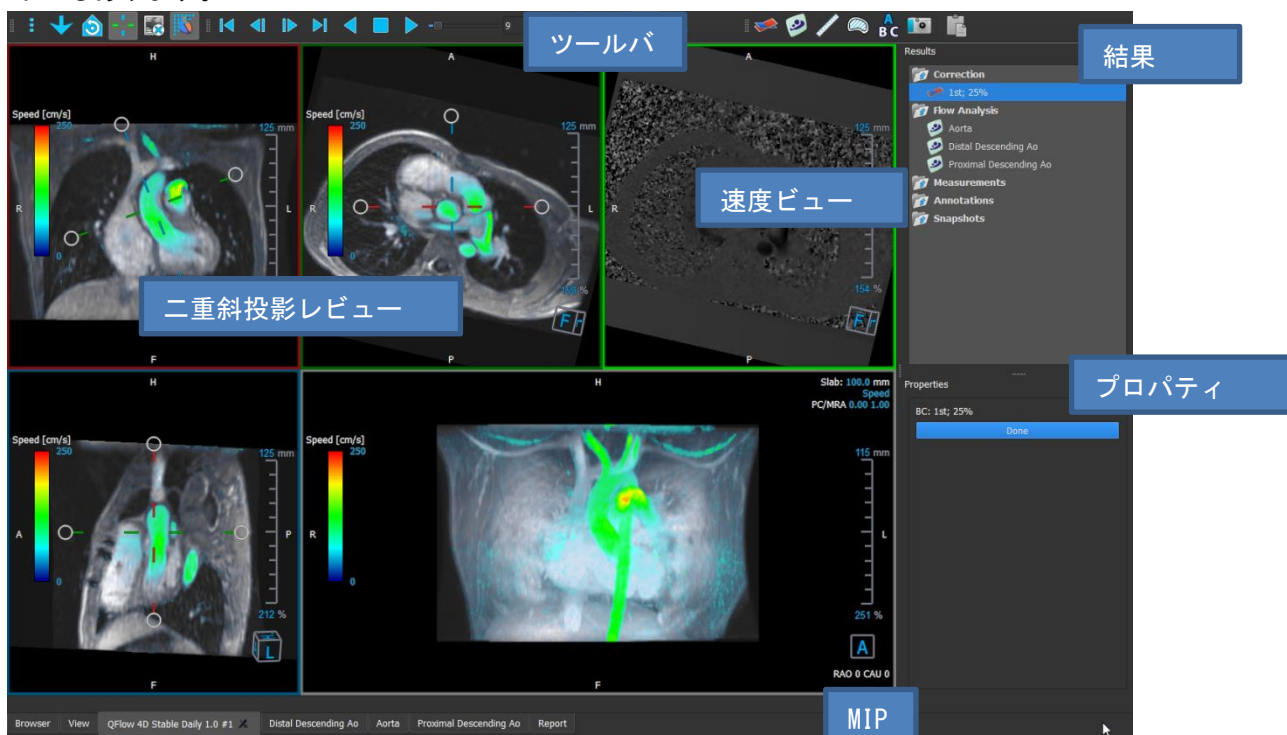



図 1: ワークスペースの概要

ワークスペースペインとツールバーを非表示、サイズ変更、または移動して、ワークスペースをカスタマイズできます。ワークスペースに加えた変更は、個々の Windows ユーザーごとに保存されます。

4.2 メニュー

メニューには、アプリケーション機能をアクティブにするコマンドが含まれています。

メニューを表示するには:

- 一般ツールバーのメニューアイコン  を選択します。

メニューコマンドは、次のメインメニューに編成されています: ペイン、ツールバー、シネ、画像コントロール、手順、ヘルプ。

さらに次のメニュー項目があります: レイアウトのリセット、ウィンドウ/レベルのリセット、初期ビュー状態、軸の表示/非表示、オプション。これらのコマンドの一部では、ツールバーショートカットとしてツールボタンを使用できます。

ⓘ 面積測定などの手順を実行しているときは、メニューコマンドがグレー表示されることがあります。手順をキャンセルまたは終了すると、メニューコマンドをアクティブにすることができます。

メニュー	コマンド	概要
	ペイン	ワークスペースペインを表示または非表示
	ツールバー	ツールバーを表示または非表示
	シネ	フレーム選択コントロール
	イメージコントロール	イメージ表示をコントロール
	手順	新規手順を開始
	レイアウトをリセット	標準レイアウトをリセット
	ウィンドウ/レベルをリセット	標準ウィンドウ/レベルをリセット
	初期ビューステート	ビューステートをリセット
	軸を表示/非表示	軸可視性を有効化/無効化
	オプション	アプリケーション標準設定
	ヘルプ	ユーザードキュメンテーションとバージョン情報

4.3 ツールバー

ツールバーをメインウィンドウの別部分に移動できます。ツールバーを表示または非表示にできます。




ツールバーを移動するには：

- ツールバーのダブルバーグリッパハンドルをクリックしてドラッグします。

これで、メインウィンドウの両側の任意箇所にツールバーを移動できます。ツールバーをクリックして、新しい位置にドラッグするだけです。ツールバーの位置は、アプリケーションを閉じるときに保存されます。






ツールバーを表示または非表示にするには：

1. 選択  > ツールバー.
2. チェックボックスをオンにしてツールバーを表示し、チェックボックスをオフにしてツールバーを非表示にします。

または

1. ツールバーエリアに右クリックコンテキストメニューを開きます。
2. チェックボックスをオンにしてツールバーを表示し、チェックボックスをオフにしてツールバーを非表示にします。

アプリケーションを閉じると、ツールバーの状態が保存されます。

アイコン	機能
一般ツールバー	
	メニューを見る
	フロー方向を確認します。
	フロー分析 3D レイアウトに移動します。
	2D ビューレイアウトへ移動
	初期ビューに移動し、ズーム¥パン¥ウィンドウ幅¥ウィンドウレベルをリセットします

アイコン	機能
	軸の表示と非表示
	スピードオーバーレイの背景ノイズを削除
	画像のテキストオーバーレイを切り替え
シネツールバー	
	初回フレームに移動
	前フレームに移動
	次フレームに移動
	最終フレームに移動
	バックワード方向にシネを再生
	シネを停止
	前方向にシネを再生
	シネプレイバック速度を設定
マウスコントロールツールバー	
	スタック
	ズーム

アイコン	機能
	Pan
	ウィンドウ幅とウィンドウレベル
	スワイプ (3D ビューポートが選択されている場合のみ)
手順ツールバー	
	データの背景補正
	データの位相接続法
	フロー分析を開始
	距離測定を作成
	面積測定を作成
	テキスト注釈を作成
	スナップショットを作成
	全ての測定結果をクリップボードにコピー


4.4 ワークスペースペイン

デフォルトでは、ワークスペースにはイメージビューポートの右側に次のペインが表示されます。

- 結果
- プロパティ

ペインを表示または非表示にしたり、ドッキングしたり、1つのタブ付きパネルに結合したり、パネルからペインを削除したりできます。

ペインを表示または非表示にするには:

- ペインを選択し、非表示のペインを選択して表示するか、表示されているペインを選択して非表示にします。

ペインをドッキングするには:

1. ペインのタイトルバーをクリックしてドラッグします。
2. ペインをビューアウィンドウ端に移動して、ドック領域の1つを選択します。

ペインがドック領域に近づくと、その領域が点線で強調表示されます。ペインは別のペインと組み合わせるか、個別に挿入できます。

3. 選択したドック領域が強調表示されたら、マウスボタンを離します。

これによりペインが選択した位置にドッキングされます。

ペインをタブ付きパネル1つに結合するには:

- ペインのタイトルバーをクリックして、結合するペインのタイトルバーにドラッグします。
- これにより、タブ付きパネルが作成されます。

パネルからペインを削除するには:

- ペインのタイトルバーをクリックして、パネルから離れるようにドラッグします。

4.4.1 結果ウィンドウ

結果ペインには、QFlow 4Dに次のように表示されます。

- これは、ビューポートにロードされたシリーズで実行された標準的手順、つまり測定、注釈、スナップショットを示しています。
- **背景補正**を示しています。
- **フロー分析**のリストが表示されます。

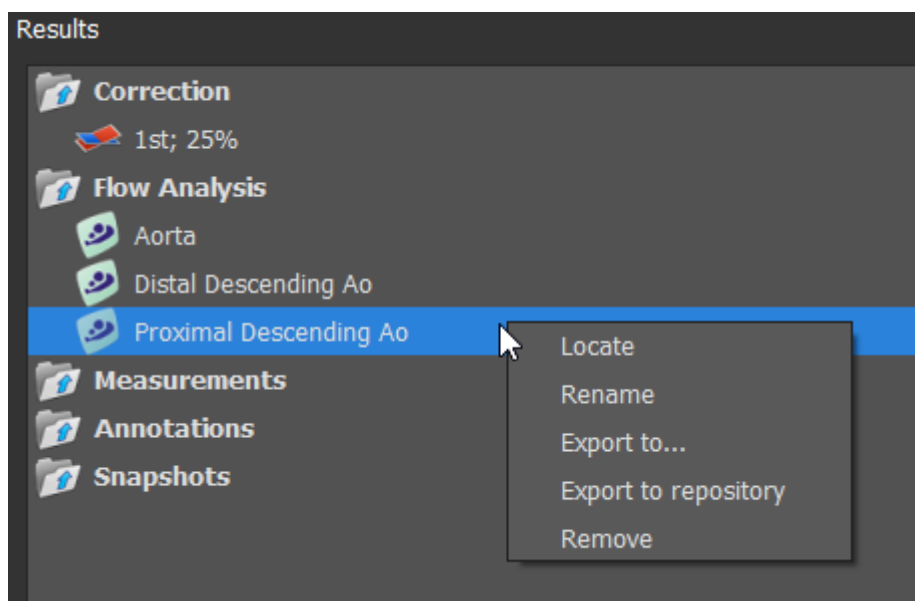


図2 結果ペイン

グループヘッダーを選択すると、アイテムを折りたたんだり展開したりできます。

手順を右クリックして、手順に対してアクションを実行できます。手順のタイプに応じて、いくつかのオプションを含むコンテキストメニューが表示されます。

検索: 手順が最初に実行された画像と、画像の向きがアクティブになります。フロー分析では検索が自動的に有効になります。

リネーム: 手順をリネームします。

エクスポート: 手順をディスクにエクスポートします。

レポジトリにエクスポート: レポジトリに手順をエクスポートします。

削除: 手順を削除します。



フロー分析手順は、事前定義されたラベルのリストを提供します。

4.4.2 プロパティペイン

プロパティペインには、選択した手順のプロパティが表示されます。標準手順、つまり測定、注釈、スナップショット手順、およびフロー分析の再構成を QFlow 4D 変更できます。

ラベルを変更するには（測定、注釈、スナップショット）：

1. **結果ペイン**で、手順を選択します。
2. **プロパティペイン**で、**ラベルフィールド**の右側にある省略記号を選択して定義済みのラベルを選択するか、カスタムラベルを入力して Enter キーを押します。

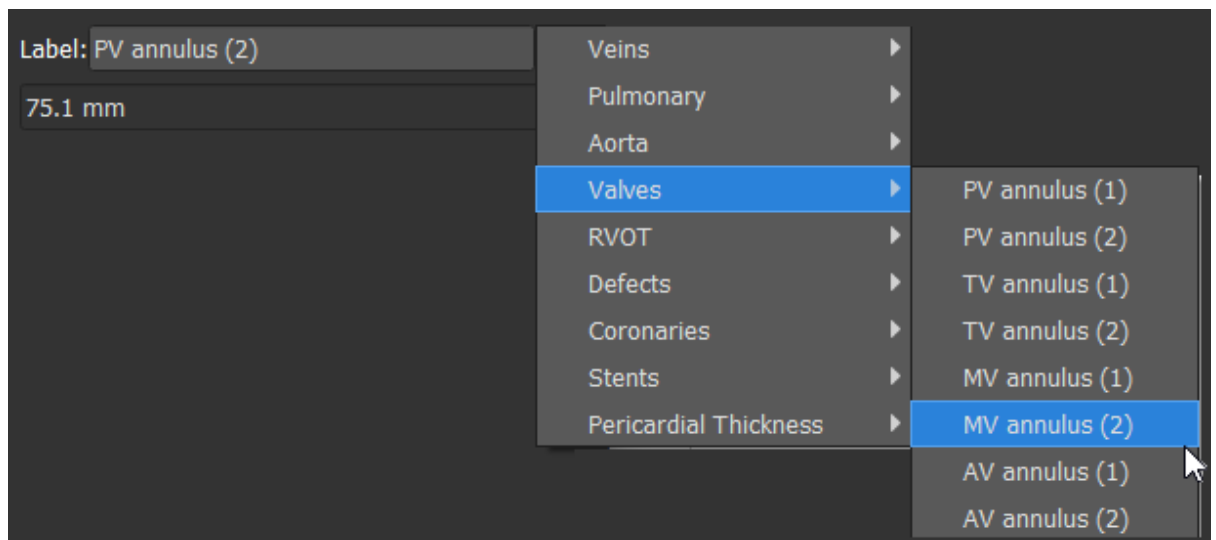
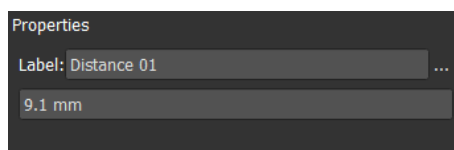


図 3 定義済みのラベルメニュー

5 ビューイング

5.1 ローディングシリーズ

シリーズは、QFlow 4DMedis Suite のシリーズブラウザーから読み込むことができます。詳細手順については、Medis Suite のユーザーマニュアルを参照してください。

4D フローMRI データセットは、3つの速度方向でエンコードされた時間分解された3次元シリーズと、単一の係数（またはマグニチュード）シリーズで構成され、また QFlow 4D は短軸および長軸シリーズもサポートします。

❗ QFlow 4D 視覚化を開始するには、少なくとも1セットの4D フローMRI データセットが必要です。

Medis Suite のシリーズブラウザーからシリーズをロードするには

1. Medis Suite シリーズブラウザーの画像またはテキストビューで、3組の4D 流動速度シリーズと1つの4D フローモジュラスシリーズを選択します。
2. 選択したアイテムをクリックして、任意のビューポートにドラッグします。

または

1. Medis Suite シリーズブラウザーの画像ビューまたはテキストビューでアイテムをダブルクリックします。

または

1. Medis Suite シリーズブラウザーの画像またはテキストビューですべてのシリーズを選択します。
2. 選択したシリーズの上を右クリックして、コンテキストメニューを開きます。

QFlow 4D を選択します。

これにより、シリーズがビューポートに読み込まれます。デフォルトでは、シネはすべての個別の画像フレームを表示するために再生を始めます。

❗ QFlow 4DMR DISOM シリーズのみ読み込み

5.2 ビューポート

ビューポートのテキストオーバーレイには、患者、病院、画像取得、および表示設定に関する詳細情報が表示されます。

患者と画像情報を表示または非表示にするには：


- 選択  オプション、ハンギング

患者情報の表示または画像情報の表示を選択または選択解除します。

または

- '0' を使用して、オーバーレイ表示を非表示にするさまざまなモードを切り替えます。

または

- ツールバーで  を選択して、オーバーレイ表示を非表示にするさまざまなモードを切り替えます。

ビューポート上のイメージを最大化

- イメージをダブルクリック

これにより、ビューポートが最大化され、ビューポート全体に拡大されます。

元のビューポートレイアウトに戻すには、画像をもう一度ダブルクリックします。

 インタラクティブなグラフィックは青色 **Frame: 21/53** で表示され、マウスで画像や表示のプロパティを変更できます。

5.3 ビューポートレイアウト

QFlow 4D3 つの独立した画面レイアウトで構成されています。

- フロー方向レイアウトの検証
- フロー分析 3D ビューのレイアウト
- 2D ビューレイアウト

フロー方向レイアウトの検証を有効にするには



を押して、フロー方向レイアウトの検証を有効にします。

フロー分析 3D レイアウトを有効にするには



を押して、フロー分析 3D ビューレイアウトを有効にします。

2D ビューレイアウトの有効化



を押して、2D ビューレイアウトを有効にします。

5.3.1 フロー方向レイアウトの検証

フロー方向の確認に使用するレイアウトです。

セクション参照: 流速方向の確認 : 概要

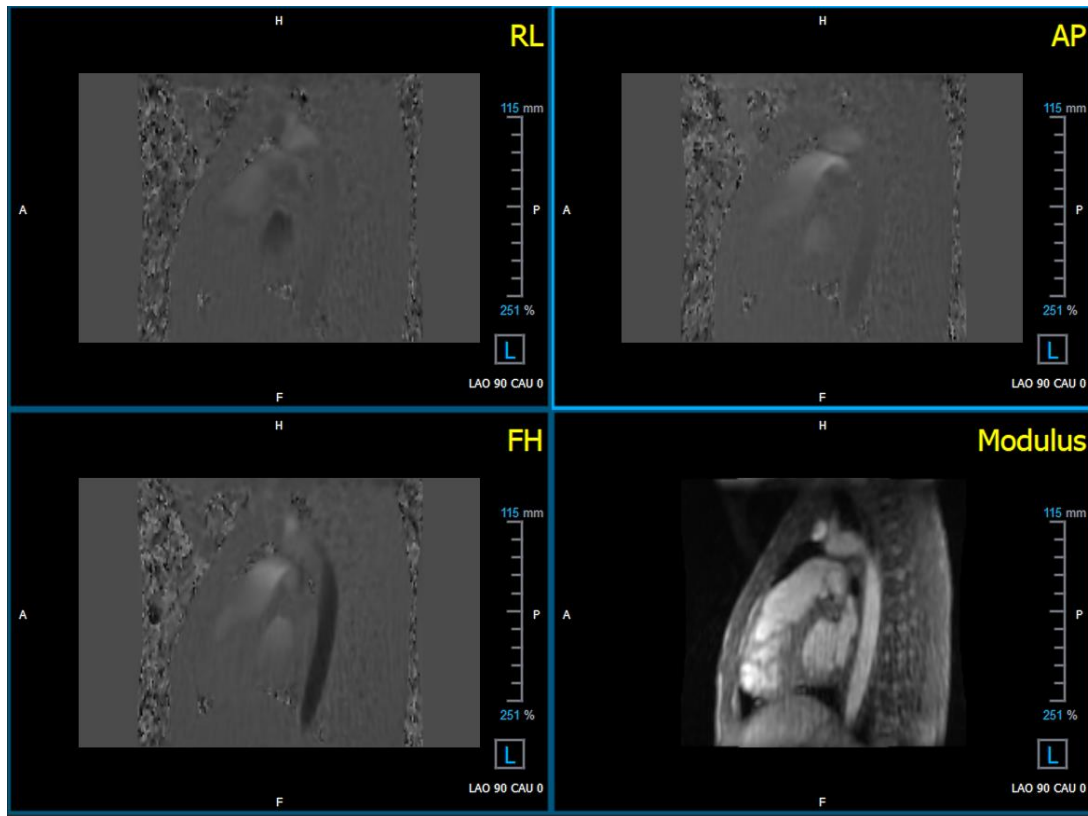


図 4 フロー方向レイアウトの検証

5.3.2 フロー分析レイアウト

QFlow 4D の主要なレイアウトは、5 つのビューポートで構成されています。

1. 3 つの二重斜投影レビュー
2. 3D ビュー
3. 速度ビュー

5.3.2.1 二重斜投影レビュー

二重斜投影ビューの主な目的は、QFlow 4D での流動解析に使用する対象平面を決定することです。二重斜投影ビューは、3D ボリュームの直交ビューを示しています。

二重斜投影ビューポートは、図 5 の二重斜投影ビューポートレイアウトで青く強調表示されています。

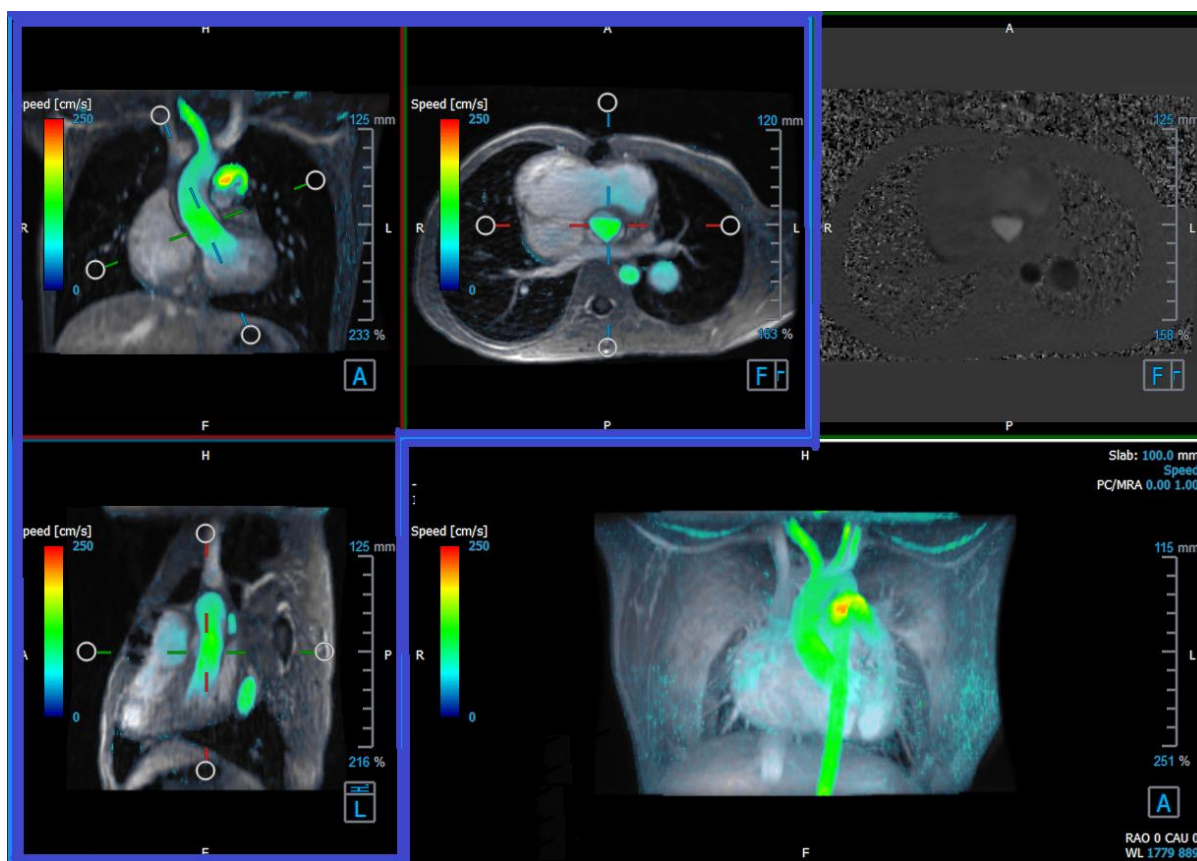


図 5 二重斜投影ビューポートレイアウト

5.3.2.2 3D ビュー

図 6 3D ビュー、ビューポートで 3D ビューのビューポートが青色で強調表示されます。

3D ビューは、3D で描画されたシリーズを表示するビューポートです。

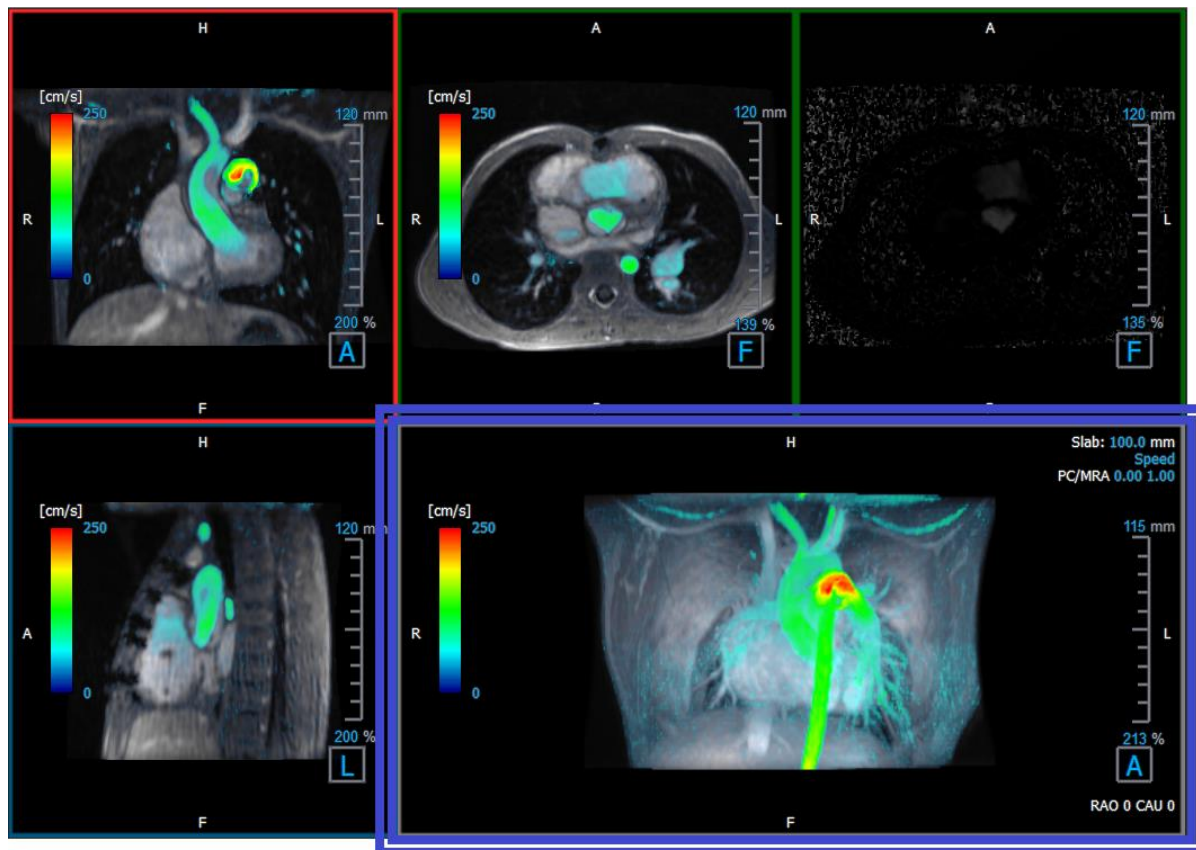


図 6 3D ビュー、ビューポート

5.3.2.3 フロー2D 表現

上部中央と右上のビューポートは、ユーザーがフロー分析手順に対して定義した再構成平面でのシリーズを示しています。上の中央のビューポートは、再構成されたモジュラスイメージを示し、右上のビューポートはその平面の垂直速度を示します。

これらの2つの平面は、図 6 赤色でマークされています。弾性率と位相シリーズは、流動解析に使用されるデータを示しています。

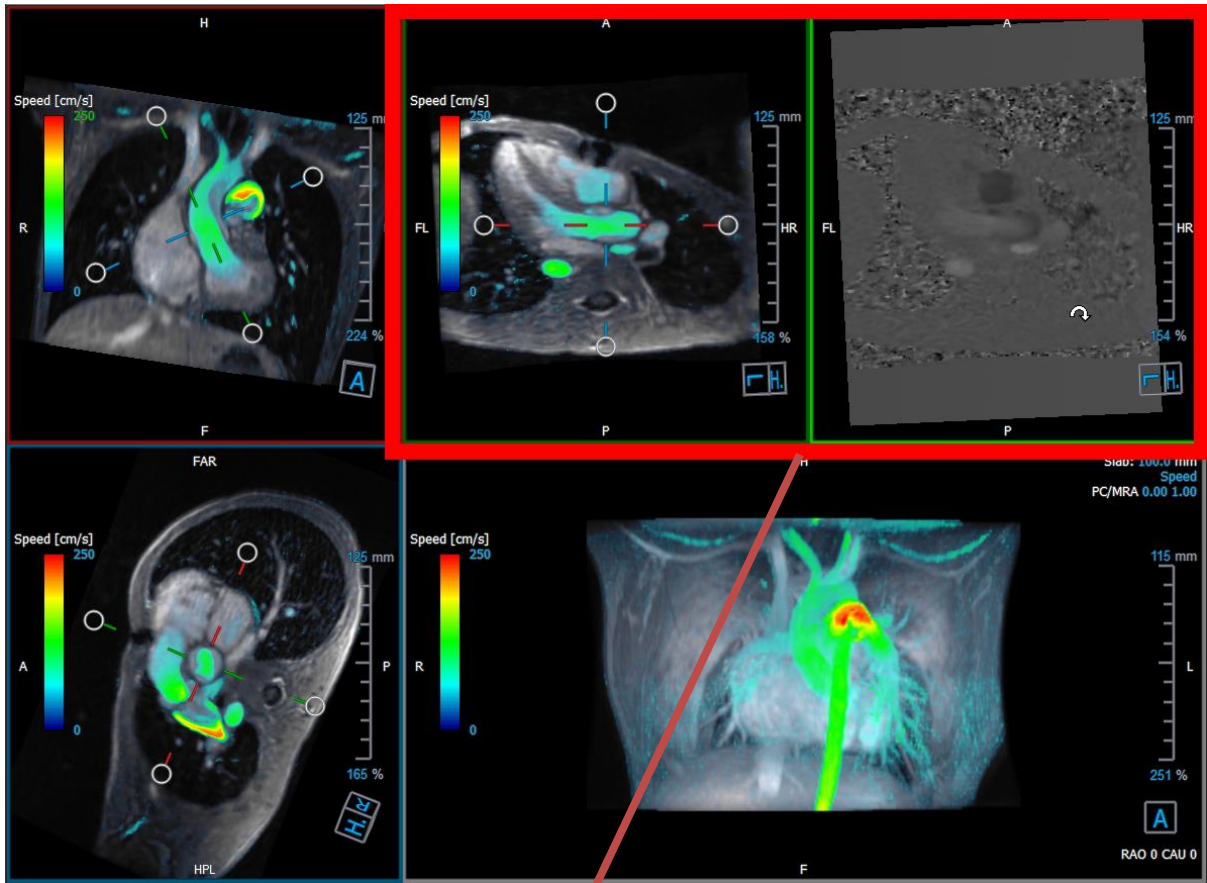


図7 弾性率と位相の画像

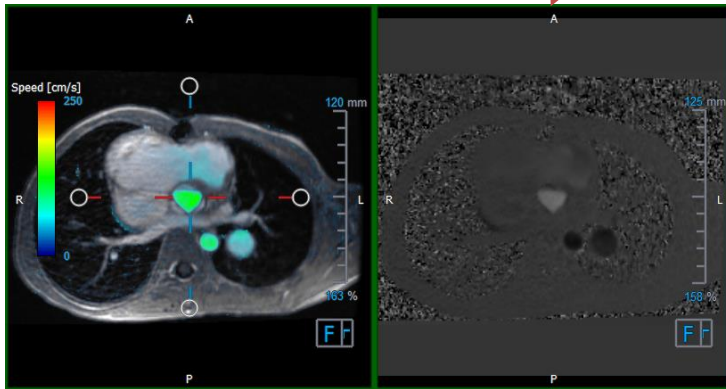


図8 弾性率と位相の画像のフロー解析平面

5.3.3 2D ビューレイアウト

すべてのビューポートに2D方向の画像が表示されます。オプションで、速度、ベクトル、および流線を表示できます。

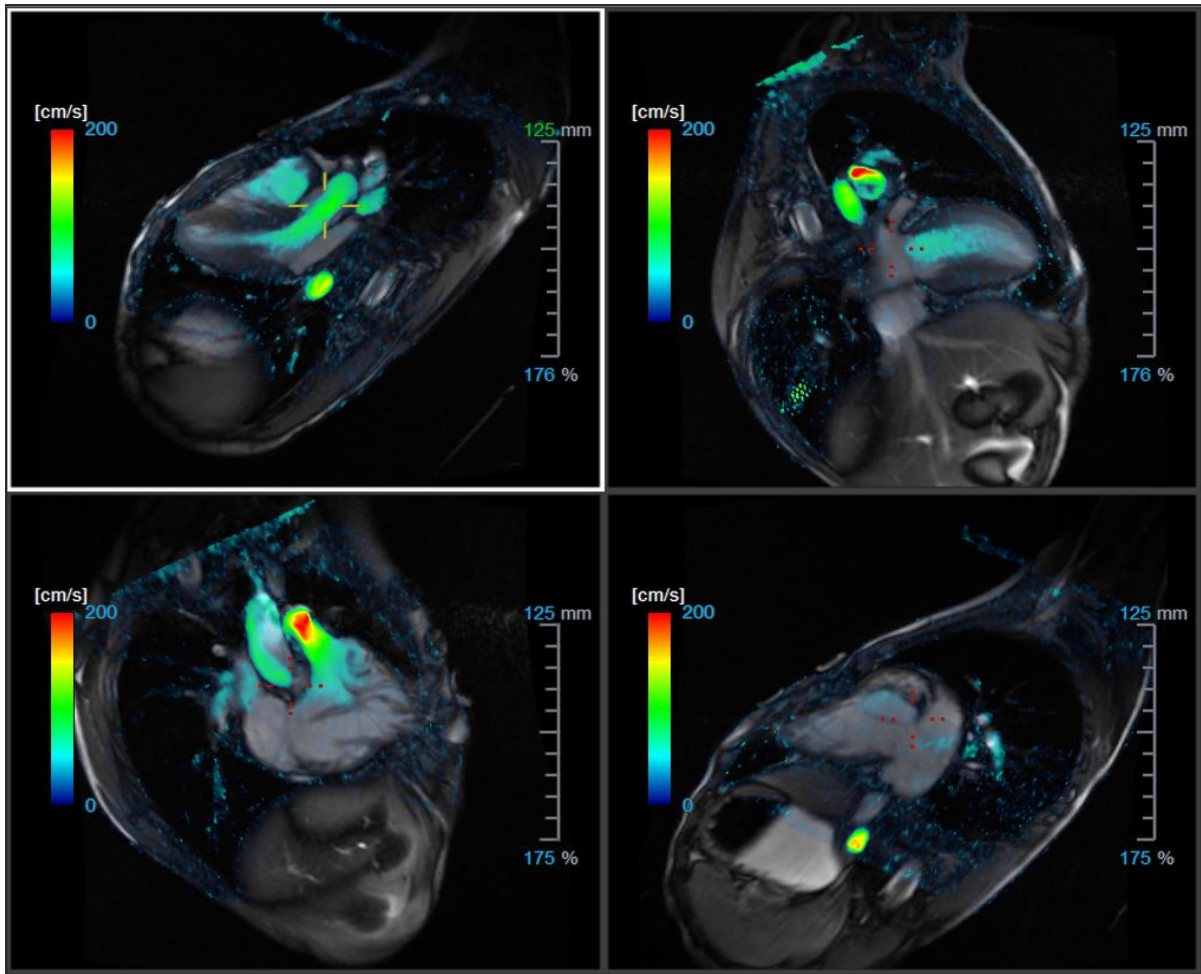


図 92D ビューレイアウトと 4 つの高解像度シリーズ。これらの画像には速度オーバーレイが表示されます。

5.3.3.1 2D ビューレイアウトへの新しいシリーズの読み込み

シリーズは、シリーズブラウザーからビューポートにロードできます。

シリーズをビューポートにロードするには

1. シリーズブラウザーの画像ビューまたはテキストビューでアイテムをクリックして選択します。
2. 選択したシリーズをクリックして、シリーズブラウザーからビューポートにドラッグします。

これにより、シリーズがビューポートに読み込まれます。シリーズに複数スライスが含まれている場合、デフォルトでは中央のスライスが表示されます。シリーズに複数時点が含まれている場合、デフォルトでは最初の時点が表示されます。

アクティブな研究のすべてのシリーズを確認するには

1. キーボードの **Page Down** を押して、次のシリーズをビューポートに読み込みます。

2. キーボードの **Page Up** キーを押して、前のシリーズをビューポートに読み込みます。

5.3.3.2 相互参照





十字線ツールを使用すると、アクティブな画像と画像の位置を、他のビューポートにロードされたさまざまなシリーズの画像と視覚的に関連付けることができます。複数の関連シリーズが読み込まれると、相互参照が表示されます。

十字線の有効化/無効化



- 一般ツールバーの  をクリックして、十字線を有効または無効にします。

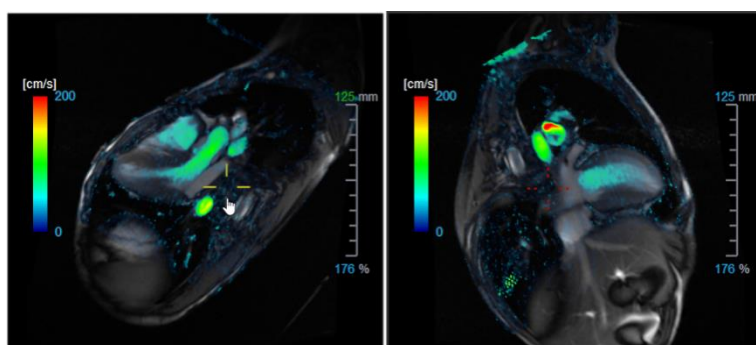


 同じ色の十字線参照は、正確な位置または近くの位置の相互参照があることを意味します。異なる色の十字線は、位置がアクティブな画像の十字線範囲外であることを示します。

5.4 ノイズ除去

QFlow 4Dノイズ除去は視覚化のみのユーティリティです。フロー分析3Dビューレイアウトおよび2Dビューレイアウトで画像を表示するときに使用できます。空気と周囲の静止組織を取り除き、血液プールの動速度を強調します。ノイズ除去を有効にすると、3つの二重斜投影ビューである3Dおよび2Dビューレイアウトビューポートに自動的に適用されます。フロー分析 3Dレイアウトの右上にある速度ビューポートは影響を受けません。

ノイズ除去を制御するパラメーター、標準偏差しきい値と弾性率しきい値の2つがあります。

- 標準偏差のしきい値は0~1%の値を取ることができます。組織の速度に基づいて、除去する静的組織を定義します。
- モジュラスしきい値は、0~100%の値と、モジュラスイメージの強度に基づいて削除する領域を指定できます。削除される領域は、係数画像の強度に基づいており、主に周囲の空気と肺に対応しています。


 QFlow 4D ノイズ除去は定量化や数値結果に影響を与えず、どのデータにも適用されません。

❗ QFlow 4D ノイズ除去では、画像のノイズのみが除去されることを確認してください。

5.4.1 ノイズ除去オプション

ノイズ除去設定を編集するには:


1. 選択  > オプション, ノイズ除去.

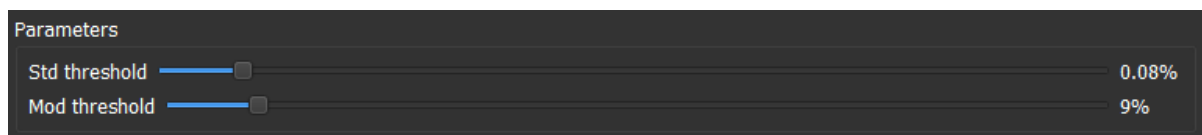

ⓘ どの場合も、値を高くすると、速度オーバーレイが画像から削除されます。

5.4.2 ノイズ除去有効化/無効化

ノイズ除去を有効化/無効化するには:

1. ノイズ除去を有効化するには、ツールバーの  を選択します

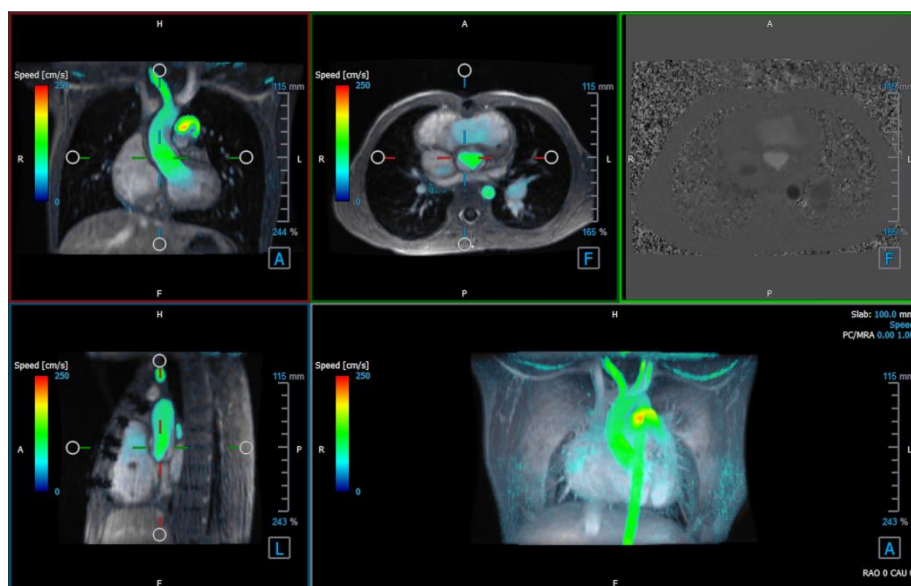



図10 ノイズ除去有効化

2. ノイズ除去を無効化するには、ツールバーのを選択します

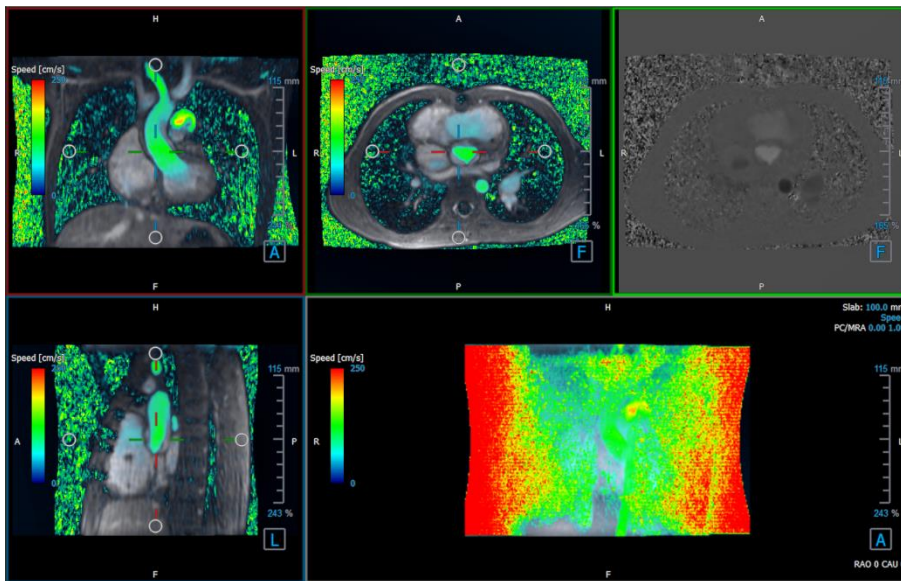


図 11 ノイズ除去無効化

5.5 ビューポートオーバーレイ可視化

QFlow 4D 複数のオーバーレイタイプを提供し、それぞれデータの異なる視覚的側面を定義します。

- PCMRA
- スピード
- ストリームライン
- ベクトル

5.5.1 オーバーレイ表現を切り替え

速度、スチームライン、またはベクターを示すオーバーレイは、有効または無効にできます。フロー分析 3D レイアウトでは、3 つの二重斜投影ビューポートと 3D MIP ビューポートに表示されます。2D ビューレイアウトでは、オーバーレイはシリーズが読み込まれたすべてのビューポートに表示されます。

フロー分析レイアウトのオーバーレイ表示を変更するには：

1. 3D MIP ビューポートで右上のテキストを選択します。
 - オーバーレイ無
 - スピード
 - ストリームライン

- ベクトル

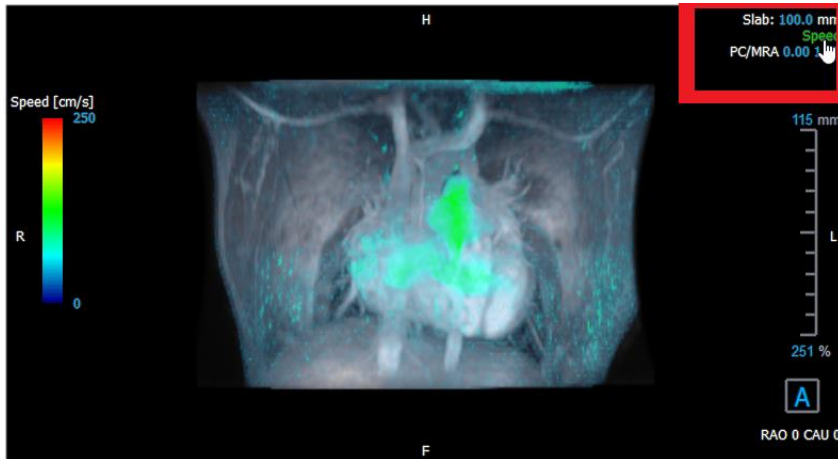


図12 フロー分析 3D レイアウトでのオーバーレイタイプ注釈の選択

または

1. 3D MIP ビューポートの右上隅のテキストを右クリックします。コンテキストメニューを開きます。
2. オーバーレイ無、速度、流線またはベクターを選択します。

2D ビューレイアウトのオーバーレイ表示を変更するには:

1. ビューポートの右上隅のテキストを右クリックします。コンテキストメニューを開きます。
2. オーバーレイ無、速度、流線またはベクターを選択します。

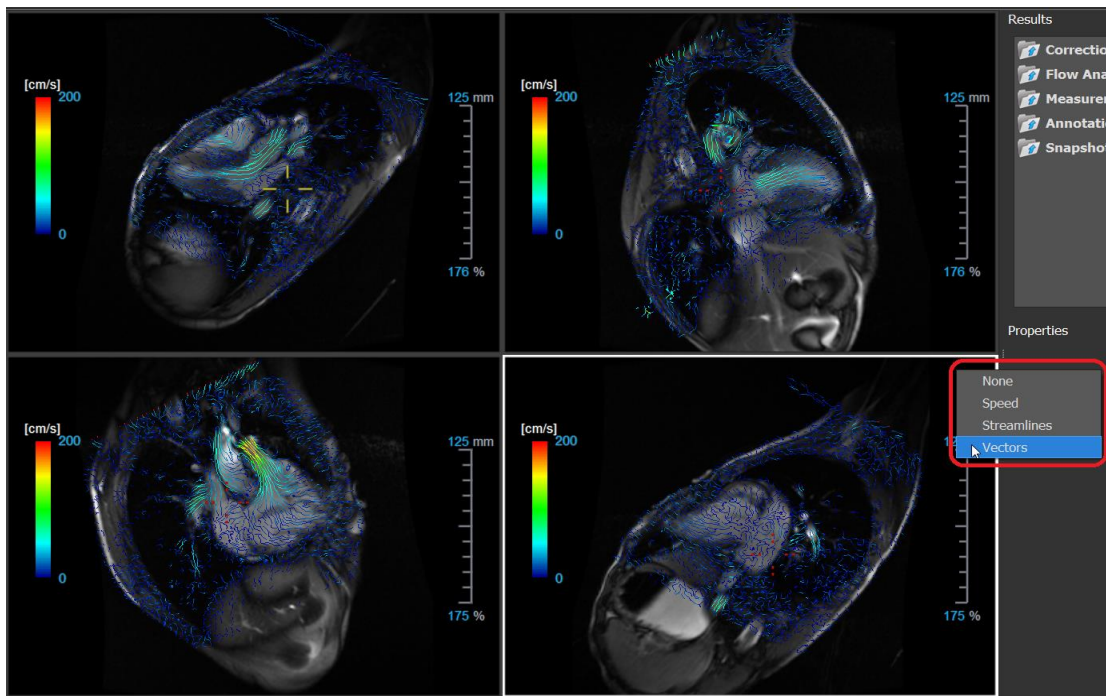


図 132D ビューレイアウトのオーバーレイタイプコンテキストメニューを選択

5.5.2 ストリームライン原点平面オーバーレイ

ストリームラインが 3D MIP ビューポートに表示されている場合、ストリームラインの原点の平面も表示されます。原点の平面は軸方向像、つまり緑色でマークされた上部中央の二重斜投影ビューポート (DOV) を表します。平面は、再構成された係数画像の位置と方向も表します。

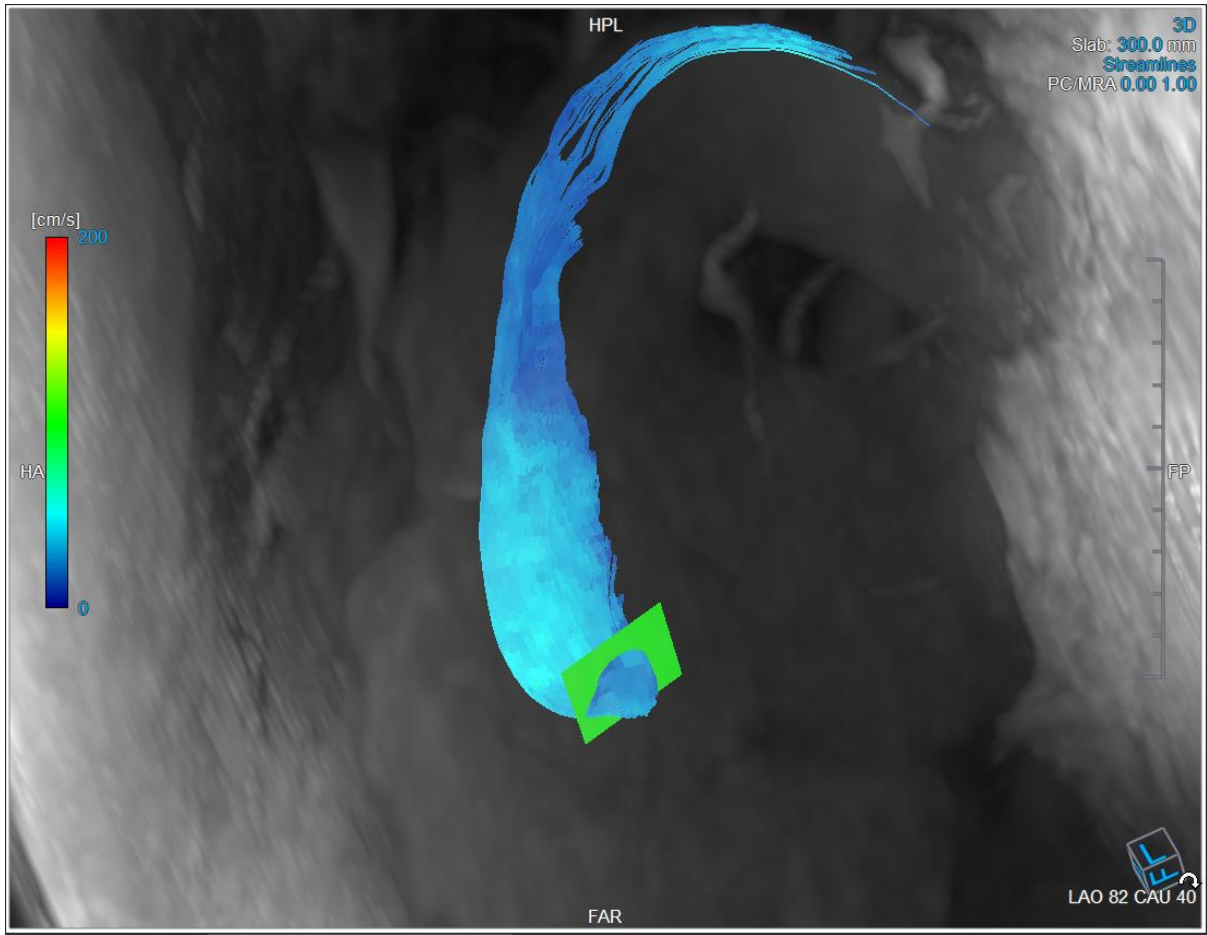



図 314 フロー分析の 3D レイアウトにストリームラインと平面を表示する 3D MIP ビューポート

フロー分析レイアウトの平面原点表示を変更するには：

1. 青い境界線のサジタルビューポートまたは赤い境界線のコロナルビューポートを選択します
2. 軸位置の修正

軸位置を変更するには

1. 1つの軸端にある円形のグリップにマウスを移動します。マウスカーソルが回転カーソル  に変わります。
2. 軸をクリックして目的の角度までドラッグします。

または



3. 軸を垂直方向にドラッグするには、マウスキーを押した後、Ctrl キーを押してドラッグします。

4. 軸を水平方向にドラッグするには、マウスキーを押した後、Shift キーを押しながらドラッグします。




5.6 フレーム選択

いくつかの方法で、画像のフレームを前後に移動できます。

フレーム間を移動するには、ボタンを使用します：

- 表示ツールバーの  または  を押し、前または次のフレームに移動します。

または

- 表示ツールバーの  または  を押して、フレームを逆方向または順方向にシネ再生します。シネ停止には  をクリックします。

または

- 表示ツールバーの  または  を押して、最初または最後のフレームに移動します。

フレーム間を移動するにはキーを使用します：

- 左または右矢印キーを押して、前または次のフレームに移動します。

または

- CTRL + 左矢印、CTRL + 右矢印を押して、フレームを逆方向または順方向にシネ再生します。シネ停止には Esc キーを押します。

または


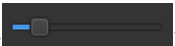
- HOME または END を押して、最初または最後のフレームに移動します。

フレーム間を移動するには、インタラクティブグラフィックを使用します：

- 次のフレームに移動するには、ビューポートでフレーム選択のインタラクティブグラフィック（フレーム）を選択します。


または

- フレームを選択するためのインタラクティブなグラフィックス（フレーム）を右クリックし、目的のフレーム番号を入力します。


 シネ速度は、表示ツールバーのスライダー  で変更できます。

5.7 マウスコントロール

5.7.1 スタッキング

スタックカーソル が表示されたら、**スタッキング**を使用してフレーム間を移動できます。

スタッキングマウスコントロールをアクティブにするには:

- マウスコントロールツールバーの  を押します。

または

- ビューポートのコンテキストメニューから**スタッキング**を選択します。


フレームを前後に重ねるには :

- マウスをクリックして左右に、または上下にドラッグして、フレームをスクロールします。最初または最後のフレームにループします。


または

- スタッキングマウスコントロールのステータスとは関係なく、マウスホイールをスクロールして、フレームをスタックできます。最初または最後のフレームに止まります。

5.7.2 ズーム

拡大カーソル が表示されているときは、**ズーム**を使用してビューポートをズームインまたはズームアウトできます。

ズームマウス操作を有効化するには:

- マウスコントロールツールバーの  を押します。

または

- ビューポートコンテキストメニューから**ズーム**を選択します。


ズームイン/ズームアウトするには:

- マウスをクリックして前後にドラッグすると、ズームインまたはズームアウトします。


または

- マウス操作とは別に、対話型のズームスケールグラフィックをクリックまたはドラッグする、または、Ctrl キーを押しながらマウスホイールを上下にスクロールして、ズームインおよびズームアウトできます。




 現在のズーム率は、ビューポートのスケールグラフィックに表示されます。スケールの上の値は、スケールの物理的なサイズです。スケールの下の数字は、相対的なズームを示します：100%は、1つの表示ピクセルが1つの取得ピクセルと等しいことを意味します。

5.7.3 パンニング

ハンドカーソル  が表示されたら、**パンニング**を使用してビューポート内で画像を左、右、上、下に移動できます。

パンニングマウスコントロールをアクティブにするには：

- マウスコントロールツールバーの  を押します。

または

- ビューポートコンテキストメニューから**パンニング**を選択します。


イメージをパンするには：

- マウスをクリックして任意の方向にドラッグします。


または

- パンマウスコントロールの状態とは関係なく、マウスを中クリックして任意の方向にドラッグすると、画像をパンできます。

5.7.4 ウィンドウ幅とウィンドウレベル

WWL カーソル  が表示されたら、ウィンドウ幅とレベル（WWL）を調整できます。

ウィンドウ/レベルのマウスコントロールをアクティブにするには：

- マウスコントロールツールバーの  を押します。

または

- ビューポートコンテキストメニューから**ウィンドウ/レベル**を選択します。

ウィンドウ幅とレベルを調整するには:

- ビューポート上をクリック & ドラッグ
 - 幅を拡大または縮小するには、右または左。
 - レベルを増減するには上または下。

または


- ウィンドウ/レベルのマウスコントロールに関係なく、右クリックしてドラッグ
 - 幅を拡大または縮小するには、右または左。
 - レベルを増減するには上または下。

または

- ウィンドウ/レベルのマウスコントロールに関係なく、ウィンドウ幅またはレベルのインタラクティブグラフィックをクリックし、上下にドラッグしてウィンドウの幅またはレベルを増減します。


または

- ウィンドウ/レベルのマウスコントロールに関係なく、ウィンドウ幅またはレベルのインタラクティブグラフィックを右クリックして、必要な値を入力します。

 現在のウィンドウ幅とレベルの値は、ビューポートの右下のオーバーレイグラフィックに表示されます。

5.7.5 初期ビューステート

ズーム、パン、ウィンドウの幅とレベルの設定を初期ビュー状態にリセットするには:

-  を押して、ズーム、パン、ウィンドウの幅とレベルをリセットします。

5.8 標準測定

QFlow 4D 次の標準測定をサポートしています:

- 注釈
- 距離測定
- 面積測定
- スナップショット

5.8.1 注釈

注釈をビューポートに追加して、分析用にマークしたり、詳細情報に注意を示すことができます。ビューポートに表示される注釈アクティブな研究のすべての注釈が**結果**ペインに一覧表示されます。

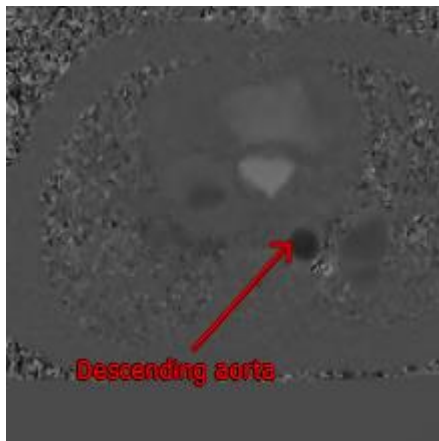


図 15 注釈例

💡 別のシリーズを選択するか、アクティブなシリーズの別時点に移動すると、注釈がビューポートに表示されなくなります。これは、注釈が参照するポイントが現在表示されている画像上にないためです。もう一度注釈を表示するには、**結果**ペインの注釈を右クリックして、**検索**を選択します。または、**結果**ペインの注釈をダブルクリックします。

注釈の作成、編集、削除の詳細については、Medis Suite ユーザーマニュアルを参照してください。

5.8.2 距離測定

あるポイントから別のポイントまでの距離を測定する手順。距離を測定したら、注釈と測定の終点を変更できます。アクティブな研究のすべての距離測定が**結果**ペインに一覧表示されます。アクティブなセッションのすべての距離測定値は、Medis Suite の**結果**ペインに一覧表示されます。

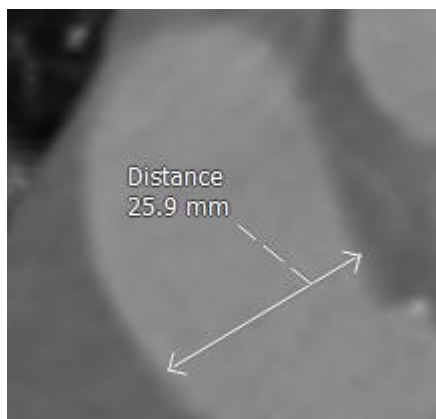


図 16 距離測定例

💡 別のシリーズを選択するか、アクティブなシリーズの別の時点に移動すると、距離測定がビューポートに表示されない場合があります。これは、測定したポイントが現在表示されている画像上にないためです。もう一度測定を表示するには、**結果ペイン**の測定を右クリックして、**検索**を選択します。または、**結果ペイン**の測定をダブルクリックします。

距離測定の作成、編集、削除、および結果の、クリップボードへのコピー方法詳細については、Medis Suite ユーザーマニュアルを参照してください。

5.8.3 面積測定

エリア測定ツールを使用して、2D エリアを描画および測定します。面積を測定したら、面積の輪郭または注釈を変更できます。アクティブな研究のすべての面積測定が**結果ペイン**に一覧表示されます。アクティブなセッションのすべての面積測定値は、Medis Suite の**結果ペイン**に一覧表示されます。



図 17 面積測定例

💡 別のシリーズを選択するか、アクティブなシリーズの別の時点に移動すると、面積測定がビューポートに表示されない場合があります。これは、面積を測定した画像が現在表示されている画像と異なるためです。もう一度測定を表示するには、**結果ペイン**の測定を右クリックして、**検索**を選択します。または、**結果ペイン**の測定をダブルクリックします。

面積測定の作成、編集、削除、および結果の、クリップボードへのコピー方法詳細については、Medis Suite ユーザーマニュアルを参照してください。

5.8.4 スナップショット

スナップショットは、分析または診断の証拠として保存できます。スナップショットは**プロパティペイン**に表示され、**結果ペイン**に一覧表示されます。スナップショットが作成されたら、いつでも名前を変更できます。

💡 別シリーズを選択するか、アクティブなシリーズの別の時点に移動すると、スナップショットに表示される注釈と測定値がビューポートに表示されない場合があります。これは、注釈と測定が作成されたポイントが現在表示されている画像上にないためです。スナップショットが作成されたのと同じシリーズと同時点に戻るには、**結果ペイン**でスナップショットを右クリックして、**検索**を選択します。または、**結果ペイン**のスナップショットをダブルクリックします。

スナップショットの作成、編集、削除の詳細については、Medis Suite ユーザーマニュアルを参照してください。

6 分析 QFlow 4D 実行

フロー分析手順は、一連の時間分解 3D ボリュームを 2D CINE シリーズに再フォーマットし、QFlow で定量化できます。

QFlow 4D フロー解析を実行するには、次のガイドラインを使用できます。

- シリーズ読み込み
- データを視覚的に検査
ノイズ除去の適用: ノイズ除去ノイズ除去 [5.4] を参照してください。
- オプション: すべての流れ速度の方向を確認する
- 視覚: 位相接続を作成
- オプション: 背景補正を作成する
- フロー分析を開始
- レポートのレビュー
- セッション保存


6.1 流速方向の確認: 概要


4D フローMRI データセットは、3つの速度方向でエンコードされた時間分解された3次元シリーズと、単一の係数（またはマグニチュード）シリーズで構成されます。QFlow4Dにおける、3つの速度方向は次のとおりです。


- LR/RL（左-右/右-左）
- HF/FH（頭-足/足-頭）
- AP/PA（前方-後方/後方-前方）

速度エンコーディングが正の場合ピクセルは白であり、負の場合は黒です。データがRL方向にエンコードされるシリーズでは、右から左のフローを示す領域は正であり、視覚的に白いピクセルとして表示されます。一方、左から右へのフローを示す領域は負で、黒として表示されます。

4D Flow MRI フィールドの速度エンコード方向に標準化がない場合、データの方向を確認する必要があります。

 ユーザーはすべての向きを確認する必要があります。

 すべての Siemens 及び Philips スキャナーが 4D Flow MR 取得プロトコルをシリーズで利用できるわけではありません。したがって、正しい速度方向は保証されないため、検証する必要があります。

 後処理パッケージは、速度エンコードの方向を変更する場合があります。


💡 QFlow 4D が速度エンコードを正しく決定しなかった場合は、システムを正しく構成するためのサポートについて、インストール&サポートに連絡してください。サポートセクションの参照



図 18 係数画像

❗ H、P、A、F は、流れの方向と画像の向きを決定させるインジケータです。

❗ 右下隅にある方向キューブは、表示方向を変更するために変更できます。図 18 係数画像を参照：

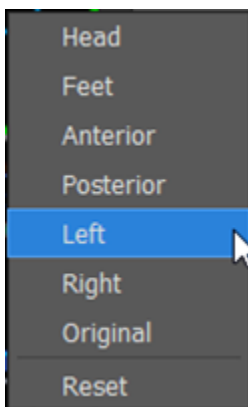

6.1.1 すべての流速方向を確認する

全ての流速方向を確認するには:

1. ツールバーの  を押します

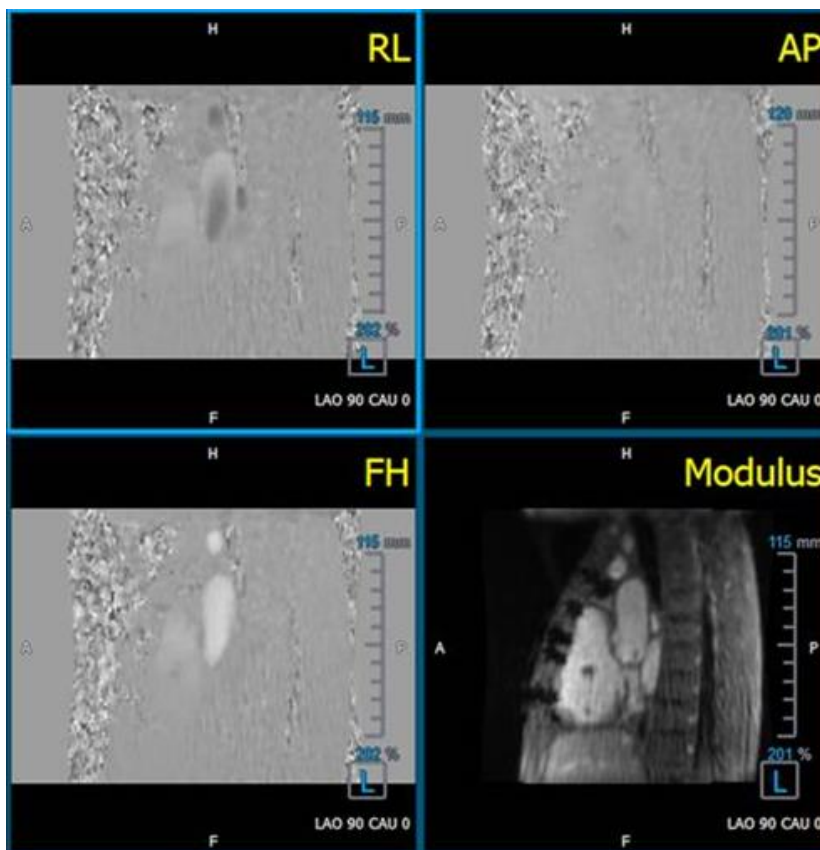



図 19 流速度方向レイアウトの確認

2. MODULUS ビューポートの向きを左
 - ① ビューポートの右下隅にある正方形の「L」にします。
3. MODULUS ビューポートで、画像をスクロールして、下行大動脈と心腔を含むスライスを見つけます。
4. 画像に最高速度の強度信号がある、収縮期の時間枠を決定します。
5. HF / FH 速度方向を確認する
6. AP / PA 速度方向を確認
7. RL / LR 速度方向を確認

6.1.2 HF / FH 速度方向を確認する

HF / FH 速度方向を確認するには:

1. ツールバーの  を押します
2. MODULUS ビューポートの向きを左
 - ① ビューポートの右下隅にある正方形の「L」にします。
3. MODULUS ビューポートで画像をスクロールして、下行大動脈と心腔を含むスライスを見つけます。
4. 画像が決定的な速度信号を示す、収縮期の時間枠を決定します。
5. 以下に示す以下の状況の少なくとも1つが正しいことを確認してください。そうでない場合は、Medis サポートに連絡してください。参照項: **サポート**
 - ① 下行大動脈が白の場合、HF / FH ビューを含むビューポートでは、速度エンコード方向は HF でなければなりません。
 - ① 下行大動脈が黒の場合、HF / FH ビューを含むビューポートでは、速度エンコード方向は FH でなければなりません。

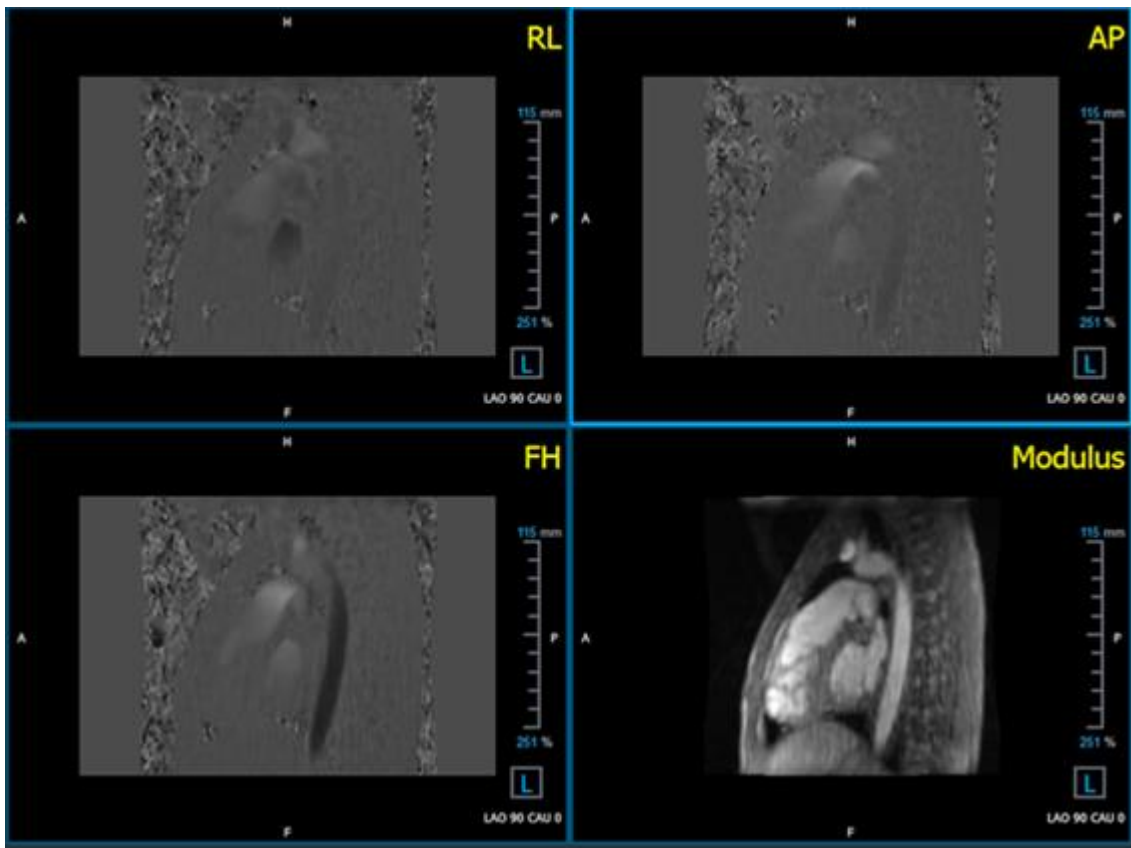



図20 流速方向レイアウトの確認

6.1.3 AP / PA 速度方向を確認

AP / PA 速度方向を確認するには:

1. ツールバーの  を押します
2. MODULUS ビューポートの向きを左（ビューポートの右下隅にある正方形の「L」）にします。
3. MODULUS ビューポートで大動脈弓を見つけます。
4. 画像が決定的な速度信号を示す、収縮期の時間枠を決定します。
5. 以下に示す以下の状況の少なくとも1つが正しいことを確認してください。そうでない場合は、Medis サポートに連絡してください。参照項: **サポート**

❗ 大動脈弓が白の場合、PA / AP ビューを含むビューポートでは、速度エンコード方向は AP でなければなりません。

❗ 大動脈弓が黒の場合、PA / AP ビューを含むビューポートでは、速度エンコード方向は PA である必要があります。

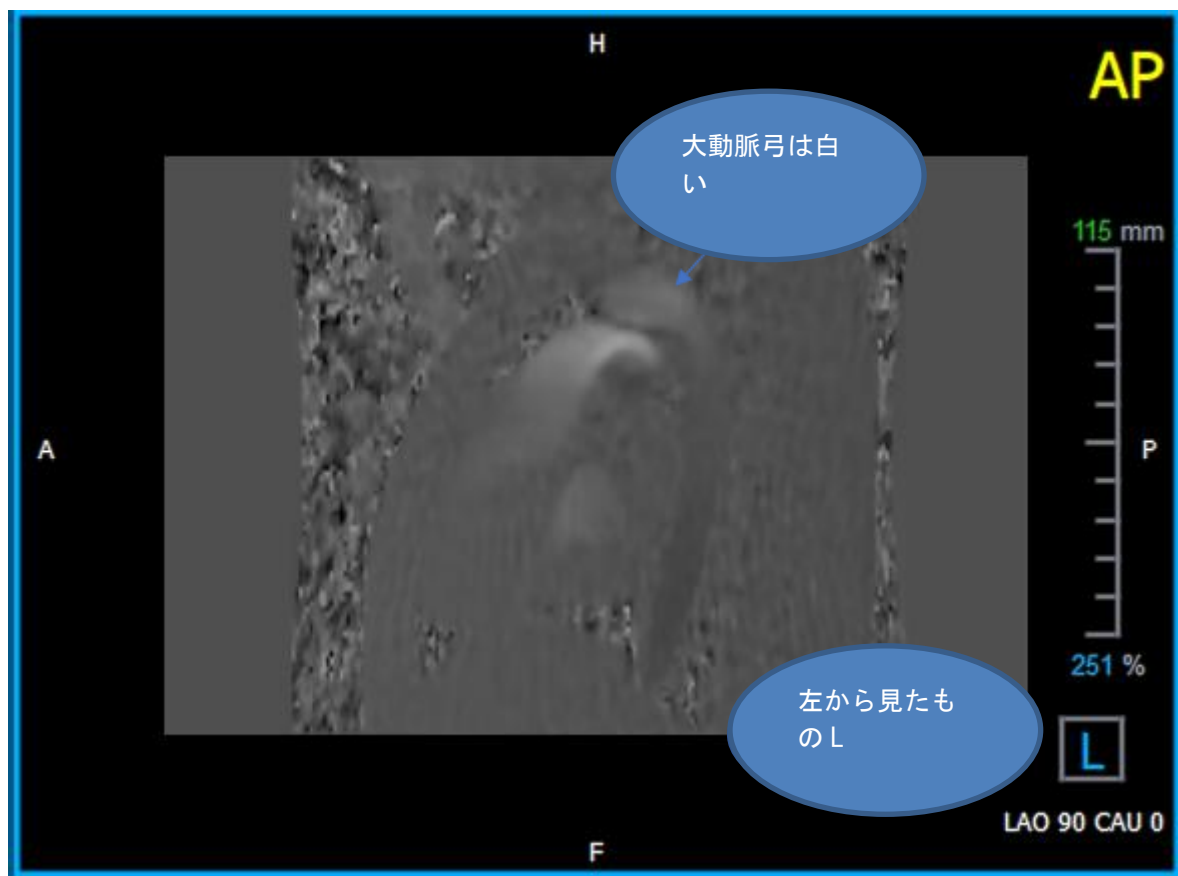



図 21AP 正としてエンコードされた、白い大動脈弓と暗い下行大動脈があるビューポート

6.1.4 RL / LR 速度方向を確認

AP / PA 速度方向を確認するには:

1. ツールバーの  を押します
2. MODULUS ビューポートの向きを ANTERIOR/前にします
 ① ビューポートの右下隅にある正方形の「A」にします。
3. MODULUS ビューポートで、上行大動脈を含むスライスを見つけます。
4. 画像が決定的な速度信号を示す、収縮期の時間枠を決定します。
5. 以下に示す以下の状況の少なくとも1つが正しいことを確認してください。そうでない場合は、Medis サポートに連絡してください。参照項: **サポート**

① RL / LR ビューを含むビューポートでは、近位上行大動脈が白で、遠位上行大動脈が黒の場合、向きは LR です。

② RL / LR ビューを含むビューポートでは、近位上行大動脈が黒で遠位上行大動脈が白の場合、方向は RL です。

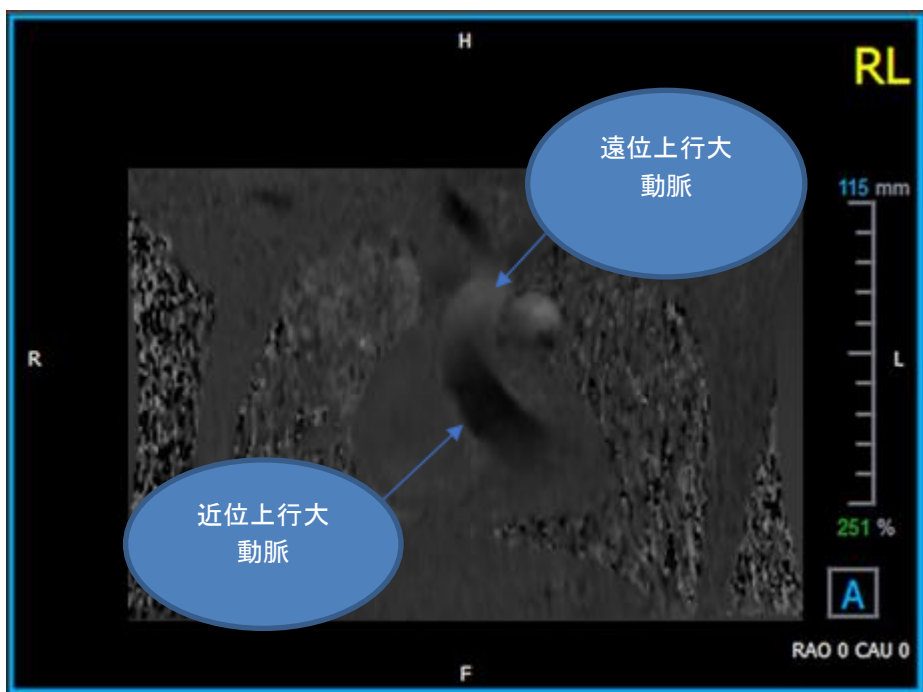



図 22RL 近位および遠位上行大動脈を含む、正にエンコードされたビューポート

6.1.5 速度方向検証ビューを閉じます



1. ツールバーの  を押しますレイアウトは QFlow 4D 分析レイアウトを返します。

6.1.6 カスタムシステムオプション

特定データセットの速度方向が正しくない場合は、Medis のインストール&サポートにお問い合わせください。

6.2 背景補正

位相速度データの品質は、背景位相歪みの結果として損なわれる可能性があります。これらの歪みは、データに定常フローフィットアルゴリズムを適用することで修正できます。背景補正ユーティリティは、データから位相オフセットエラーを削除し、それによって位相オフセットエラーを補正する定量的なツールです。

定常フローフィットアルゴリズムとも呼ばれる背景補正には、静的組織マスクを定義する**標準偏差しきい値**と、フィッティングの複雑さのレベルを定義する**フィッティング次数**の2つの構成可能な設定があります。

標準偏差しきい値

標準偏差のしきい値が低いと、静的組織のボリュームが不十分になり、正確な背景補正が得られる場合があります。


標準偏差のしきい値が高いと、流動領域が静的組織として含まれる可能性があり、背景補正が不正確になります。


25%の標準偏差しきい値がデフォルトです。

フィッティング順序

定常流適合アルゴリズムの適合順序は、位相オフセットエラーを修正するために使用される適合平面の複雑さを定義します。計算時間は長くなりますが、1次、2次、3次という3つのフィッティング次数があり、それぞれ理論的にはより高度な背景補正を生成します。


背景補正の設定はすべての再構成に使用され、各再構成出力の一部として**結果ペイン**の Medis Suite のレポートタブに公開されます。

 背景補正は再構成手順に影響します。背景補正が変更または完了すると、現在のセッションの既存の再構築はすべて、新しい背景補正されたデータを使用するように更新されます。

 ノイズ除去は背景補正には影響しません。


6.2.1 背景補正を有効化

背景補正を有効化する

1. ツールバー上の  を押します


背景補正のプロパティペインには、以下が表示されます。

- 背景補正進行状況
- 選択したしきい値
- 選択したフィッティング順序
- 修正をキャンセルするキャンセルボタン

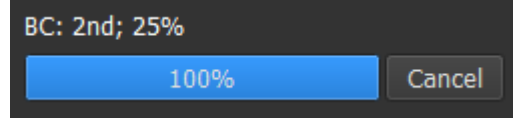

背景補正は、結果ペインの修正リストで選択できます。これにより、対応するプロパティペインが表示されますタグを挿入する。

プロパティペインから、各背景補正を見つけ、削除し、名称を変更できます。プロパティペインには、背景補正オプションと進行状況が表示されます。

 背景補正のしきい値またはフィッティング順序に対する変更は、現在のセッションのすべての再構築に適用されます。


6.2.2 背景補正を削除

作成された背景補正は削除できます。

背景補正を削除する

1. **結果ペイン**の修正リストで背景補正を選択します。
2. キーボードの Delete キーを押すか、右クリックして**削除**を選択します。


これは背景補正を削除します。



 背景補正を削除すると、現在のセッションのすべての再構成が更新されます。

6.2.3 背景補正オプション

オプションメニューを使用して、背景補正設定を変更および適用できます。

背景補正の設定を変更するには：

1. 選択  > オプション, 背景補正

- 標準しきい値はスライダーで変更できます .
 - 定常流フィット、フィット順序を選択できます。
2.  背景補正のしきい値またはフィッティング順序に対する変更は、現在のセッションのすべての再構築に適用されます。

6.3 位相接続

正しく選択されていないVencの結果として、位相速度データの品質が低下する可能性があります。Vencを超える速度は、位相速度データでエンコードできず、「接続」されて表示されず、つまり値が低くなります。これは、エイリアシングと呼ばれる現象です。位相接続アルゴリズムは、データのエイリアシングを検出し、対応するシフトをフェーズ速度データに適用することで元に戻します。

位相接続アルゴリズムには2つのパラメーターと、上限しきい値と下限しきい値があり、その値はオプションで変更できます。位相接続アルゴリズムの最初の計算では、任意の値であるエイリアシングの量が生成されます。ただし、エイリアスは常に2 Vencであると想定されています。それに応じてアルゴリズムの出力を制限するために、値が2 Vencに丸められる**上限しきい値**と、値が-2Vencに丸められる**下限しきい値**があります。


上限しきい値


上限しきい値は0から2 Vencの間の値を取ることができます。このしきい値の値が高いほど、正の速度方向でのエイリアシング識別においてアルゴリズムが保守的になり、値が低いほど、アルゴリズムはエイリアシングをより簡単に識別できます。0.5 Venc未満の上限しきい値はお勧めしません。


下限しきい値

下限しきい値は、-2 Vencと0の間の値を取ることができます。このしきい値の値が低いほど、負の速度方向でのエイリアシング識別においてアルゴリズムが保守的になり、値が高いほど、アルゴリズムはエイリアシングをより簡単に識別できます。-0.5 Vencを超える低いしきい値はお勧めしません。

位相接続はすべての再構築に使用され、存在するかどうかは、Medis Suiteのレポートタブの結果ペインに各再構成出力の一部として公開されます。


 位相接続は、再構成と背景補正の手順に影響します。位相接続が完了すると、既存の背景補正と、その後の現セッションでのすべての再構成が、新しい接続データを使用するように更新されます。

 パフォーマンスを向上させるには、背景補正の前に位相接続を適用し、終了後に背景補正が再計算されないようにします。

 ノイズ除去と背景補正は、位相接続には影響しません。


6.3.1 位相接続の有効化

位相接続を有効化する

1. ツールバー上の  を押す

位相接続のプロパティペインには、以下が表示されます。

- 位相接続進行状況
- 接続キャンセルするためのキャンセルボタン

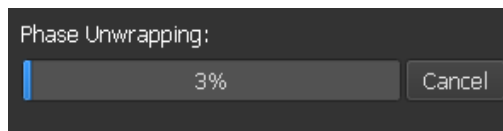

位相接続は、結果ペインの修正リストで選択できます。これにより、対応するプロパティペインが表示されますタグを挿入する。

結果ペインから、位相接続を見つけ、削除し、名前を変更できます。プロパティペインに位相接続の進行状況が表示されます。


6.3.2 位相接続の削除

作成された位相接続は削除できます。

位相接続を削除するには：

1. 結果ペインの修正リストで位相接続を選択します。
2. キーボードの Delete キーを押すか、右クリックして削除を選択します。


これは位相接続を削除します。


 位相接続を削除すると、現在のセッションのすべての再構成が更新されます。



6.3.3 位相接続オプション

オプションメニューを使用して、位相接続設定を変更および適用できます。

位相接続設定を修正するには：

1. 選択  > オプション, 位相接続.

- 上限しきい値は上部スライダーで変更できます .


- 下限しきい値は下部スライダーで変更できます 
2.  位相接続パラメーターへの変更は、すべての背景補正と再構成に適用されます。


6.4 フロー分析


QFlow 4D フロー分析は**再構成**と呼ばれます。フロー分析手順では、時間ベースの 3D ボリュームを 2D シリーズに再フォーマットし、別のアプリ QFlow 2D で定量化できます。

これらは、流動解析を完了するための手順です。

1. 目的の平面を見つけます。二重斜投影ビューを参照してください。
2. フロー分析を開始
 - オプション：再構成の名前を変更する
3. フロー分析を完了
4. フロー解析ラベルの名前を「再構成」から適切なラベルに変更します。

 すべてのフロー分析の結果は、QFlow 4D 結果、レポート、およびセッションに保存されます。

 複数のフロー解析を開始できます。

 QFlow 4D のフロー分析は、既存の QFlow アプリケーションを使用して外部 QFlow 4D の別のタブで実行されます。

6.4.1 フロー分析を開始

QFlow 4D フロー分析の検索、名前変更、エクスポート、削除をサポートします。フロー分析には、デフォルトで「再構成」というラベルが付いています。

フロー分析を開始する

- ツールバーから  を選択

または

3. ビューポートエリアで右クリックコンテキストメニューを開きます。
4. フロー分析を選択

6.4.2 フロー分析アプリ

フロー分析は、QFlow 4D 再フォーマットされたデータセットで開始されます。



- F1 キーを押します。
- ヘルプボタン  を押します。
- 右上隅の Medis Suite メインメニューボタン  > ヘルプ > ユーザードキュメントを選択します。Flow 2D 使用方法詳細については QFlow 2D ユーザーマニュアルを参照してください。



図 23 フロー分析をホストする QFlow2D

6.4.3 複数のフロー分析

QFlow 4D 複数フロー分析をサポートします新しいフロー分析ごとに新しいタブが作成されます。

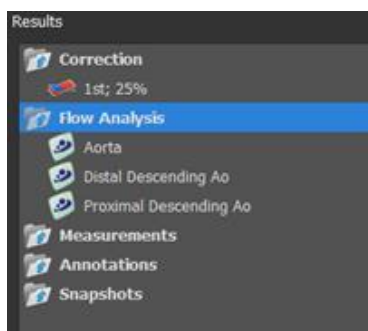


図 24 結果ペインに複数のフロー解析

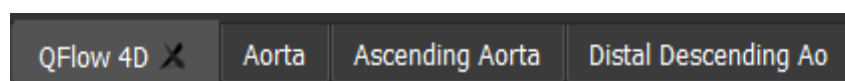


図 25 それぞれフロー解析を備えた複数タブリスト

レポート

QFlow 4D 結果は、Medis Suite の結果ペインと Medis Suite レポートに表示されます。

Report created by:
Report date/time:
Session name:

Medis

Patient Study Info

Name: Study date: 11/11/2010
ID: Description: MRI Heart Morph + Func w/ + w/o Con
Birthdate: Accession number:
Age/Gender: Referring physician's name:
Modality: Institution name:
Manufacturer: Performing physician's name:
Manufacturer model: Operator's name:
Acquisition number: 1

Reason for Referral [Edit]

QFlow 4D Stable Daily 1.0 #1

Background Correction

Fitting Order: 1
Std Threshold: 25%

Reconstruction 01 Results ROI 1:[ROI 1] slice 1

ROI 1:[ROI 1] slice 1	per HB	per Minute
Net flow volume	34.17 ml/beat	3.04 l/min
Forward flow volume (S.I)	34.45 ml/beat	3.06 l/min
Backward flow volume (S.I)	0.27 ml/beat	0.02 l/min
Regurgitant fraction (S.I)	0.80 %	
Average flow velocity	19.90 cm/s	
Peak flow velocity	145.10 cm/s	
Peak pressure gradient	8.42 mmHg	
Min vessel area	257.63 mm ²	
Max vessel area	293.36 mm ²	



Reconstruction 01 Results ROI 2:[ROI 2] slice 1

ROI 2:[ROI 2] slice 1	per HB	per Minute
Net flow volume	-14.14 ml/beat	-1.26 l/min
Forward flow volume (S.I)	18.95 ml/beat	1.68 l/min
Backward flow volume (S.I)	4.81 ml/beat	0.43 l/min
Regurgitant fraction (S.I)	25.39 %	

Conclusions [Edit]

図26 QFlow 4D 結果を含む Medis Suite レポート

Medis Suite のレポート機能は、Medis Suite のユーザーマニュアルに記載されています。Medis Suite のドキュメントは、次のように開くことができるユーザードキュメントタブから利用できます。


- F1 キーを押します。
-  ヘルプボタンを押します。
- 右上隅の Medis Suite メインメニューボタン  ヘルプ > ユーザードキュメントを選択します。

7

セッション

QFlow 4D 状態は Medis Suite セッションで保存できます。セッションをリロードして、分析を続行または確認できます。

Medis Suite のセッション機能については、Medis Suite ユーザーマニュアルで説明しています。Medis Suite のドキュメントは、次のように開くことができるユーザードキュメントタブから利用できます。

- F1 キーを押します。
-  ヘルプボタンを押します。

- 右上隅の Medis Suite メインメニューボタン  ヘルプ > ユーザードキュメントを選択します。

8

ショートカットキー

QFlow 4D を使用している場合、キーボードとマウスのアクションのキーのいくつかの組み合わせを使用して、次のタスクをすばやく実行できます。

押す	To
レイアウト	
F11	ワークスペースウィンドウペインの表示または非表示
イメージコントロール	
ミドルクリック & ホールド	全てのグラフィックを非表示
ミドルクリックとドラッグ、または Ctrl & ドラッグ	Pan
Ctrl+Shift & ドラッグ	ズーム
Alt+Shift & ドラッグ	スタック
手順	
A	面積測定を作成
D	距離測定を作成
S または CTRL+SPACE	スナップショットを作成
Esc	手順編集を停止
Delete	現在選択した手順を削除

押す	To
SHIFT+Delete	全ての手順を削除
ナビゲーションコントロール	
ホーム	開始点を表示
終了	最終点を表示
上矢印	前スライスを表示
下矢印	次スライスを表示
左矢印	前回点を表示
右矢印	次回点を表示
CTRL+左矢印	シネバックワードを再生
CTRL+右矢印	シネフォワードを再生
Esc	シネ再生を停止
ページアップ	前シリーズを表示
ページダウン	次シリーズを表示

9 一般参照

前部（または**腹側**）は、身体の正面または正面方向を示します。つま先は足前にあります。

後方（または**背側**）背中または体の背中への方向を表します。膝窩は膝蓋骨の後方にあります。

流線血管などの解剖学的構造に沿った血流を表します。それらは接続された線のグループを表し、各線の色は特定箇所での速度を示します。

ベクトル対象の構造を通過する微視的な血液粒子について説明します。矢印で方向を、色で速度を表します。